

# Produktkatalog

## NAÍDA CI M & SKY CI M

SOUNDPROZESSOREN UND ZUBEHÖR



MARVEL CI



ADVANCED  
BIONICS

POWERFUL CONNECTIONS



# VERBUNDEN MIT DEN WERTVOLLSTEN MOMENTEN IM LEBEN

<b>MARVEL CI SOUNDPROZESSOREN</b> .....	4
Farbauswahl .....	5
<b>SLIM-ÜBERTRÄGER</b> .....	6
Überträger .....	6
Farbkappen .....	6
Slim-Überträger Magnete .....	7
<b>WASSERDICHTES ZUBEHÖR</b> .....	8
Staub- und Wasserdichter Akku und Slim-Überträger AquaMic .....	8
Farbauswahl .....	9
<b>BATTERIE/- AKKUOPTIONEN</b> .....	10
Farbauswahl .....	11
Ladegerät .....	11
<b>OHRBÜGEL</b> .....	12
<b>AKUSTIKHÖRER</b> .....	12
<b>T-MIC MIKROFON</b> .....	12
<b>TRAGEOPTIONEN</b> .....	13
<b>WEITERES ZUBEHÖR</b> .....	14
AB Remote Support App .....	15
AB Remote App .....	15
<b>KONNEKTIVITÄT</b> .....	16
Roger Zubehör .....	17
Phonak Zubehör .....	17
<b>BEIDSEITIGE HÖRLÖSUNGEN</b> .....	18
Phonak Naída Link M .....	20
Phonak Sky Link M .....	20
Phonak CROS P-13 .....	21
<b>TECHNISCHE ÜBERSICHT</b> .....	22


# MARVEL CI SOUNDPROZESSOREN SPEZIELL FÜR SIE ENTWICKELT

Die Naída™ CI M und Sky CI™ M Soundprozessoren sind Teil eines innovativen, modernen Cochlea-Implantatsystems, das ein brillantes Hörerlebnis liefert. Das bedeutet nicht nur vollen Klang und exzellentes Hören in jeder Umgebung, sondern auch Flexibilität und Robustheit, damit Sie oder Ihr Kind alle Abenteuer des Lebens ohne Einschränkungen genießen können.

Naída CI M und Sky CI M bieten über das **Betriebssystem AutoSense OS™ 3.0** eine ganze **Reihe von Funktionen** zur Verbesserung der Hörleistung in allen Hörsituationen **und mit direktem Streaming** von einer Vielzahl von Geräten. Sie können sich darauf verlassen, dass das System in jeder Hinsicht nahtlos arbeitet und somit eine intuitive, kinderleichte Handhabung bietet. Weitere Informationen zur Produkt- und Funktionsunterscheidung finden Sie in der Technischen Übersicht (Seite 22).

## KOMPONENTEN

1. M T-Mic™ Mikrofon mit Abdeckung
2. Soundprozessor
3. Vorderes Mikrofon
4. Multifunktionstaste mit LED-Statusanzeige
5. Hinteres Mikrofon
6. M Akku
7. Slim-Überträger mit integriertem Kabel

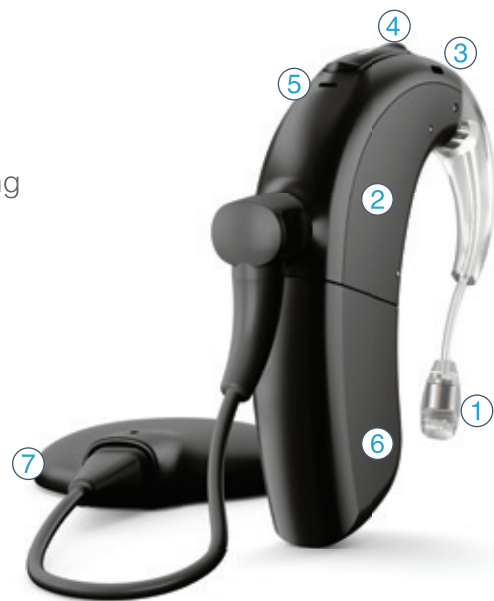

### NAÍDA CI M90

### SKY CI M90

Farbe	Naída CI M90	Sky CI M90
ALPINWEISS	CI-5293-110	CI-5295-110
SAND BEIGE	CI-5293-120	CI-5295-120
KASTANIE	CI-5293-130	CI-5295-130
SILBERGRAU	CI-5293-140	CI-5295-140
SAMTSCHWARZ	CI-5293-150	CI-5295-150
CARIBBEAN PIRATE	N/A	CI-5295-190
PRECIOUS PINK	N/A	CI-5295-250
BLUE OCEAN	N/A	CI-5295-260
MAJESTY PURPLE	N/A	CI-5295-270
LAVA RED	N/A	CI-5295-280
RESIN BEIGE*	CI-5293-240	CI-5295-240














\*Diese unlackierten Soundprozessoren sind hypoallergen und damit für Patienten geeignet, die eine Allergie gegen Farblackierungen aufweisen. Auf Bestellung gefertigt, bitte wenden Sie sich vor der Bestellung an Ihre lokalen Advanced Bionics Ansprechpartner.



# SLIM-ÜBERTRÄGER

Naída CI M und Sky CI M verfügen über einen brandneuen, **schlanken Überträger** für noch mehr Tragekomfort. Dank seines flachen Profils, steht er Ihrem aktiven Lebensstil nicht im Wege.











SLIM-ÜBERTRÄGER 9 CM (3,5") BEIGE <sup>1</sup>		CI-5320-001
SLIM-ÜBERTRÄGER 9 CM (3,5") SCHWARZ <sup>1</sup>		CI-5320-002
SLIM-ÜBERTRÄGER 9 CM (3,5") BRAUN <sup>1</sup>		CI-5320-003
SLIM-ÜBERTRÄGER 9 CM (3,5") GRAU <sup>1</sup>		CI-5320-004
SLIM-ÜBERTRÄGER 9 CM (3,5") WEISS <sup>1</sup>		CI-5320-005
SLIM-ÜBERTRÄGER 11 CM (4,25") BEIGE <sup>1</sup>		CI-5320-006
SLIM-ÜBERTRÄGER 11 CM (4,25") SCHWARZ <sup>1</sup>		CI-5320-007
SLIM-ÜBERTRÄGER 11 CM (4,25") BRAUN <sup>1</sup>		CI-5320-008
SLIM-ÜBERTRÄGER 11 CM (4,25") GRAU <sup>1</sup>		CI-5320-009
SLIM-ÜBERTRÄGER 11 CM (4,25") WEISS <sup>1</sup>		CI-5320-010
SLIM-ÜBERTRÄGER 14 CM (5,5") BEIGE <sup>1</sup>		CI-5320-011
SLIM-ÜBERTRÄGER 14 CM (5,5") SCHWARZ <sup>1</sup>		CI-5320-012
SLIM-ÜBERTRÄGER 30,5 CM (12") SCHWARZ <sup>2</sup>		CI-5322-001

<sup>1</sup>Für die Verwendung am Ohr (kein integriertes Mikrofon)

<sup>2</sup>Für die ohrferne Verwendung (mit integriertem Mikrofon)

# SLIM-ÜBERTRÄGER FARBKAPPEN

FARBKAPPE LAVA RED		CI-7131-001
FARBKAPPE BLUE OCEAN		CI-7131-002
FARBKAPPE MAJESTY PURPLE		CI-7131-003
FARBKAPPE SAND BEIGE		CI-7131-004
FARBKAPPE KASTANIE		CI-7131-005
FARBKAPPE SILBERGRAU		CI-7131-006
FARBKAPPE SAMTSCHWARZ		CI-7131-007
FARBKAPPE CARIBBEAN PIRATE		CI-7131-008
FARBKAPPE PRECIOUS PINK		CI-7131-009
FARBKAPPE ALPINWEISS		CI-7131-010
FARBKAPPE RESIN SCHWARZ*		CI-7131-011
FARBKAPPE SAND BEIGE, GROSS		CI-7132-001
FARBKAPPE KASTANIE, GROSS		CI-7132-002
FARBKAPPE SILBERGRAU, GROSS		CI-7132-003
FARBKAPPE SAMTSCHWARZ, GROSS		CI-7132-004
FARBKAPPE RESIN SCHWARZ, GROSS*		CI-7132-005
WECHSELWERKZEUG FÜR SLIM-ÜBERTRÄGER FARBKAPPEN		CI-7526

\*Diese unlackierte Farbkappe ist hypoallergen und damit für Patienten geeignet, die eine Allergie gegen Farblackierungen aufweisen. Auf Bestellung gefertigt, bitte wenden Sie sich vor der Bestellung an Ihre lokalen Advanced Bionics Ansprechpartner.

# SLIM-ÜBERTRÄGER MAGNETE MIT STÄRKEN

SLIM-ÜBERTRÄGER STANDARDMAGNET 1	CI-7524-001	SLIM-ÜBERTRÄGER 3D-MAGNET 1	CI-7525-001
SLIM-ÜBERTRÄGER STANDARDMAGNET 2	CI-7524-002	SLIM-ÜBERTRÄGER 3D-MAGNET 2	CI-7525-002
SLIM-ÜBERTRÄGER STANDARDMAGNET 3	CI-7524-003	SLIM-ÜBERTRÄGER 3D-MAGNET 3	CI-7525-003
SLIM-ÜBERTRÄGER STANDARDMAGNET 4	CI-7524-004	SLIM-ÜBERTRÄGER 3D-MAGNET 4	CI-7525-004
SLIM-ÜBERTRÄGER STANDARDMAGNET 5	CI-7524-005	SLIM-ÜBERTRÄGER 3D-MAGNET 5	CI-7525-005
SLIM-ÜBERTRÄGER STANDARDMAGNET 6	CI-7524-006	SLIM-ÜBERTRÄGER 3D-MAGNET 6	CI-7525-006
SLIM-ÜBERTRÄGER STANDARDMAGNET 7	CI-7524-007	SLIM-ÜBERTRÄGER 3D-MAGNET 7	CI-7525-007



Für Slim HP Standardmagnet  $\geq 6$   
 → Slim-Überträger Farbkappe groß\*

MINIMUM

MAXIMUM

Zunehmende Magnetstärke



Für Slim 3D-Standardmagnet  $\geq 5$   
 → Slim-Überträger Farbkappe groß\*


\*Die Slim-Überträger Farbkappe groß ist nicht für die Verwendung bei Kindern unter 3 Jahren bestimmt.

## SLIM-ÜBERTRÄGER MAGNET-KIT

Das Slim-Überträger Magnet-Set enthält ein komplettes Set an Überträger-Magneten beider Arten und in jeder verfügbaren Stärke. Im Detail:

Magnetstärke	1	2	3	4	5	6	7
Standard	2 Stk.	2 Stk.	3 Stk.	3 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.
3D	2 Stk.	2 Stk.	3 Stk.	3 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	2 Stk.

SLIM ÜBERTRÄGER MAGNET-SET CI-7528

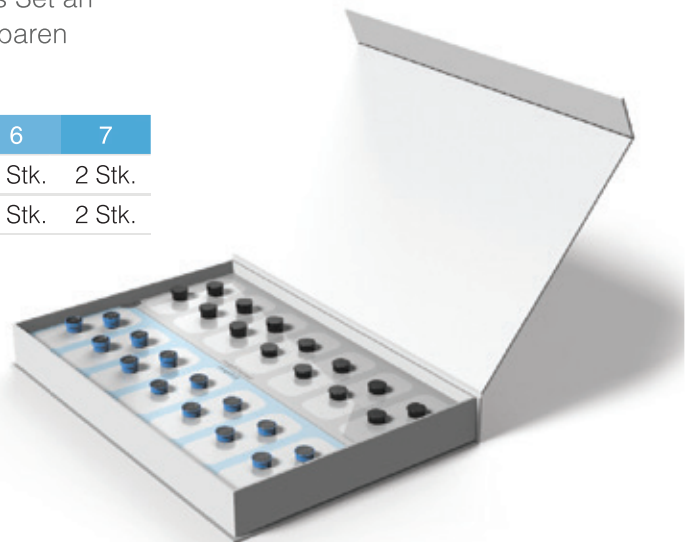

# M STAUB- UND WASSERDICHTER AKKU

Der **M Staub- und Wasserdichte Akku** sorgt selbst bei den wildesten Aktivitäten dafür, dass Sie immer bestmöglich hören und sich keine Gedanken über die Sicherheit Ihres Geräts machen müssen. Die **AquaMic™** Überträger von AB sind die weltweit einzigen wasserdichten Überträger-Mikrofone für CI-Soundprozessoren. Damit können Sie auch bei intensivem Sport oder beim Besuch im Schwimmbad an allen Gesprächen teilhaben.

## KOMPONENTEN

1. Soundprozessor
2. Kabel-Konnektor
3. Sicherheitsverschluss
4. Slim-Überträger AquaMic
5. M Staub- und Wasserdichter Akku-Clip

M STAUB- UND WASSERDICHTER AKKU	CI-5068
M STAUB- UND WASSERDICHTER AKKU-CLIP	CI-7323
M STAUB- UND WASSERDICHTER AKKU-DICHTUNGSRINGE	CI-7324
M ARMBAND STANDARD (42 cm)	CI-7435-001
M ARMBAND KLEIN (26 cm)	CI-7435-002



## SLIM-ÜBERTRÄGER AQUAMIC

SLIM-ÜBERTRÄGER AQUAMIC 30,5 CM (12") BEIGE	●	CI-5321-001
SLIM-ÜBERTRÄGER AQUAMIC 30,5 CM (12") SCHWARZ	●	CI-5321-002
SLIM-ÜBERTRÄGER AQUAMIC 30,5 CM (12") BRAUN	●	CI-5321-003
SLIM-ÜBERTRÄGER AQUAMIC 30,5 CM (12") GRAU	●	CI-5321-004
SLIM-ÜBERTRÄGER AQUAMIC 46 CM (18") BEIGE	●	CI-5321-005
SLIM-ÜBERTRÄGER AQUAMIC 46 CM (18") SCHWARZ	●	CI-5321-006
SLIM-ÜBERTRÄGER AQUAMIC 46 CM (18") BRAUN	●	CI-5321-007
SLIM-ÜBERTRÄGER AQUAMIC 46 CM (18") GRAU	●	CI-5321-008
SLIM-ÜBERTRÄGER AQUAMIC 61 CM (24") BEIGE	●	CI-5321-009
SLIM-ÜBERTRÄGER AQUAMIC 61 CM (24") SCHWARZ	●	CI-5321-010
SLIM-ÜBERTRÄGER AQUAMIC 61 CM (24") BRAUN	●	CI-5321-011
SLIM-ÜBERTRÄGER AQUAMIC 61 CM (24") GRAU	●	CI-5321-012
SLIM-ÜBERTRÄGER AQUAMIC 107 CM (42") BEIGE	●	CI-5321-013
SLIM-ÜBERTRÄGER AQUAMIC 107 CM (42") SCHWARZ	●	CI-5321-014
SLIM-ÜBERTRÄGER AQUAMIC 107 CM (42") BRAUN	●	CI-5321-015
SLIM-ÜBERTRÄGER AQUAMIC 107 CM (42") GRAU	●	CI-5321-016





# BATTERIE- UND AKKUOPTIONEN

Sie oder Ihr Kind werden den Marvel CI Soundprozessor fast rund um die Uhr tragen. Daher sollte das Gerät bequem und diskret sein und Sie nicht bei Ihren Aktivitäten beeinträchtigen.

Marvel CI verfügt über mehrere neue Akkuoptionen mit **einzigartigem ergonomischen Gehäuse**, für einen komfortablen und sicheren Sitz: Bei den M Akkus in klein, mittel und groß schmiegt sich das einzigartige Design an die Kontur des Ohres und sorgt so für einen diskreten, sicheren Sitz. Der neue M Staub- und Wasserdichte Akku ist klein, leicht und ideal zum Schwimmen und für Outdoor-Aktivitäten geeignet.

Die untere Grafik zeigt das Gewicht, die Kapazität und die durchschnittlichen Betriebsstunden des M Akkus.



M Klein



M Mittel



M Groß



M Standard



M Zink-Luft-  
Batterieeinsatz



M Staub- und  
Wasserdichter Akku

Durchschnittliche  
Laufzeit  
Stunden

>10 Std.

>16 Std.

>16 Std.

>16 Std.

>16 Std.

>18 Std.

Gewicht\*

4,6 g

6,4 g

8,4 g

5,4 g

6,4 g\*\*

29,4 g

\* Prozessorgewicht ohne Akku: 4,6 g

\*\* Mit zwei Batterien

### M AKKU KLEIN

ALPINWEISS	●	CI-5551-110
SAND BEIGE	●	CI-5551-120
KASTANIE	●	CI-5551-130
SILBERGRAU	●	CI-5551-140
SAMTSCHWARZ	●	CI-5551-150
CARIBBEAN PIRATE	●	CI-5551-190
PRECIOUS PINK	●	CI-5551-250
BLUE OCEAN	●	CI-5551-260
MAJESTY PURPLE	●	CI-5551-270
LAVA RED	●	CI-5551-280
RESIN BEIGE*	●	CI-5551-240

### M AKKU MITTEL

ALPINWEISS	●	CI-5552-110
SAND BEIGE	●	CI-5552-120
KASTANIE	●	CI-5552-130
SILBERGRAU	●	CI-5552-140
SAMTSCHWARZ	●	CI-5552-150
CARIBBEAN PIRATE	●	CI-5552-190
PRECIOUS PINK	●	CI-5552-250
BLUE OCEAN	●	CI-5552-260
MAJESTY PURPLE	●	CI-5552-270
LAVA RED	●	CI-5552-280
RESIN BEIGE*	●	CI-5552-240

### M AKKU GROSS

ALPINWEISS	●	CI-5553-110
SAND BEIGE	●	CI-5553-120
KASTANIE	●	CI-5553-130
SILBERGRAU	●	CI-5553-140
SAMTSCHWARZ	●	CI-5553-150
CARIBBEAN PIRATE	●	CI-5553-190
PRECIOUS PINK	●	CI-5553-250
BLUE OCEAN	●	CI-5553-260
MAJESTY PURPLE	●	CI-5553-270
LAVA RED	●	CI-5553-280
RESIN BEIGE*	●	CI-5553-240

### M ZINK-LUFT-BATTERIEEINSATZ

ALPINWEISS	●	CI-5501-110
SAND BEIGE	●	CI-5501-120
KASTANIE	●	CI-5501-130
SILBERGRAU	●	CI-5501-140
SAMTSCHWARZ	●	CI-5501-150
CARIBBEAN PIRATE	●	CI-5501-190
PRECIOUS PINK	●	CI-5501-250
BLUE OCEAN	●	CI-5501-260
MAJESTY PURPLE	●	CI-5501-270
LAVA RED	●	CI-5501-280
RESIN BEIGE*	●	CI-5501-240

### M AKKU STANDARD

SAND BEIGE	●	CI-5555-120
KASTANIE	●	CI-5555-130
SILBERGRAU	●	CI-5555-140
SAMTSCHWARZ	●	CI-5555-150
CARIBBEAN PIRATE	●	CI-5555-190
PRECIOUS PINK	●	CI-5555-250
BLUE OCEAN	●	CI-5555-260
MAJESTY PURPLE	●	CI-5555-270
RESIN BEIGE*	●	CI-5555-240

### LADEGERÄT

M AKKU-LADEGERÄT	CI-5607
M AKKU-ETUI	CI-7436



\* Diese unlackierten Akkus sind hypoallergen und damit für Patienten geeignet, die eine Allergie gegen Farblackierungen aufweisen. Auf Bestellung gefertigt, bitte wenden Sie sich vor der Bestellung an Ihre lokalen Advanced Bionics Ansprechpartner.



## M OHRBÜGEL

M OHRBÜGEL KLEIN	CI-5711-100
M OHRBÜGEL STANDARD	CI-5711-110
M OHRBÜGEL MIT HALTERUNG, KLEIN	CI-5711-200
M OHRBÜGEL MIT HALTERUNG, STANDARD	CI-5711-210
M STIFT-WECHSELWERKZEUG (2er Pack)	CI-6147-014
M OHRBÜGELSTIFT (10er Pack)	CI-6147-015



## M AKUSTIKHÖRER

M AKUSTIKHÖRER RECHTS 00	CI-5851-001
M AKUSTIKHÖRER RECHTS 0	CI-5851-002
M AKUSTIKHÖRER RECHTS 1	CI-5851-003
M AKUSTIKHÖRER RECHTS 2	CI-5851-004
M AKUSTIKHÖRER RECHTS 3	CI-5851-005
M AKUSTIKHÖRER LINKS 00	CI-5851-006
M AKUSTIKHÖRER LINKS 0	CI-5851-007
M AKUSTIKHÖRER LINKS 1	CI-5851-008
M AKUSTIKHÖRER LINKS 2	CI-5851-009
M AKUSTIKHÖRER LINKS 3	CI-5851-010
M AKUSTIKHÖRER WERKZEUG-SET	CI-6150



## M T-MIC-MIKROFON

M T-MIC KLEIN	CI-5837-100
M T-MIC MITTEL	CI-5837-200
M T-MIC GROSS	CI-5837-300
M T-MIC STIFTE (25er Pack)	CI-6147-005
M T-MIC ABDECKUNGEN (25er Pack)	CI-6147-006
M T-MIC ABDECKUNGEN (8er Pack)	CI-6147-007
M STIFT-WECHSELWERKZEUG (2er Pack)	CI-6147-014
M OHRBÜGELSTIFT (10er Pack)	CI-6147-015

# TRAGEOPTIONEN

Naída CI M und Sky CI M bieten eine Vielzahl von Trageoptionen, die individuell an die sich ändernden Bedürfnisse von Ihnen oder Ihres Kindes angepasst werden können.

Bei Advanced Bionics kennen wir uns mit kleinen Ohren bestens aus. Denn wir haben jahrelang daran gearbeitet, dass unsere Technologie dort bleibt, wo sie sein sollte und Ihrem Kind bei seiner Erkundung der Welt nicht im Wege steht.

M OHRFERN-HALTERUNG	CI-7322
M SNUGGIE	CI-7325
M OHR-HALTERUNG KLEIN (44 mm)	CI-7326-001
M OHR-HALTERUNG GROSS (64 mm)	CI-7326-002

Ohrferne Lösungen  
M OHRFERN-  
HALTERUNG



Sicher am Ohr  
M SNUGGIE

Sicher hinter dem Ohr  
M OHR-HALTERUNG



# PHONAK SOUND DELIVERY SYSTEM 4.0

VENTED DOME 4.0 S (Packung)	054-0809*
VENTED DOME 4.0 M (Packung)	054-0810*
VENTED DOME 4.0 L (Packung)	054-0811*
POWER DOME 4.0 S (Packung)	054-0820*
POWER DOME 4.0 M (Packung)	054-0821*
POWER DOME 4.0 L (Packung)	054-0822*
CERUSHIELD™ DISK	098-0445*
<u>MESSSCHABLONE FÜR AKUSTIKHÖRER-LÄNGE</u>	<u>026-0697*</u>
CROS TUBE 4.0 0L	054-0886*
CROS TUBE 4.0 0R	054-0887*
CROS TUBE 4.0 1L	054-0888*
CROS TUBE 4.0 1R	054-0889*
CROS TUBE 4.0 2L	054-0890*
CROS TUBE 4.0 2R	054-0891*
CROS TUBE 4.0 3L	054-0892*
CROS TUBE 4.0 3R	054-0893*
CROS TUBE 5 0L	054-1180*
CROS TUBE 5 0R	054-1184*
CROS TUBE 5 1L	054-1181*
CROS TUBE 5 1R	054-1185*
CROS TUBE 5 2L	054-1182*
CROS TUBE 5 2R	054-1186*
CROS TUBE 5 3L	054-1183*
CROS TUBE 5 3R	054-1187*



Power Dome 4.0



Vented Dome 4.0



Cerushield Disk



CROS Tubes

## WEITERES ZUBEHÖR

PROGRAMMIERUNG	TARGET CI ANPASSSOFTWARE	CI-6057-001
	NOAHLINK WIRELESS PROGRAMMIERSCHNITTSTELLE	058-0139*
	M PROGRAMMIERKABEL	CI-5826
GERÄTEÜBERPRÜFUNG	CPI-3 USB KABEL M-SERIE (2m)	CI-6408-002
	M LISTENING CHECK	CI-5827
	LISTENING CHECK OHRHÖRER	CI-5822
PFLEGE & AUFBEWAHRUNG	TROCKUNGSKIT	CI-7313-001
	M TRAGETASCHE	305-Q144*
ZUBEHÖR FÜR KINDER	CI M KINDERCLIP (LEO)	305-M169*
	SKY CI M STICKER	305-M170*

\* nur SAP-Nummer

Die Artikel des Phonak Sound Delivery Systems 4.0 sind in diesem Katalog zu Informationszwecken dargestellt. Sie können nur über die vor Ort zuständige Phonak Gruppengesellschaft oder einen Phonak Vertriebspartner erworben werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Advanced Bionics Ansprechpartner.

## AB REMOTE SUPPORT APP


CI-6517

Mobile Smartphone App, die es CI-Fachkräften ermöglicht, Fernanpassungen am CI-System des Anwenders per WLAN oder Mobilfunkverbindung vorzunehmen.<sup>1,2</sup>

## AB REMOTE APP

CI-6058-001

Mobile Smartphone App, die es dem Anwender ermöglicht, Programm- und Lautstärkeänderungen, sowie eine Geräteüberprüfung am CI-System vorzunehmen.<sup>1</sup>

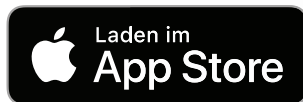

1. Kostenlos für iOS und Android Geräte verfügbar
2. Für Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren.  
Kompatibel, wenn der/die Soundprozessor/en mit der Target CI v1.5 oder einer späteren Target CI Version programmiert wurde/n.

# INTEGRIERTE KONNEKTIVITÄT

Im Gegensatz zu anderen CI-Plattformen übertragen Naída CI M und Sky CI M Telefonate und Audiosignale von praktisch jedem Smartphone und Bluetooth®-fähigen Gerät direkt an Ihre Ohren. Mit der **Phonak RogerDirect™ Technologie** wird die Hörleistung in schwierigen Situationen verbessert, ohne dass zusätzliche Geräte am Soundprozessor angebracht werden müssen.

**RogerDirect** ist eine Marvel Funktion, die eine direkte Übertragung eines Roger-Signals auf das Hörsystem ermöglicht, ohne dass ein zusätzlicher Roger-Empfänger am Soundprozessor angebracht werden muss. Im Vergleich zur vorherigen Soundprozessor-Generation von Advanced Bionics, bieten die Marvel CI Soundprozessoren eine Kompatibilität mit Roger und umfassende Wireless-Anbindung und sind dabei um **23% kleiner** und um **34% leichter**.



Roger X



Roger Installer



Phonak  
TV Connector



Phonak  
RemoteControl



Roger  
Clip-On Mic
















Phonak  
PartnerMic








Roger ON  
Roger ON iN



## ROGER ZUBEHÖR

ROGER X (02)		052-3113-X02P5
ROGER X (02) OHNE ROGER EMPFÄNGER		052-3489-X02P5
ROGER X (03) <sup>1</sup>		052-3215-X03P5
ROGER INSTALLER		055-3033
ROGER CLIP-ON MIC GRAU		052-3294
ROGER ON CHAMPAGNER mit Netzteil (EU) <sup>2</sup>		056-3010-P5012
ROGER ON CHAMPAGNER ohne Netzteil		056-3010-P5010
ROGER ON GRAPHITGRAU mit Netzteil (EU) <sup>2</sup>		056-3010-P7012
ROGER ON GRAPHITGRAU ohne Netzteil		056-3010-P7010
ROGER ON iN CHAMPAGNER mit Netzteil (EU) <sup>2</sup>		056-3011-P5012
ROGER ON iN CHAMPAGNER ohne Netzteil		056-3011-P5010
ROGER ON iN GRAPHITGRAU mit Netzteil (EU) <sup>2</sup>		056-3011-P7012
ROGER ON iN GRAPHITGRAU ohne Netzteil		056-3011-P7010

## PHONAK ZUBEHÖR

PHONAK TV CONNECTOR D (2.0) mit Netzteil (EU) <sup>2</sup>		076-3006-0612
PHONAK TV CONNECTOR D (2.0) ohne Netzteil		076-3006-06
PHONAK REMOTECONTROL		076-0065-P5
PHONAK PARTNERMIC mit Netzteil (EU) <sup>2</sup>		076-4001-P512
PHONAK PARTNERMIC ohne Netzteil		076-4001-P510

Die Phonak Produkte (inkl. Roger) auf den Seiten 16 und 17 sind in diesem Katalog zu Informationszwecken dargestellt. Sie können nur über die vor Ort zuständige Phonak Gruppengesellschaft oder einen Phonak Vertriebspartner erworben werden. Die Ausnahme stellt hierbei der Phonak TV Connector und die Phonak Remote Control dar. Diese beiden Artikel sind sowohl über die vor Ort zuständige Phonak Gruppengesellschaft oder einen Phonak Vertriebspartner, als auch über Advanced Bionics erhältlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Advanced Bionics Ansprechpartner.

<sup>1</sup> Nur Seriennummern mit den Ziffern 1744xxxx oder höher sind kompatibel mit RogerDirect

<sup>2</sup> Für das UK-Netzteil ist eine andere Artikelnummer verfügbar. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Advanced Bionics Ansprechpartner.



## MARVEL VON OHR ZU OHR

Ganz gleich, ob Sie endlich wieder oder zum ersten Mal überhaupt Stereo hören: Die richtige Lösung kann Ihr Leben verändern. Dank zweier Geräte für beidseitiges Hören ist das Hörerlebnis in jedem Moment einfach vollständiger. Marvel bietet die einzige gekoppelte CI-Lösung für beidseitiges Hören und die einzige CI-Lösung mit einem CROS-System. Dies ermöglicht eine vollere und klarere Klangqualität und ein natürlicheres 360-Grad-Hörerlebnis. Fragen Sie Ihren Hörakustiker oder Audiologen, welche Lösung für Sie die richtige ist.

### Drei Gründe für eine beidseitige Hörlösung von AB

- 1 Besseres Hören mit CROS + AB CI**  
ganz gleich, woher der Schall kommt<sup>1,2</sup>
- 2 Geringere Anstrengung beim Hören**  
dank der vernetzten AB-Technologie für beide Ohren.<sup>3,4</sup>
- 3 Übertreffendes Sprachverständnis**  
mit der AB-Technologie für beide Ohren<sup>4,5</sup>



# Wir präsentieren eine beidseitige Lösung für alle

Ganz gleich, wie stark Ihr Hörverlust ist: Marvel bietet immer eine flexible Lösung, die Ihnen dabei hilft, den Klang Ihrer Welt zu genießen. AB arbeitet mit unserer Schwesterfirma Phonak zusammen, um drei Varianten des beidseitigen Hörens anzubieten, darunter auch Marvel CI + CROS.



## Marvel CI + Marvel CI

Die ultimative Stereolösung für Menschen mit starkem bis hochgradigem Hörverlust auf beiden Ohren.



## Marvel CI + Marvel Hearing Aid

Diese gekoppelte Lösung ist ideal für Menschen geeignet, die auf einem Ohr noch etwas hören.













## Marvel CI + CROS

Für jene Menschen, die nur ein einzelnes CI verwenden können und zusätzliche Unterstützung benötigen, ist dies die neueste Rundumklang-Lösung, die den gesamten Umgebungsschall nahtlos an das Marvel CI überträgt.

1. Findlen, U. & Agrawal, S. (2023, June). Classifier-based Noise Management Technology Helps Children with Cochlear Implants Listen in Noise. Podium and poster presentation at the American Cochlear Implant Alliance Annual Meeting, Dallas, TX.
2. Buechner, A., Bardt, M., Kliesch, S., & Brendel, M. (2022, May). Influence of Automatic Scene Classification Systems in Hearing Devices on Speech Perception in Real-life Situations. Poster presented at the American Cochlear Implant Alliance Annual Meeting, Washington, DC.
3. Hornsby, B., Huang, H., Sohail, H., Gifford, R., Ricketts, T.A. & Picou, E.M. (2023, March). Effort and fatigue while listening: sustained speech-processing with cochlear implants. Poster presented at the American Auditory Society Annual Meeting, Scottsdale, AZ.
4. Dorman, M. F., Cook Natale, S., & Agrawal, S. (2018). The Value of Unilateral CIs, CI-CROS and Bilateral CIs, with and without Beamformer Microphones, for Speech Understanding in a Simulation of a Restaurant Environment. *Audiology & neuro-otology*, 23(5), 270–276. <https://doi.org/10.1159/000493844>
5. Dwyer, R.T., Kessler, D., Butera, I. M., & Gifford, R. H. (2019). Contralateral Routing of Signal Yields Significant Speech in Noise Benefit for Unilateral Cochlear Implant Recipients. *Journal of the American Academy of Audiology*, 30(3), 235–242. <https://doi.org/10.3766/jaaa.17117>

# PHONAK NAÍDA LINK M & PHONAK SKY LINK M

PHONAK NAÍDA LINK M SAND BEIGE		050-0801-P1
PHONAK NAÍDA LINK M KASTANIE		050-0801-P4
PHONAK NAÍDA LINK M SILBERGRAU		050-0801-P6
PHONAK NAÍDA LINK M SAMTSCHWARZ		050-0801-P8
PHONAK SKY LINK M SAND BEIGE		050-0802-P1
PHONAK SKY LINK M KASTANIE		050-0802-P4
PHONAK SKY LINK M SAMTSCHWARZ		050-0802-P8
PHONAK SKY LINK M CARIBBEAN PIRATE		050-0802-Q3
PHONAK SKY LINK M PRECIOUS PINK		050-0802-T3
PHONAK SKY LINK M BLUE OCEAN		050-0802-M7

Die Phonak Produkte (inkl. Roger) auf den Seiten 20 und 21 sind in diesem Katalog zu Informationszwecken dargestellt. Sie können nur über die vor Ort zuständige Phonak Gruppengesellschaft oder einen Phonak Vertriebspartner erworben werden. Die Ausnahme stellt hierbei der Phonak TV Connector und die Phonak Remote Control dar. Diese beiden Artikel sind sowohl über die vor Ort zuständige Phonak Gruppengesellschaft oder einen Phonak Vertriebspartner, als auch über Advanced Bionics erhältlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Advanced Bionics Ansprechpartner.





## PHONAK CROS P-13

PHONAK CROS P-13 SAND BEIGE*	●	050-0861-P1
PHONAK CROS P-13 KASTANIE*	●	050-0861-P4
PHONAK CROS P-13 SILBERGRAU*	●	050-0861-P6
PHONAK CROS P-13 SAMTSCHWARZ*	●	050-0861-P8
PHONAK CROS P-13 BEIGE	●	050-0861-H0
PHONAK CROS P-13 SANDELHOLZ	●	050-0861-P3
PHONAK CROS P-13 CHAMPAGNER	●	050-0861-P5
PHONAK CROS P-13 GRAPHITGRAU	●	050-0861-P7

\*Farben passend zu Marvel CI Soundprozessoren

# PROGRAMM- UND FUNKTIONSÜBERSICHT

PROGRAMM / FUNKTION	
<b>AUTOSENSE OS 3.0 / AUTOSENSE SKY OS 3.0</b>	
Ruhige Umgebung	Verwenden Sie dieses Programm für besseres Sprachverstehen und mehr Hörkomfort in 1:1-Gesprächen und ruhigen Hörumgebungen.
Sprache im Störgeräusch	Nutzen Sie dieses Programm für besseres Sprachverstehen und mehr Hörkomfort in geräuschvollen Umgebungen und in Gruppen.
Komfort im Störgeräusch	Nutzen Sie dieses Programm für mehr Hörkomfort in lauten Umgebungen ohne Sprache.
Musik	Programmeinstellungen für ein natürliches Musikerlebnis.
Sprache im lauten Störgeräusch	Nutzen Sie dieses Programm für besseres Sprachverstehen in lauten Situationen und Umgebungen mit vielen Menschen. Die StereoZoom-Funktion ermöglicht einen besonderen Fokus auf die Schallquelle vor dem Zuhörer.
Verstehen bei Fahrgeräuschen	Optimierte Einstellungen speziell für eine statische Hörumgebung wie beispielsweise in einem Auto.
Komfort in halligen Situationen	Dieses Programm ist für angenehmes Sprachverstehen in Umgebungen gedacht, in denen es Echo/Nachhall gibt.
Sprach-Streaming (Medien) + Mikrofon	In Verbindung mit einem Sprach-Streaming über A2DP oder AirStream.
Gestreamte Musik	In Verbindung mit einem Musik-Streaming über A2DP oder AirStream.
<b>WEITERE MANUELLE HÖRPROGRAMME (max. 4)</b>	
Sprache in 360°	Dieses Programm erlaubt die genaue Auswahl der Hörrichtung in Situationen, in denen die Schallquelle nicht direkt von vorne kommt. Die Richtung des Mikrofonfokus kann vorab festgelegt oder durch eine Automatik gesteuert werden.
DuoPhone	Telefongespräche werden dank der Funktion DuoPhone (nur für M90/Sky) in Echtzeit an beide Ohren des Hörgeräteträgers übertragen, sodass die Stimme eines Anrufers ohne zusätzliches Zubehör besser zu hören ist.
Ohrfernes-Programm	Dieses Programm eignet sich, wenn der Soundprozessor für das ohrferne Tragen mit einem Slim-Überträger mit integriertem Mikrofon konfiguriert ist.
Individuelles Hörprogramm	–
<b>STREAMING-PROGRAMME</b>	
RogerDirect + Mikrofon	Kombiniert den Signaleingang von Roger-Mikrofonen mit dem der Soundprozessor-Mikrofone.
Anruf + Mikrofon	Kombiniert den Eingang von Telefonat-Streamings mit dem der Soundprozessor-Mikrofone.
PartnerMic + Mikrofon	Kombiniert den Eingang eines PartnerMic-Streamings mit dem der Soundprozessor-Mikrofone.

## SPEZIELLE FUNKTIONEN

UltraZoom	UltraZoom ist eine adaptive Mehrkanal-Multimikrofontechnologie.
UZ + SNR Boost	Soll den SNR in einem UltraZoom-Hörprogramm verbessern, indem Geräusche, die von hinten kommen, stärker gedämpft werden.
StereoZoom	StereoZoom ist eine adaptive Mehrkanal-Multimikrofontechnologie, die sich an bewegende und asymmetrische Geräuschquellen anpasst. Hierfür ist eine bilaterale oder bimodale Versorgung mit kompatiblen Geräten erforderlich.
DuoPhone	Überträgt die Stimme des Anrufers automatisch an das andere Ohr, sodass die Stimme auf beiden Ohren zu hören ist.
Real Ear Sound	Real Ear Sound simuliert die Charakteristiken des des T-Mic.
WindBlock	WindBlock verwendet ein System zur Winderkennung und -klassifikation. Durch einen adaptiven Algorithmus werden Windgeräusche automatisch gefiltert und ausgeblendet.
EchoBlock	EchoBlock wurde für hallige Umgebungen, wie Kirchen, Klassenzimmer, größere Konferenz- und Arbeitsbereiche und andere Räume mit schallreflektierenden Oberflächen, entwickelt. EchoBlock arbeitet mittels Filterung und sofortiger Entfernung von störenden Reflektionen nachhallender Schallsignale.
SoundRelax	SoundRelax identifiziert Impulsgeräusche sofort und präzise für eine kurzzeitige Reduzierung der Verstärkung. SoundRelax dämpft unangenehme Impulsgeräusche.
QuickSync	Steuerung beider Hörsysteme mit nur einem Tastendruck. Der sofortige breitbandige Datenaustausch zwischen den beiden Hörsystemen garantiert, dass die Einstellungen jederzeit ausgeglichen und synchronisiert sind. Durch Betätigen der Programmwahltaste oder Lautstärkeregelung an einem Hörsystem wird die Änderung automatisch auf beiden Seiten angepasst.
Streaming-Balance	Funktion zur Lautstärkeregelung, mit der ein Anwender die Lautstärke eines anliegenden Streaming-Signals im Verhältnis zur Lautstärke der Umgebungsgeräusche durch Drücken des Lautstärkestellers anpassen kann.

## Advanced Bionics LLC

28515 Westinghouse Place  
Valencia, CA 91355, United States  
T: +1.877.829.0026  
T: +1.661.362.1400  
F: +1.661.362.1500  
[info.us@advancedbionics.com](mailto:info.us@advancedbionics.com)

## Advanced Bionics AG

Laubisrütistrasse 28,  
8712 Stäfa, Switzerland  
T: +41.58.928.78.00  
F: +41.58.928.78.90  
[info.switzerland@advancedbionics.com](mailto:info.switzerland@advancedbionics.com)

## Advanced Bionics GmbH

Max-Eyth-Str. 20  
7036 Fellbach-Oeffingen, Deutschland  
T: +49 (0)711 510 70 577 (Service)  
F: +49 (0)711 510 70 571  
[info.de@advancedbionics.com](mailto:info.de@advancedbionics.com)

Informationen über weitere AB-Standorte finden Sie auf  
[advancedbionics.com/contact](https://advancedbionics.com/contact)

AB – A Sonova brand

Informieren Sie sich bitte bei Ihrem lokalen  
AB-Ansprechpartner über die Zulassung und  
Verfügbarkeit in Ihrer Region.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind  
eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jede  
Verwendung dieser Marken durch die Sonova AG ist  
lizenziert.

Apple, das Apple Logo, iPhone und iOS sind einget-  
ragene Marken von Apple Inc., registriert in den USA und  
anderen Ländern. App Store ist eine Servicemarke von  
Apple Inc.

Android, Google Play und das Google Play Logo sind  
eingetragene Marken von Google Inc.