

Rapport de fiabilité Juillet 2025

IMPLANTS COCHLÉAIRES
ET PROCESSEURS DE SON

LE VOYAGE VERS LE MONDE SONORE COMMENCE ICI

Communication du Président d'Advanced Bionics	4
Implants cochléaires	6
HiRes Ultra 3D (V2)	8
HiRes Ultra (V2)	10
HiRes Ultra 3D (V1)	12
HiRes Ultra (V1)	14
HiRes 90K Advantage	16
HiRes 90K	18
CII Bionic Ear	26
Clarion 1.2	28
Clarion 1.0	30
Processeurs de son	32
Naída CI M and Sky CI M	33
Naída CI Q90	34
Chorus	34
Neptune	35
Annexe	36







ADVANCED
BIONICS

POWERFUL CONNECTIONS



A Sonova brand

“

LA TRANSPARENCE EST
LE SOCLE DE LA CONFIANCE.

Avec notre rapport annuel sur la fiabilité
de nos produits, nous confirmons notre
engagement pour la qualité et
l'intégrité envers nos patients et
nos partenaires.

”

A stylized, handwritten signature in white ink, consisting of a large 'A', a smaller 'S', and a long horizontal stroke extending to the right.

Alistair Simpson

PRESIDENT, ADVANCED BIONICS

IMPLANTS COCHLÉAIRES

Nombre d’implants HiRes Ultra 3D V2 enregistrés

À compter du 1er avril 2025.
Date de première commercialisation : 2019.^a


STANDARD	ADULTES	ENFANTS	COMBINÉS
ISO 5841-2:2014	28393	9200	37593 ^b
ANSI/AAMI CI86	30122 ^c	7471	37593

Le nombre d'utilisateurs enregistrés est détaillé pour les adultes, les enfants (définis comme étant âgés de moins de 18 ans au moment de l'implantation selon la norme ISO 5841, et de moins de 10 ans au moment de l'implantation selon la norme CI86) et pour toutes les tranches d'âge combinées, conformément aux méthodes de déclaration.

- a. Les dates indiquées correspondent aux principaux marchés couverts par les réglementations de la FDA et du TÜV. Certains implants peuvent être en attente d'autorisation dans certaines autres régions.
- b. Le nombre combiné comprend également tous les utilisateurs enregistrés pour lesquels nous ne disposons pas d'informations sur leur date de naissance.
- c. Le nombre d'adultes comprend également les utilisateurs dont les informations personnelles ne sont pas disponibles ou ne peuvent être obtenues en raison de certaines lois sur la protection de la vie privée en vigueur dans certains pays.

Le titre du graphique indique le nom de l'implant et toute information permettant de l'identifier.

HiRes Ultra 3D V2
ISO 5841-2:2014

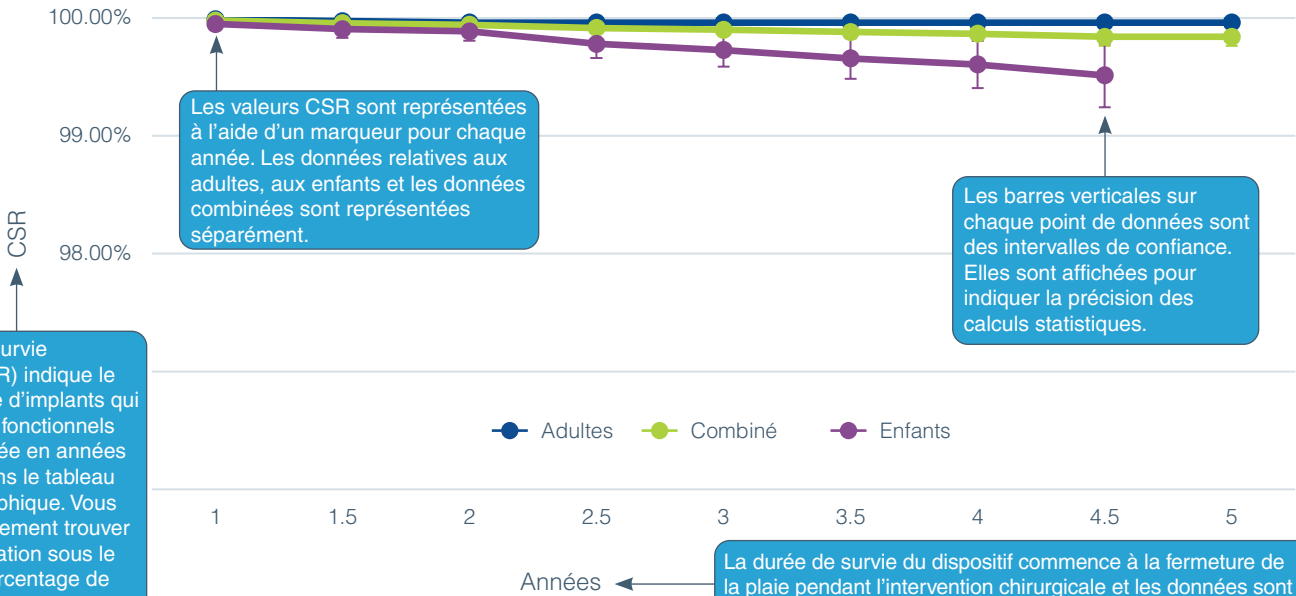

TAUX DE SURVIE CUMULÉ


Nombre d'années	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
ADULTES	99.99%	99.97%	99.96%	99.96%	99.96%	99.96%	99.96%	99.96%	99.96%
COMBINÉ	99.98%	99.96%	99.94%	99.91%	99.90%	99.88%	99.87%	99.84%	99.84%
ENFANTS	99.95%	99.90%	99.89%	99.78%	99.73%	99.66%	99.60%	99.51%	N/A*

Les pourcentages détaillés en matière de CSR sont indiqués pour chaque année dans le tableau. Les résultats sont présentés comme suit : adultes, enfants et total combiné.

*La taille de l'échantillon n'est pas suffisante pour établir un rapport.

Le titre du graphique indique le nom de l'implant et toute information permettant de l'identifier.

HiRes Ultra 3D V2 ANSI/AAMI CI86 STANDARD

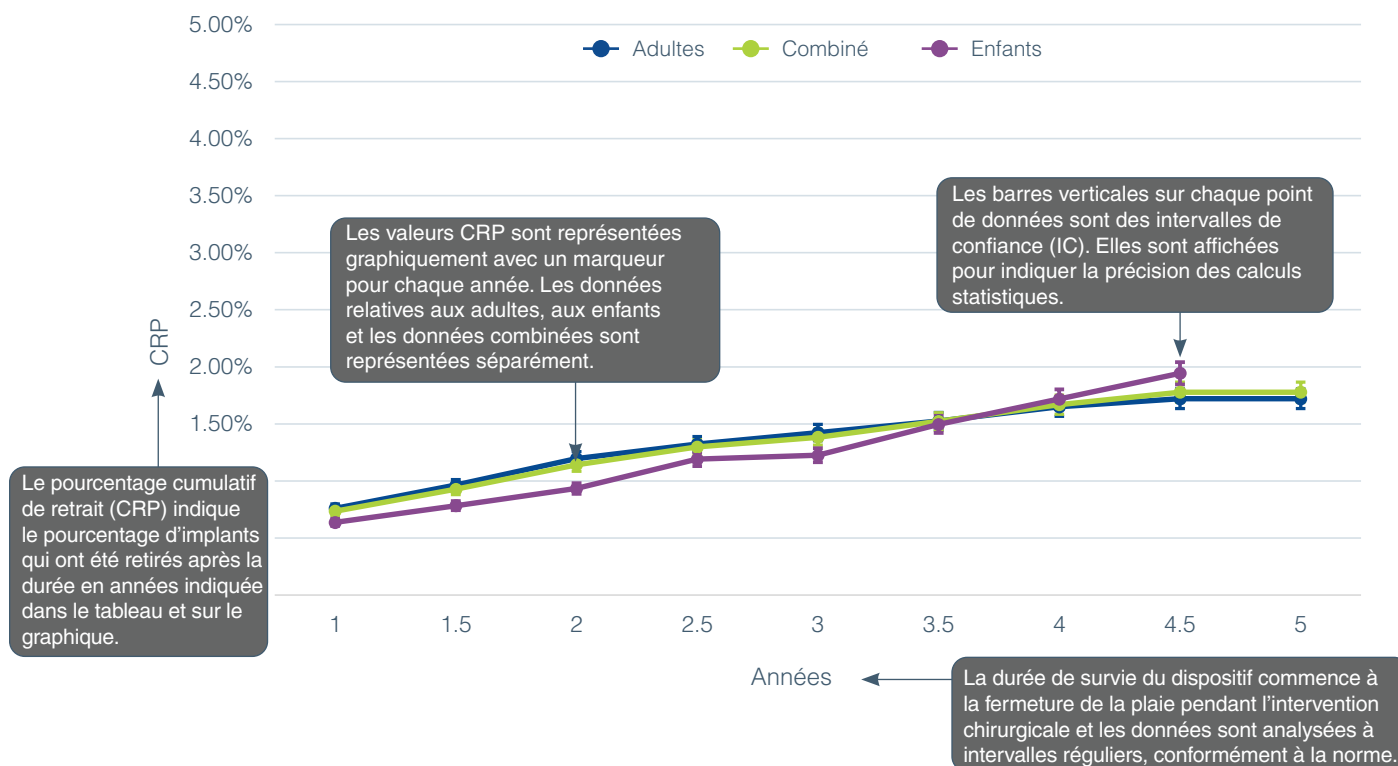

La norme ANSI/AAMI CI86 exige que tous les dispositifs retirés soient classés en trois catégories en fonction du motif de l'explantation : défaillance du dispositif, raison médicale ou motif non concluant.

ADULTES ET ENFANTS COMBINÉS

Année	CRP médical	CRP dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total	
					IC supérieur	IC inférieur
1	0.71%	0.02%	0.00%	0.74%	0.83%	0.65%
1.5	0.88%	0.04%	0.01%	0.93%	1.03%	0.82%
2	1.08%	0.05%	0.01%	1.14%	1.26%	1.02%
2.5	1.21%	0.08%	0.01%	1.30%	1.43%	1.16%
3	1.28%	0.09%	0.01%	1.38%	1.53%	1.24%
3.5	1.39%	0.11%	0.02%	1.52%	1.68%	1.36%
4	1.54%	0.11%	0.02%	1.67%	1.85%	1.49%
4.5	1.63%	0.13%	0.02%	1.78%	1.99%	1.56%
5	1.63%	0.13%	0.02%	1.78%	1.99%	1.56%

Les intervalles de confiance (IC) sont clairement et visuellement indiqués pour chaque graphique.

Tout au long de ce rapport, nous présenterons les données et les graphiques illustrant les conditions suivantes : analyse par catégorie pour les adultes et les enfants ; taux d'élimination par catégorie d'analyse pour les adultes et les enfants, et toutes les catégories d'analyse pour les adultes et les enfants combinés.

Toutes les données ne peuvent pas être présentées à côté des graphiques en raison de contraintes d'espace. Veuillez consulter l'**annexe** à la fin du rapport pour obtenir l'ensemble complet des données.

DONNÉES SUR LES IMPLANTS
DE LA GÉNÉRATION ACTUELLE

HIRES ULTRA 3D V2

L'implant cochléaire HiRes™ Ultra 3D (V2) est une mise à jour du précédent dispositif HiRes Ultra 3D (V1). Basé sur la plateforme HiRes Ultra standard, mais doté d'un assemblage multi-aimants innovant, l'implant HiRes Ultra 3D V2 permet de réaliser des IRM cliniques à 1,5 T et 3 T sans avoir à retirer l'aimant ni à bander la tête. Grâce à son faible couple, le patient peut espérer une intervention sans complication et sans douleur.


Le dispositif HiRes Ultra 3D (V2) affiche un taux de survie cumulé (CSR) de 99,84 %.

Nombre d'implants HiRes Ultra 3D V2 enregistrés


À compter du 1er avril 2025.
Date de première commercialisation : 2019.^a

STANDARD	ADULTES	ENFANTS	COMBINÉ
ISO 5841-2:2014	28393	9200	37593 ^b
ANSI/AAMI CI86	30122 ^c	7471	37593

- a. Les dates indiquées correspondent aux principaux marchés couverts par les réglementations de la FDA et du TUV. Certains implants peuvent être en attente d'autorisation dans certaines autres régions.
- b. Le nombre combiné comprend également tous les utilisateurs enregistrés pour lesquels nous ne disposons pas d'informations sur leur date de naissance.
- c. Le nombre d'adultes comprend également les utilisateurs dont les informations personnelles ne sont pas disponibles ou ne peuvent être obtenues en raison de certaines lois sur la protection de la vie privée en vigueur dans certains pays.

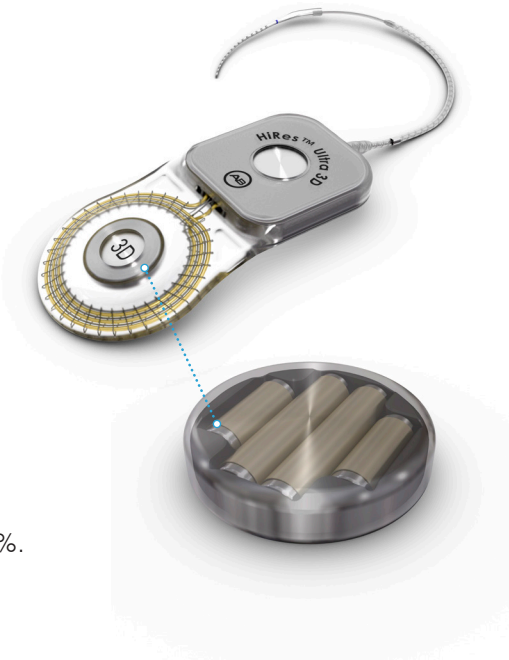

ISO 5841-2:2014

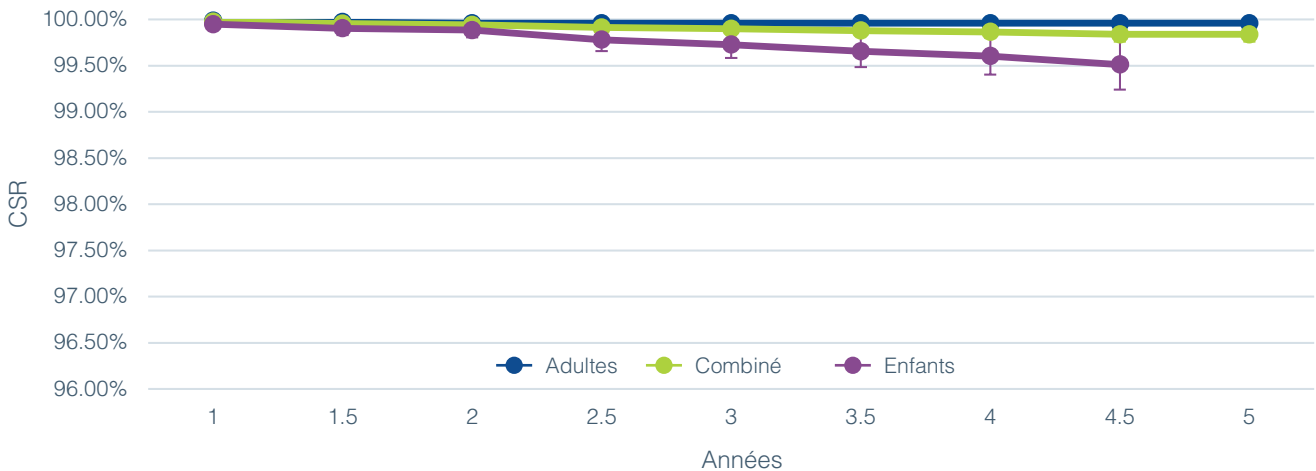


TAUX DE SURVIE CUMULÉ (CSR)

Nombre d'années	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
ADULTES	99.99%	99.97%	99.96%	99.96%	99.96%	99.96%	99.96%	99.96%	99.96%
COMBINÉ	99.98%	99.96%	99.94%	99.91%	99.90%	99.88%	99.87%	99.84%	99.84%
ENFANTS	99.95%	99.90%	99.89%	99.78%	99.73%	99.66%	99.60%	99.51%	N/A*


* La taille de l'échantillon n'est pas suffisante pour établir un rapport.

ANSI/AAMI CI86


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ADULTES

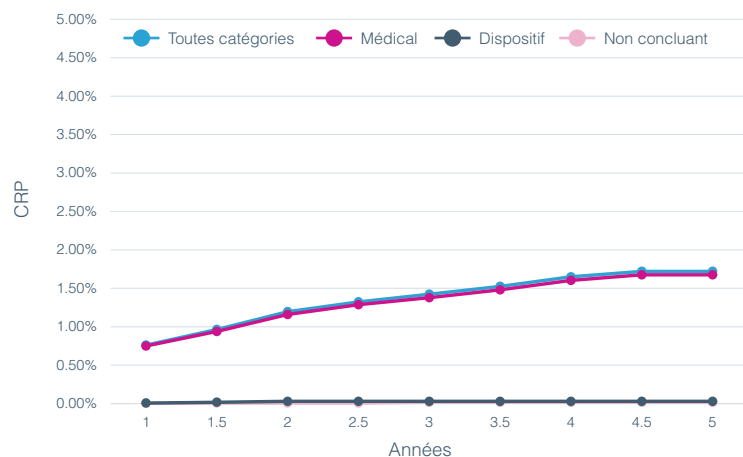


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT POUR TOUTES LES
CATÉGORIES D'ANALYSE ET DE PATIENTS

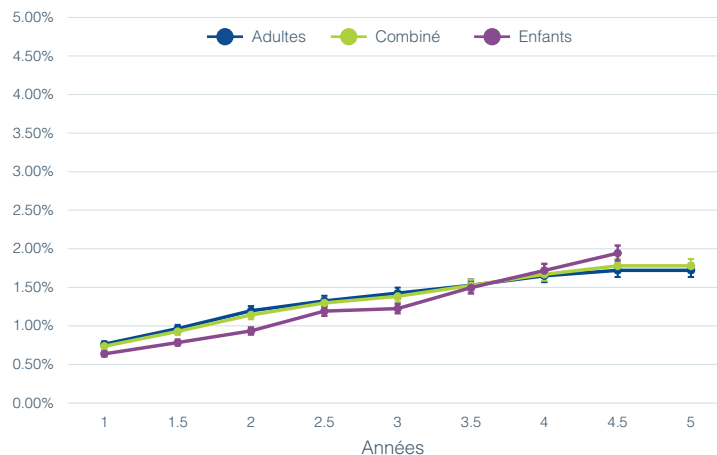

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ENFANTS

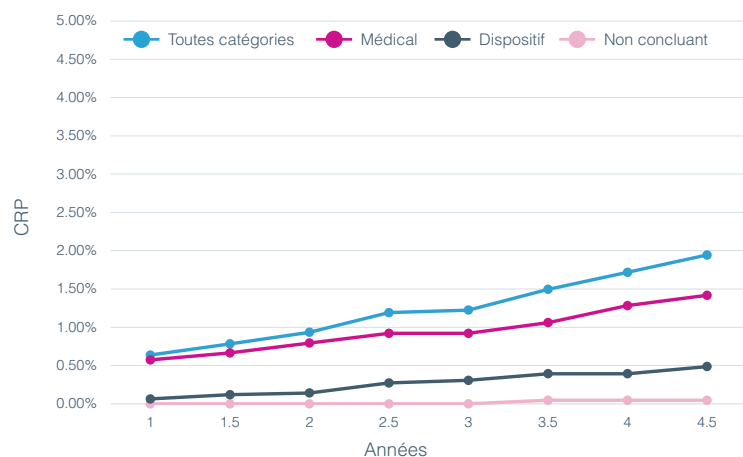

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT CATÉGORIES POUR
LES ADULTES ET LES ENFANTS

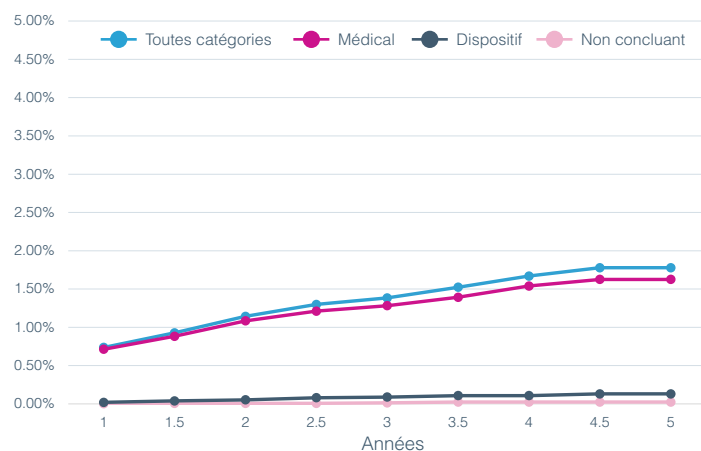

ADULTES ET ENFANTS COMBINÉS

Année	CRP médical	CRP dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total	
					IC supérieur	IC inférieur
1	0.71%	0.02%	0.00%	0.74%	0.83%	0.65%
1.5	0.88%	0.04%	0.01%	0.93%	1.03%	0.82%
2	1.08%	0.05%	0.01%	1.14%	1.26%	1.02%
2.5	1.21%	0.08%	0.01%	1.30%	1.43%	1.16%
3	1.28%	0.09%	0.01%	1.38%	1.53%	1.24%
3.5	1.39%	0.11%	0.02%	1.52%	1.68%	1.36%
4	1.54%	0.11%	0.02%	1.67%	1.85%	1.49%
4.5	1.63%	0.13%	0.02%	1.78%	1.99%	1.56%
5	1.63%	0.13%	0.02%	1.78%	1.99%	1.56%

Toutes les données ne peuvent pas être affichées à côté des graphiques en raison de contraintes d'espace.

Veuillez consulter l'annexe à la fin du rapport pour obtenir l'ensemble complet des données.

HIRES ULTRA V2

Doté de la plateforme performante éprouvée HiRes 90K™ Advantage, le HiRes Ultra (V2) est doté d'une conception technique robuste, fine et discrète adaptée aux adultes et aux enfants.




Nombre d'implants HiRes Ultra V2 enregistrés

À compter du 1er avril 2025.
Date de première commercialisation : 2019.^a

STANDARD	ADULTES	ENFANTS	COMBINÉ
ISO 5841-2:2014	5375	8599	13974 ^b
ANSI/AAMI CI86	6480 ^c	7494	13974

- a. Les dates indiquées correspondent aux principaux marchés couverts par les réglementations de la FDA et du TÜV. Certains implants peuvent être en attente d'autorisation dans certaines autres régions.
- b. Le nombre combiné comprend également tous les utilisateurs enregistrés pour lesquels nous ne disposons pas d'informations sur leur date de naissance.
- c. Le nombre d'adultes comprend également les utilisateurs dont les informations personnelles ne sont pas disponibles ou ne peuvent être obtenues en raison de certaines lois sur la protection de la vie privée en vigueur dans certains pays.

ISO 5841-2:2014

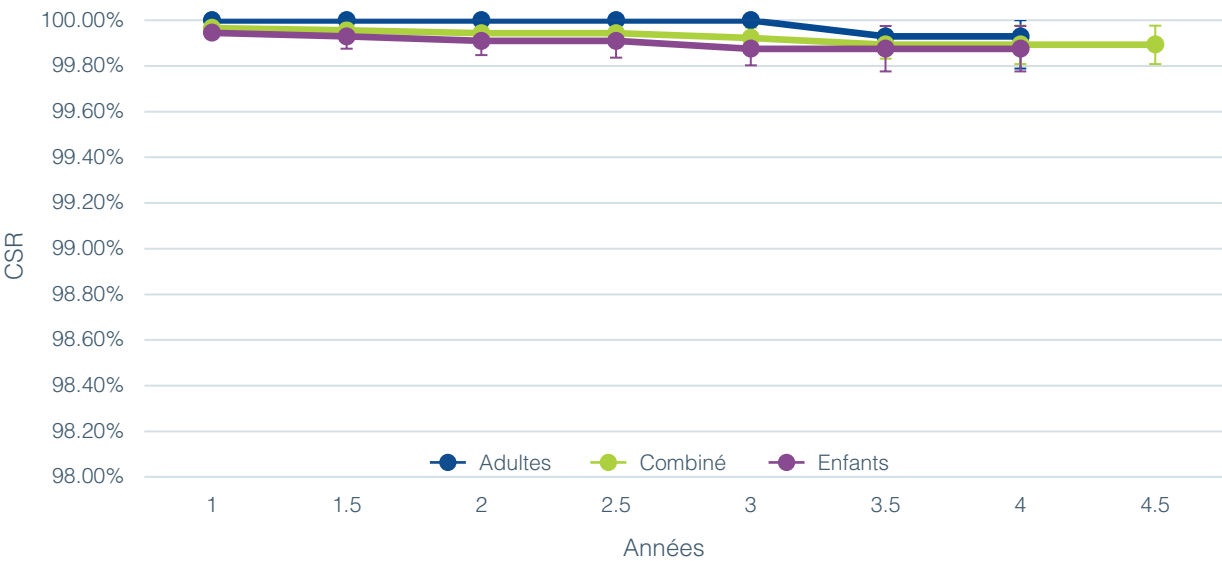


TAUX DE SURVIE CUMULÉ (CSR)

Nombre d'années	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
ADULTES	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.93%	99.93%	N/A*
COMBINÉ	99.97%	99.96%	99.94%	99.94%	99.92%	99.89%	99.89%	99.89%
ENFANTS	99.95%	99.93%	99.91%	99.91%	99.88%	99.88%	99.88%	N/A*


*La taille de l'échantillon n'est pas suffisante pour établir un rapport.

ANSI/AAMI CI86


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ADULTES

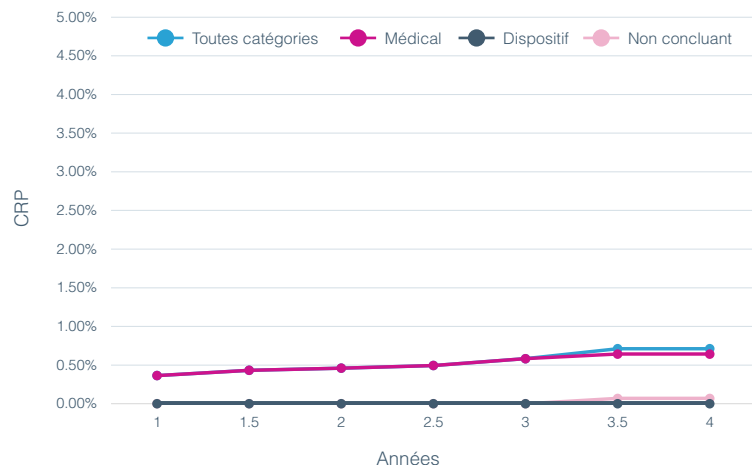


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT POUR TOUTES LES
CATÉGORIES D'ANALYSE ET DE PATIENTS

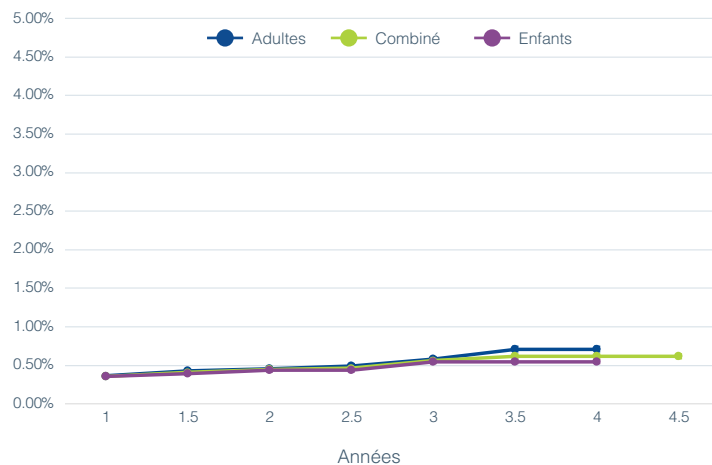

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ENFANTS

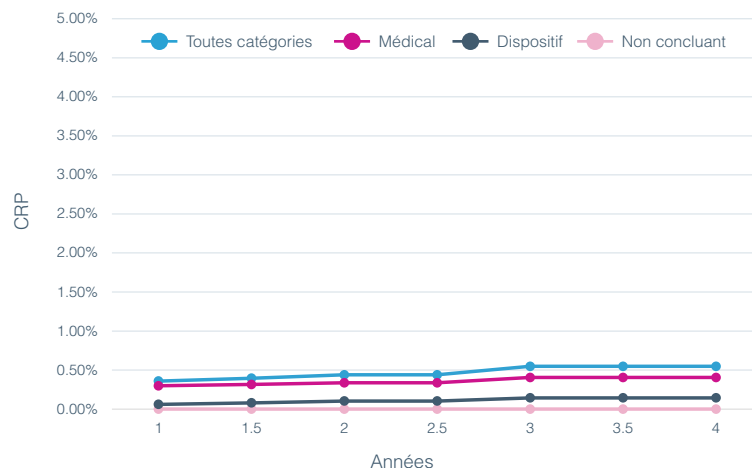

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT CATÉGORIES
POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS

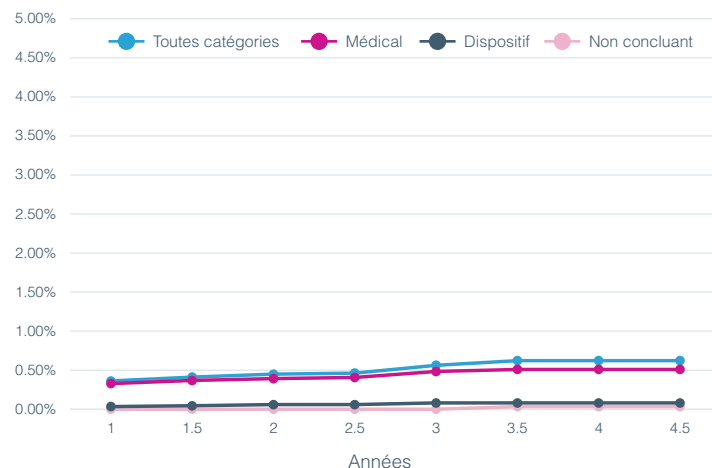

ADULTES ET ENFANTS COMBINÉS

Année	CRP médical	CRP dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total	
					IC supérieur	IC inférieur
1	0.33%	0.03%	0.00%	0.36%	0.47%	0.26%
1.5	0.37%	0.04%	0.00%	0.41%	0.53%	0.30%
2	0.39%	0.06%	0.00%	0.45%	0.57%	0.33%
2.5	0.41%	0.06%	0.00%	0.46%	0.59%	0.34%
3	0.48%	0.08%	0.00%	0.56%	0.71%	0.41%
3.5	0.51%	0.08%	0.03%	0.62%	0.79%	0.45%
4	0.51%	0.08%	0.03%	0.62%	0.79%	0.45%
4.5	0.51%	0.08%	0.03%	0.62%	0.79%	0.45%

Toutes les données ne peuvent pas être affichées à côté des graphiques en raison de contraintes d'espace.
Veuillez consulter l'annexe à la fin du rapport pour obtenir l'ensemble complet des données.

DONNÉES SUR LES IMPLANTS DE LA GÉNÉRATION PRÉCÉDENTE

HIRES ULTRA 3D V1

L'implant cochléaire HiRes™ Ultra 3D (V1) est une mise à jour du précédent dispositif HiRes Ultra (V1). Advanced Bionics continuera à fournir régulièrement des mises à jour sur la fiabilité de la plateforme HiRes Ultra à mesure que de nouvelles données et informations seront disponibles.

Nombre d'implants HiRes Ultra 3D (V1) enregistrés

À compter du 1er avril 2025.

Dernière année de distribution : soumise à une action volontaire sur le terrain en février 2020.^a


STANDARD	ADULTES	ENFANTS	COMBINÉ
ISO 5841-2:2014	4976	1724	6700 ^b
ANSI/AAMI CI86	5250 ^c	1450	6700

a. Les dates indiquées correspondent aux principaux marchés couverts par les réglementations de la FDA et du TÜV. Certains implants peuvent être en attente d'autorisation dans certaines autres régions.

b. Le nombre combiné comprend également tous les utilisateurs enregistrés pour lesquels nous ne disposons pas d'informations sur leur date de naissance.

c. Le nombre d'adultes comprend également les utilisateurs dont les informations personnelles ne sont pas disponibles ou ne peuvent être obtenues en raison de certaines lois sur la protection de la vie privée en vigueur dans certains pays.

ISO 5841-2:2014

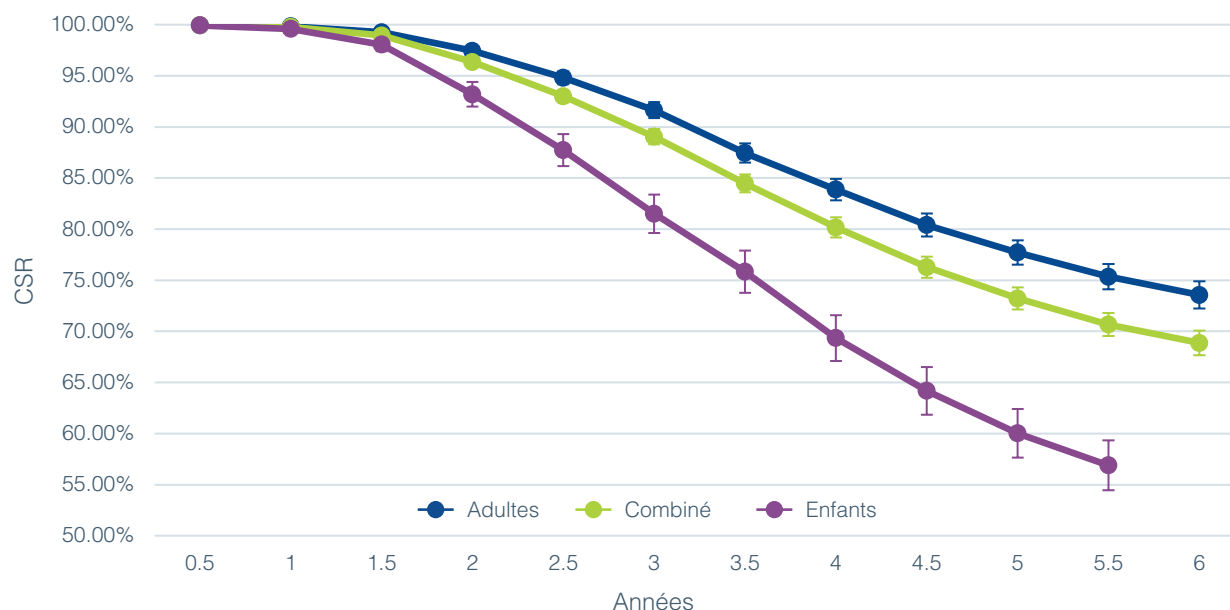


TAUX DE SURVIE CUMULÉ (CSR)

Nombre d'années	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
ADULTES	99.84%	99.27%	97.44%	94.82%	91.64%	87.44%	83.87%	80.41%	77.71%	75.34%	73.56%
COMBINÉ	99.77%	98.96%	96.35%	93.00%	89.05%	84.48%	80.17%	76.28%	73.22%	70.66%	68.87%
ENFANTS	99.59%	98.06%	93.20%	87.73%	81.51%	75.83%	69.35%	64.18%	60.02%	56.89%	N/A*


*La taille de l'échantillon n'est pas suffisante pour établir un rapport.

ANSI/AAMI CI86


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ADULTES

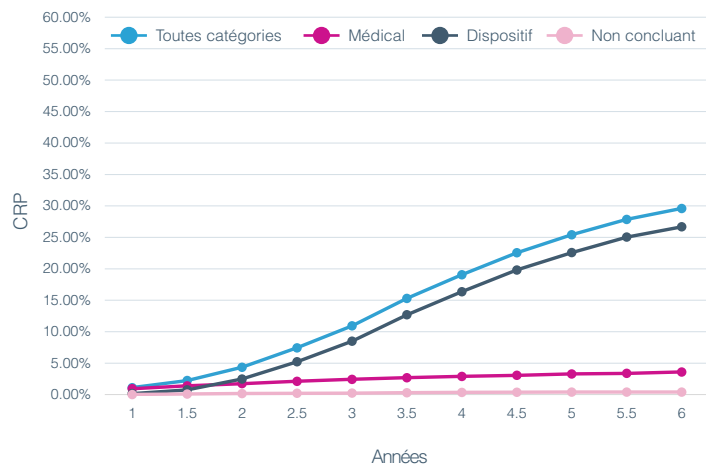


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT POUR TOUTES LES
CATÉGORIES D'ANALYSE ET DE PATIENTS

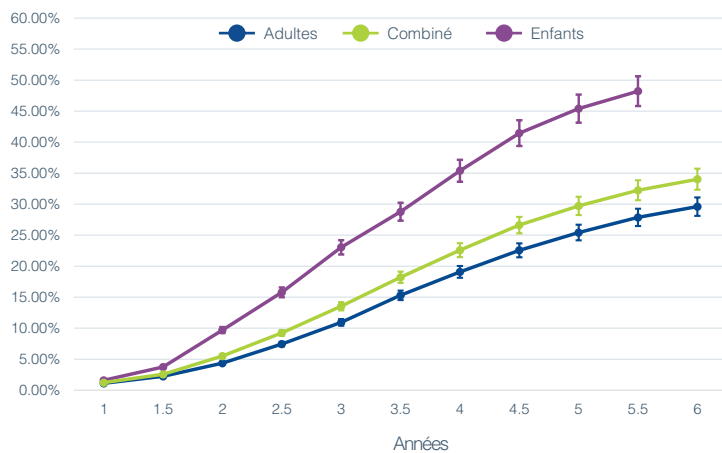

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ENFANTS

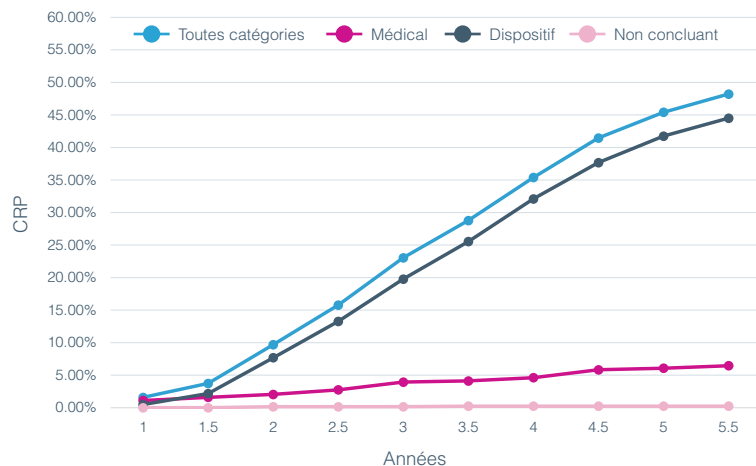

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT CATÉGORIES
POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS

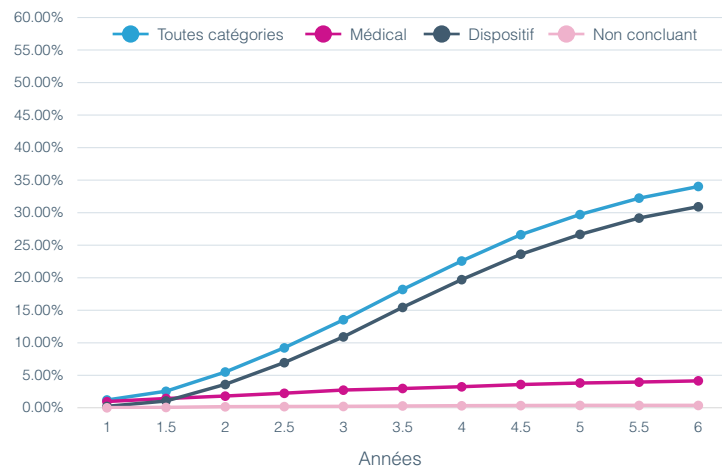

ADULTES ET ENFANTS COMBINÉS

Année	CRP médical	CRP dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total IC supérieur	Total IC inférieur
1	0.97%	0.23%	0.01%	1.21%	1.47%	0.95%
1.5	1.44%	1.06%	0.08%	2.56%	2.93%	2.18%
2	1.81%	3.61%	0.17%	5.51%	6.05%	4.96%
2.5	2.25%	6.96%	0.20%	9.23%	9.93%	8.54%
3	2.73%	10.91%	0.22%	13.53%	14.36%	12.71%
3.5	2.98%	15.44%	0.29%	18.20%	19.13%	17.27%
4	3.24%	19.72%	0.33%	22.57%	23.58%	21.57%
4.5	3.59%	23.62%	0.35%	26.62%	27.68%	25.55%
5	3.82%	26.65%	0.37%	29.72%	30.82%	28.61%
5.5	3.96%	29.18%	0.37%	32.23%	33.37%	31.09%
6	4.15%	30.91%	0.37%	34.02%	35.22%	32.82%

Toutes les données ne peuvent pas être affichées à côté des graphiques en raison de contraintes d'espace.
Veuillez consulter l'annexe à la fin du rapport pour obtenir l'ensemble complet des données.

HIRES ULTRA v1

L'implant cochléaire HiRes™ Ultra (V1) a fait l'objet d'une action volontaire sur le terrain lancée par Advanced Bionics en février 2020 et a été retiré de la vente dans le monde entier. Cette décision a été prise après la découverte d'un mode de défaillance courant sur un petit nombre d'appareils, entraînant une perte d'efficacité clinique. Advanced Bionics continuera à fournir régulièrement des mises à jour sur la fiabilité de la plateforme HiRes Ultra à mesure que de nouvelles données et informations seront disponibles.


Nombre d'implants HiRes Ultra (V1) enregistrés

À compter du 1er avril 2025.
Dernière année de distribution : soumise à une action volontaire sur le terrain en février 2020.^a

STANDARD	ADULTES	ENFANTS	COMBINÉ
ISO 5841-2:2014	8021	4539	12560 ^b
ANSI/AAMI C186	8582 ^c	3978	12560

- a. Les dates indiquées correspondent aux principaux marchés couverts par les réglementations de la FDA et du TÜV. Certains implants peuvent être en attente d'autorisation dans certaines autres régions.
- b. Le nombre combiné comprend également tous les utilisateurs enregistrés pour lesquels nous ne disposons pas d'informations sur leur date de naissance.
- c. Le nombre d'adultes comprend également les utilisateurs dont les informations personnelles ne sont pas disponibles ou ne peuvent être obtenues en raison de certaines lois sur la protection de la vie privée en vigueur dans certains pays.

ISO 5841-2:2014

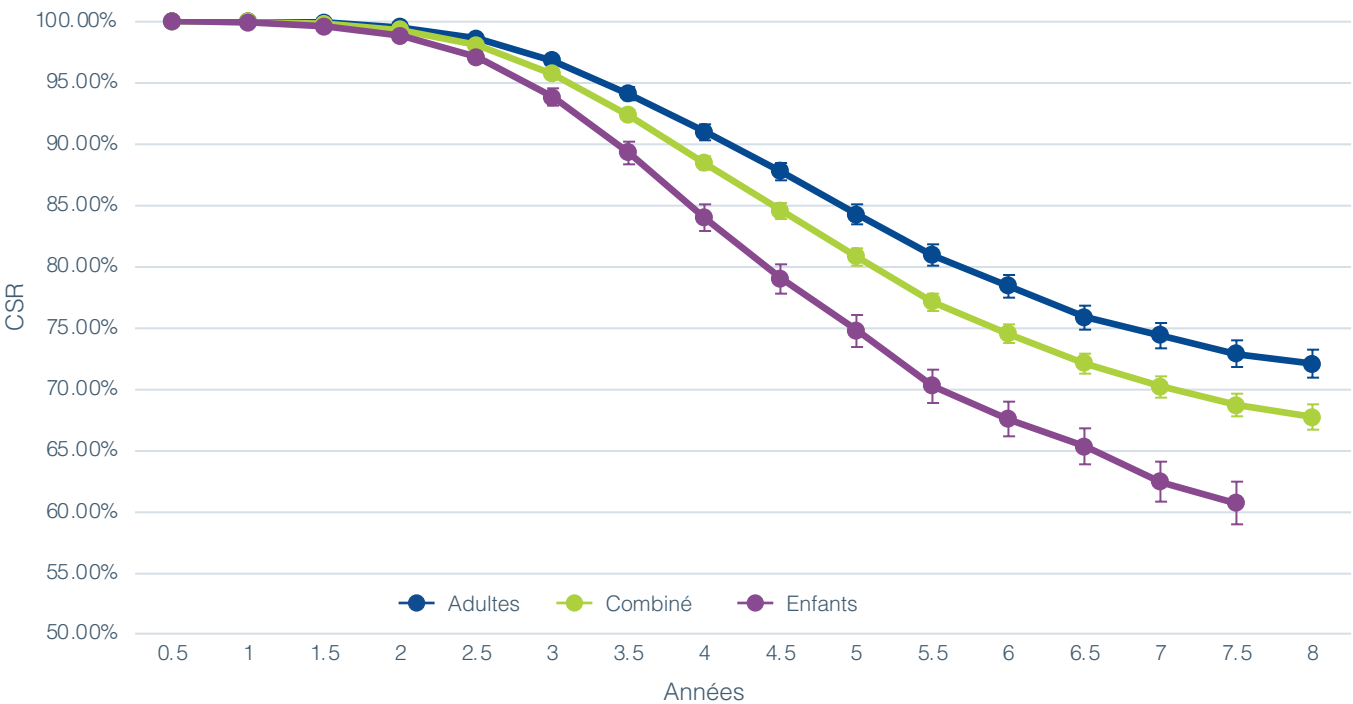


TAUX DE SURVIE CUMULÉ (CSR)

Nombre d'années	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8
ADULTES	99.98%	99.90%	99.53%	98.59%	96.78%	94.09%	90.95%	87.74%	84.24%	80.94%	78.42%	75.87%	74.38%	72.87%	72.06%
COMBINÉ	99.94%	99.78%	99.27%	98.04%	95.71%	92.35%	88.41%	84.56%	80.79%	77.08%	74.51%	72.08%	70.22%	68.66%	67.71%
ENFANTS	99.89%	99.58%	98.82%	97.08%	93.82%	89.29%	83.97%	79.00%	74.76%	70.27%	67.53%	65.32%	62.43%	60.68%	N/A*


*La taille de l'échantillon n'est pas suffisante pour établir un rapport.

ANSI/AAMI CI86


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ADULTES

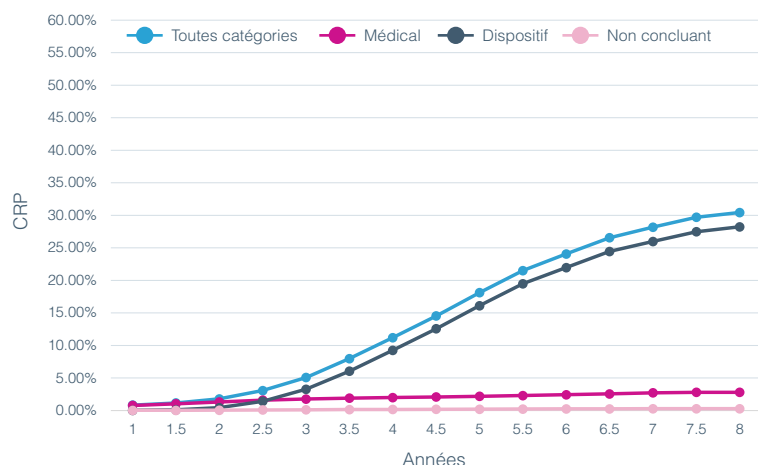


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT POUR TOUTES LES
CATÉGORIES D'ANALYSE ET DE PATIENTS

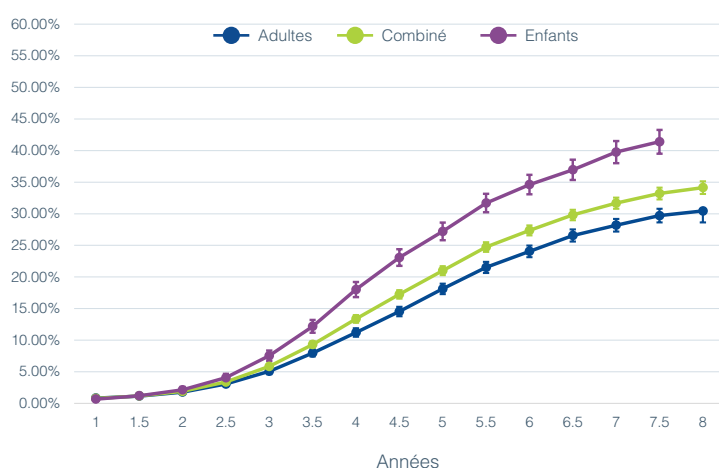

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ENFANTS

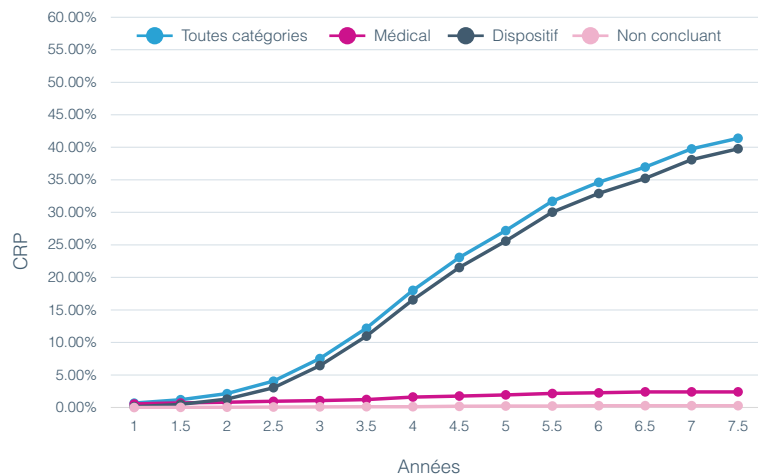

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT CATÉGORIES POUR
LES ADULTES ET LES ENFANTS

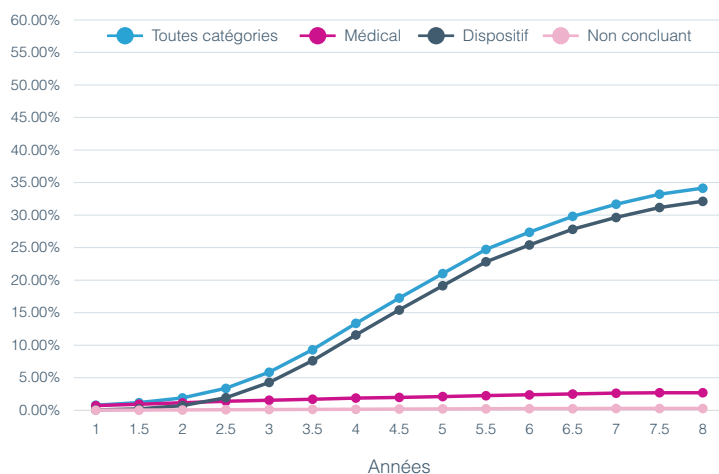

ADULTES ET ENFANTS COMBINÉS

Année	CRP médical	CRP dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total IC supérieur	Total IC inférieur
1	0.71%	0.06%	0.02%	0.78%	0.93%	0.63%
1.5	0.93%	0.22%	0.02%	1.17%	1.36%	0.98%
2	1.15%	0.71%	0.05%	1.90%	2.14%	1.66%
2.5	1.39%	1.93%	0.08%	3.38%	3.69%	3.06%
3	1.54%	4.28%	0.11%	5.86%	6.27%	5.44%
3.5	1.69%	7.62%	0.14%	9.31%	9.82%	8.80%
4	1.87%	11.58%	0.15%	13.36%	13.96%	12.77%
4.5	1.98%	15.42%	0.19%	17.25%	17.91%	16.58%
5	2.10%	19.13%	0.21%	21.00%	21.72%	20.29%
5.5	2.24%	22.82%	0.23%	24.73%	25.49%	23.97%
6	2.37%	25.41%	0.26%	27.37%	28.16%	26.57%
6.5	2.50%	27.82%	0.26%	29.80%	30.64%	28.97%
7	2.63%	29.64%	0.28%	31.68%	32.55%	30.80%
7.5	2.70%	31.16%	0.28%	33.21%	34.14%	32.27%
8	2.70%	32.12%	0.28%	34.14%	35.14%	33.13%

Toutes les données ne peuvent pas être affichées à côté des graphiques en raison de contraintes d'espace.
Veuillez consulter l'annexe à la fin du rapport pour obtenir l'ensemble complet des données.

HIRES 90K ADVANTAGE

L'implant cochléaire HiRes 90K™ Advantage offre des améliorations mécaniques par rapport au précédent modèle, l'implant cochléaire HiRes 90K. Il peut ainsi proposer des stratégies avancées de traitement du son, tout en bénéficiant de la sécurisation du lit osseux profond.

Nombre d'implants HiRes 90K Advantage enregistrés


À compter du 1er avril 2025.
Dernière année de distribution : 2023.^a

STANDARD	ADULTES	ENFANTS	COMBINÉ
ISO 5841-2:2014	18460	24673	43133 ^b
ANSI/AAMI CI86	21063 ^c	22070	43133



- a. Les dates indiquées correspondent aux principaux marchés couverts par les réglementations de la FDA et du TÜV. Certains implants peuvent être en attente d'autorisation dans certaines autres régions.
- b. Le nombre combiné comprend également tous les utilisateurs enregistrés pour lesquels nous ne disposons pas d'informations sur leur date de naissance.
- c. Le nombre d'adultes comprend également les utilisateurs dont les informations personnelles ne sont pas disponibles ou ne peuvent être obtenues en raison de certaines lois sur la protection de la vie privée en vigueur dans certains pays.

ISO 5841-2:2014

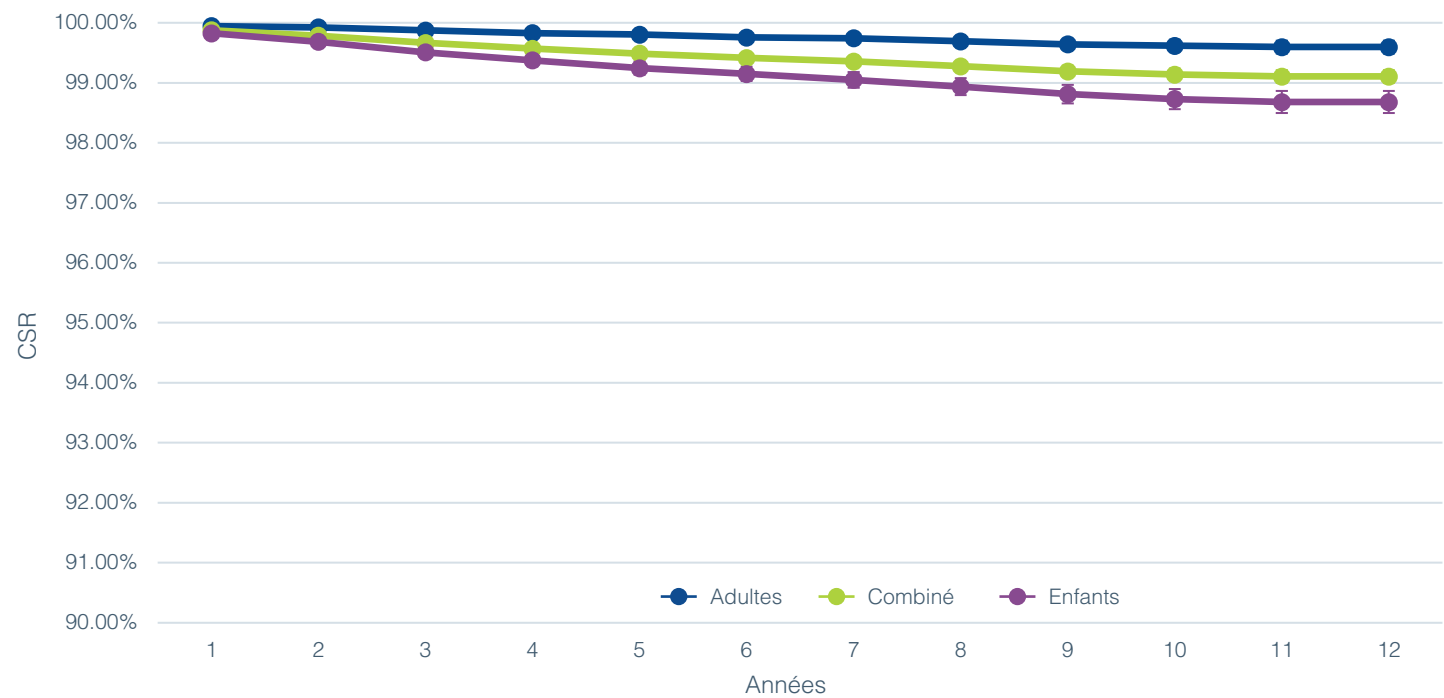


TAUX DE SURVIE CUMULÉ (CSR)


Nombre d'années	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADULTES	99.95%	99.92%	99.87%	99.83%	99.81%	99.76%	99.74%	99.69%	99.64%	99.62%	99.60%	99.60%
COMBINÉ	99.88%	99.79%	99.67%	99.57%	99.49%	99.41%	99.36%	99.28%	99.19%	99.14%	99.11%	99.11%
ENFANTS	99.83%	99.69%	99.51%	99.37%	99.25%	99.15%	99.05%	98.94%	98.81%	98.73%	98.68%	98.68%

ANSI/AAMI CI86


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ADULTES

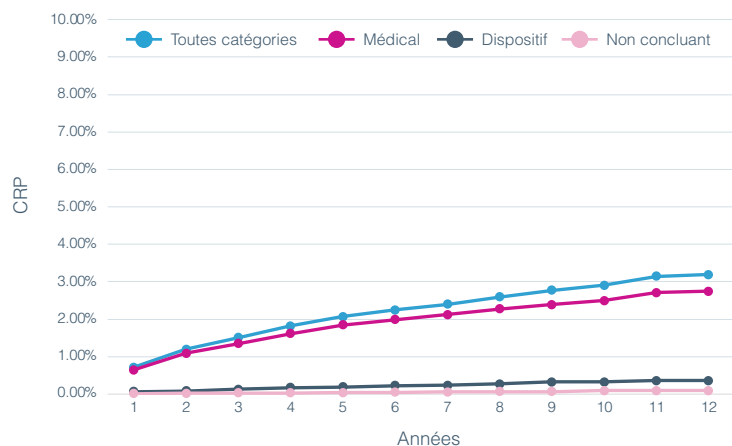


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT POUR TOUTES LES
CATÉGORIES D'ANALYSE ET DE PATIENTS

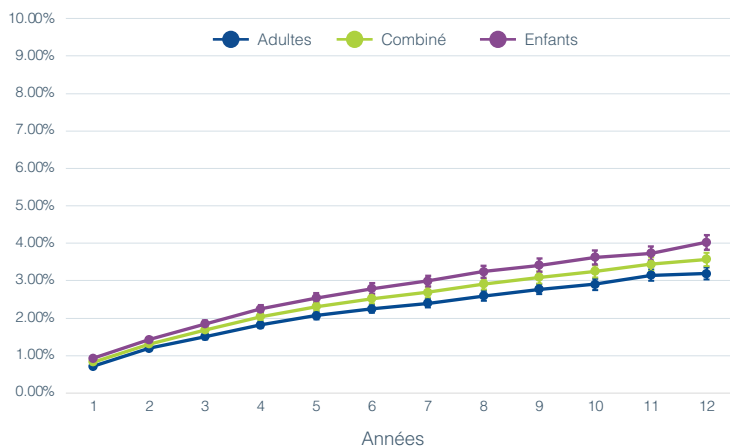

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ENFANTS

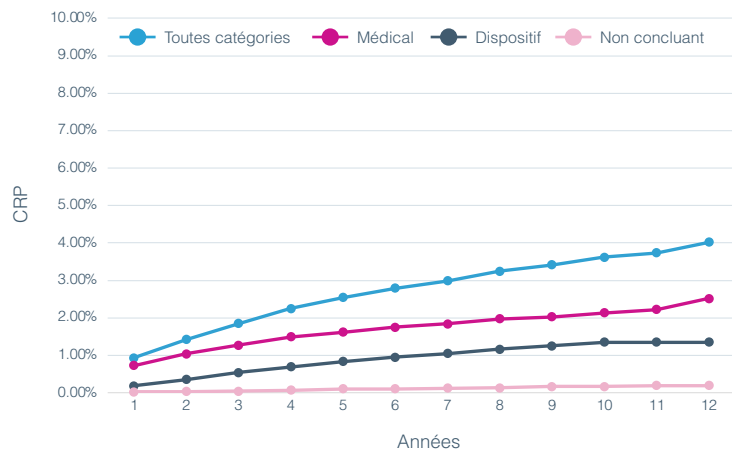

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT CATÉGORIES
POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS

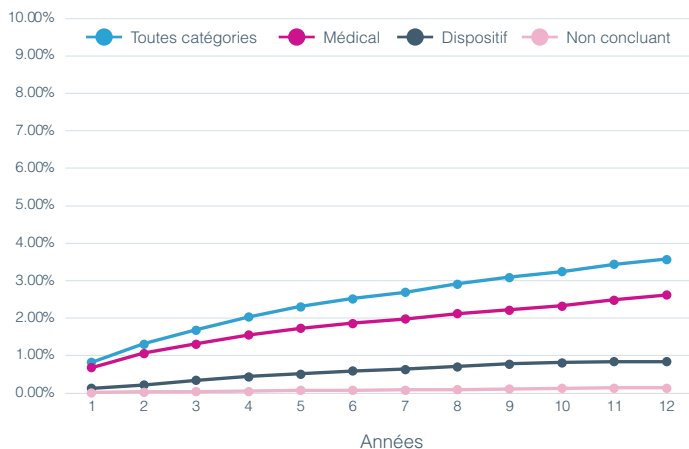

ADULTES ET ENFANTS COMBINÉS

Année	CRP médical	CRP dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total	
					IC supérieur	IC inférieur
1	0.68%	0.13%	0.02%	0.83%	0.91%	0.74%
2	1.06%	0.22%	0.03%	1.31%	1.42%	1.20%
3	1.31%	0.34%	0.04%	1.68%	1.81%	1.56%
4	1.55%	0.44%	0.05%	2.04%	2.17%	1.90%
5	1.73%	0.52%	0.07%	2.31%	2.45%	2.17%
6	1.87%	0.59%	0.08%	2.52%	2.67%	2.37%
7	1.98%	0.64%	0.09%	2.70%	2.85%	2.54%
8	2.12%	0.71%	0.10%	2.91%	3.08%	2.75%
9	2.22%	0.78%	0.11%	3.09%	3.27%	2.92%
10	2.33%	0.82%	0.13%	3.25%	3.43%	3.06%
11	2.49%	0.84%	0.14%	3.44%	3.65%	3.24%
12	2.62%	0.84%	0.14%	3.58%	3.81%	3.34%

Toutes les données ne peuvent pas être affichées à côté des graphiques en raison de contraintes d'espace.
Veuillez consulter l'**annexe** à la fin du rapport pour obtenir l'ensemble complet des données.

HIRES 90K vendor A post-mod

L'implant cochléaire HiRes 90K™ propose des technologies avancées de traitement du son. Il a été modifié au niveau de sa conception, et la version actuellement disponible est l'implant HiRes 90K (version post-modification du fournisseur A).


Nombre des implants HiRes 90K enregistrés (vendor A post-mod)

À compter du 1er avril 2025.
Dernière année de distribution : 2018.^a

STANDARD	ADULTES	ENFANTS	COMBINÉ
ISO 5841-2:2014	34609	47383	81992 ^b
ANSI/AAMI C186	40574 ^c	41418	81992



- a. Les dates indiquées correspondent aux principaux marchés couverts par les réglementations de la FDA et du TÜV. Certains implants peuvent être en attente d'autorisation dans certaines autres régions.
- b. Le nombre combiné comprend également tous les utilisateurs enregistrés pour lesquels nous ne disposons pas d'informations sur leur date de naissance.
- c. Le nombre d'adultes comprend également les utilisateurs dont les informations personnelles ne sont pas disponibles ou ne peuvent être obtenues en raison de certaines lois sur la protection de la vie privée en vigueur dans certains pays.

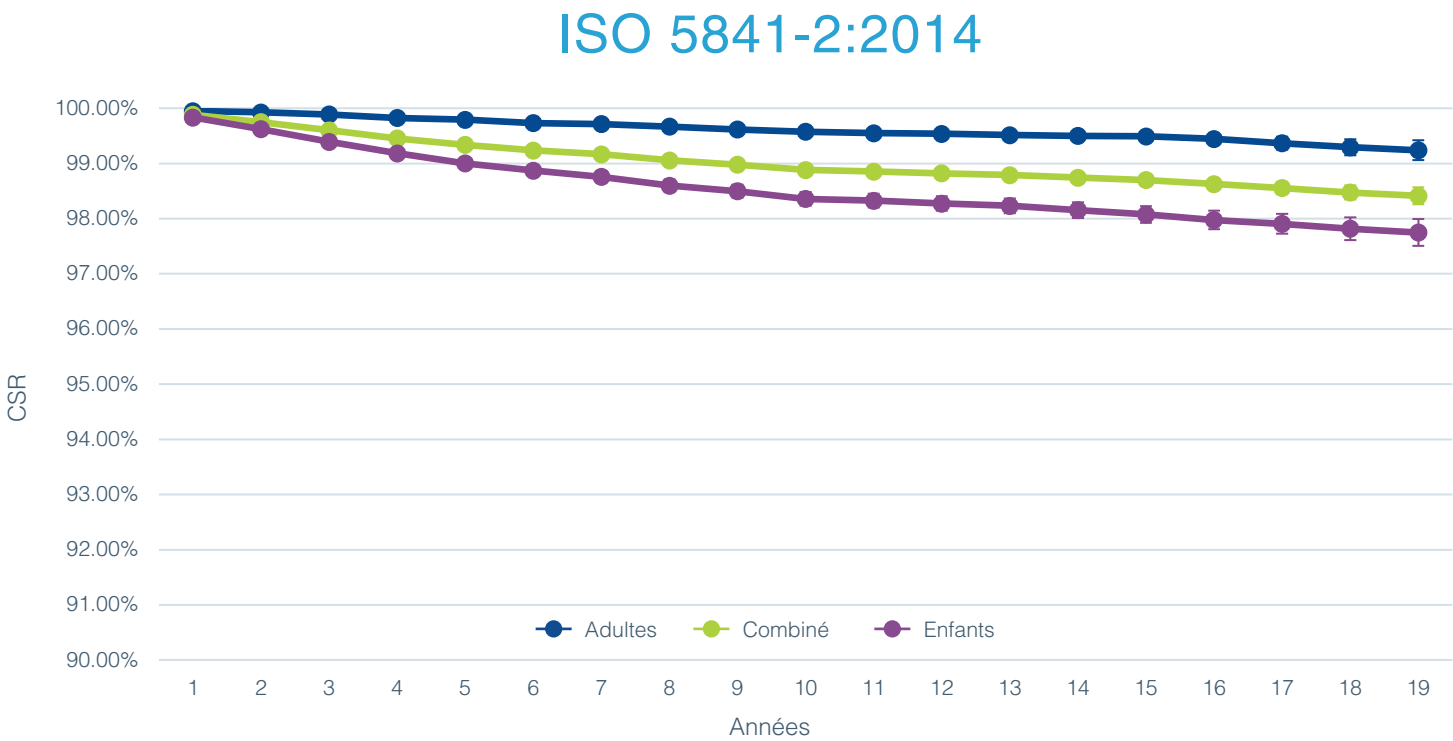


TAUX DE SURVIE CUMULÉ (CSR)

Nombre d'années	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ADULTES	99.95%	99.93%	99.89%	99.83%	99.79%	99.73%	99.72%	99.67%	99.62%	99.57%
COMBINÉ	99.88%	99.75%	99.60%	99.46%	99.34%	99.24%	99.17%	99.06%	98.98%	98.88%
ENFANTS	99.83%	99.62%	99.39%	99.18%	99.00%	98.87%	98.76%	98.60%	98.50%	98.36%


Nombre d'années	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ADULTES	99.55%	99.54%	99.52%	99.50%	99.49%	99.45%	99.37%	99.29%	99.24%
COMBINÉ	98.85%	98.82%	98.79%	98.74%	98.70%	98.63%	98.56%	98.47%	98.41%
ENFANTS	98.33%	98.27%	98.23%	98.16%	98.08%	97.98%	97.91%	97.82%	97.75%

ANSI/AAMI CI86


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ADULTES

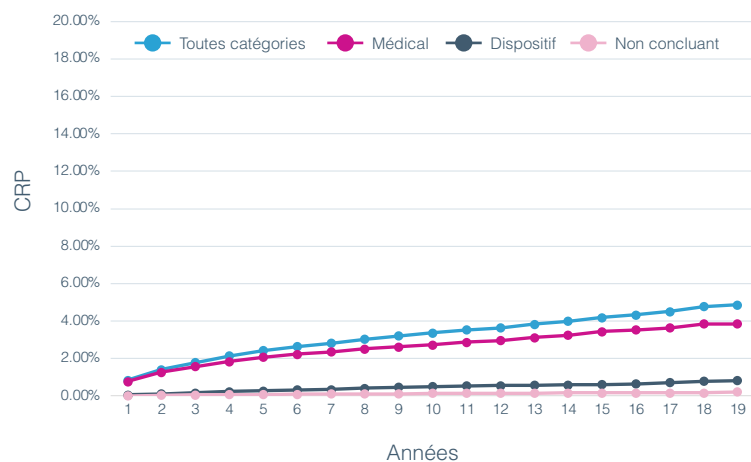


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT POUR TOUTES LES
CATÉGORIES D'ANALYSE ET DE PATIENTS

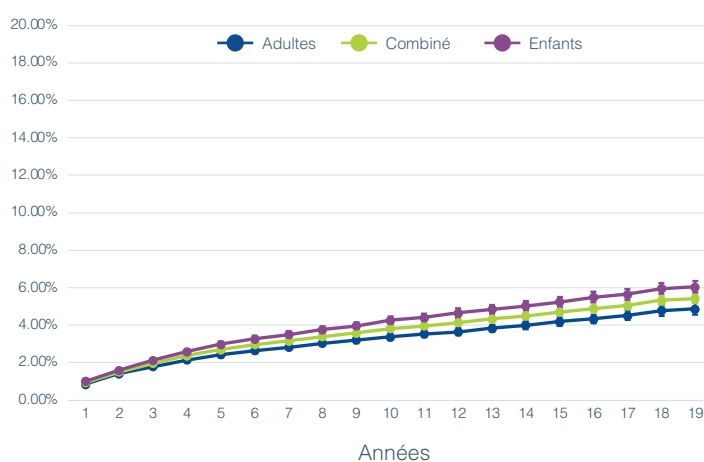

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ENFANTS

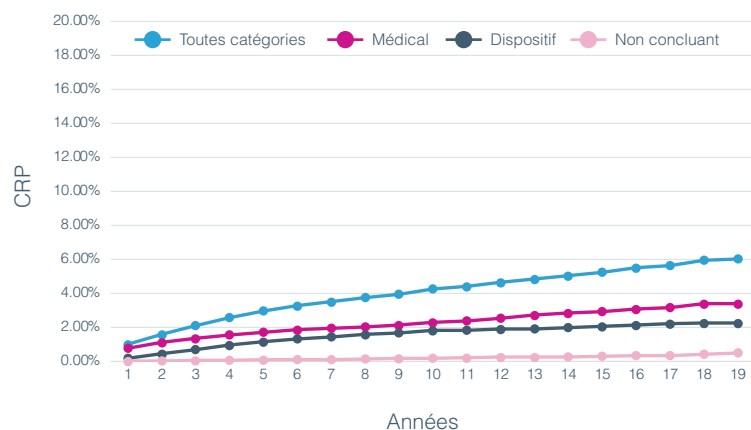

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT CATÉGORIES
POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS

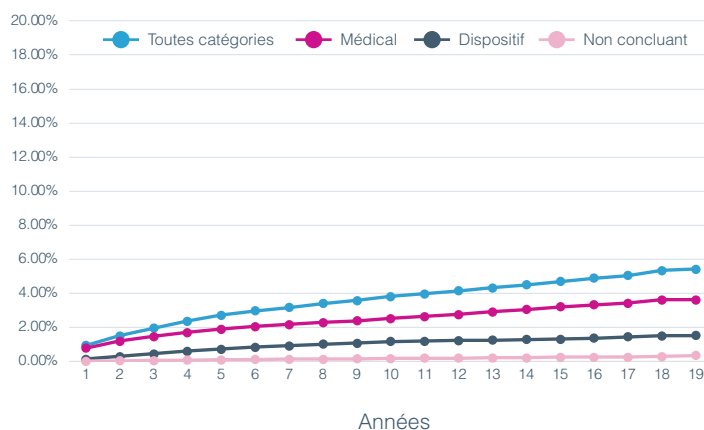

ADULTES ET ENFANTS COMBINÉS

Année	CRP médical	CRP dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total	
					IC supérieur	IC inférieur
1	0.78%	0.13%	0.02%	0.93%	0.99%	0.86%
2	1.19%	0.28%	0.04%	1.51%	1.59%	1.43%
3	1.47%	0.44%	0.06%	1.96%	2.06%	1.87%
4	1.70%	0.60%	0.08%	2.37%	2.48%	2.27%
5	1.90%	0.73%	0.10%	2.71%	2.82%	2.59%
6	2.04%	0.83%	0.11%	2.96%	3.08%	2.85%
7	2.16%	0.90%	0.12%	3.16%	3.29%	3.04%
8	2.28%	1.01%	0.14%	3.40%	3.53%	3.27%
9	2.38%	1.08%	0.15%	3.58%	3.71%	3.45%
10	2.51%	1.16%	0.17%	3.81%	3.95%	3.68%
11	2.63%	1.19%	0.18%	3.96%	4.11%	3.82%
12	2.76%	1.22%	0.20%	4.14%	4.28%	3.99%
13	2.92%	1.25%	0.20%	4.33%	4.48%	4.17%
14	3.04%	1.28%	0.22%	4.50%	4.66%	4.33%
15	3.20%	1.31%	0.24%	4.70%	4.87%	4.53%
16	3.32%	1.37%	0.25%	4.88%	5.07%	4.70%
17	3.41%	1.45%	0.25%	5.05%	5.25%	4.85%
18	3.62%	1.50%	0.28%	5.33%	5.56%	5.10%
19	3.62%	1.53%	0.34%	5.42%	5.67%	5.17%

Toutes les données ne peuvent pas être affichées à côté des graphiques en raison de contraintes d'espace.
Veuillez consulter l'annexe à la fin du rapport pour obtenir l'ensemble complet des données.


HIRES 90K vendor A all

Nombre d’implants HiRes 90K enregistrés (vendor A all)

À compter du 1er avril 2025.
Dernière année de distribution : 2018.^a

STANDARD	ADULTES	ENFANTS	COMBINÉ
ISO 5841-2:2014	36060	48481	84541 ^b
ANSI/AAMI CI86	42235 ^c	42306	84541

- a. Les dates indiquées correspondent aux principaux marchés couverts par les réglementations de la FDA et du TÜV. Certains implants peuvent être en attente d'autorisation dans certaines autres régions.
- b. Le nombre combiné comprend également tous les utilisateurs enregistrés pour lesquels nous ne disposons pas d'informations sur leur date de naissance.
- c. Le nombre d'adultes comprend également les utilisateurs dont les informations personnelles ne sont pas disponibles ou ne peuvent être obtenues en raison de certaines lois sur la protection de la vie privée en vigueur dans certains pays.

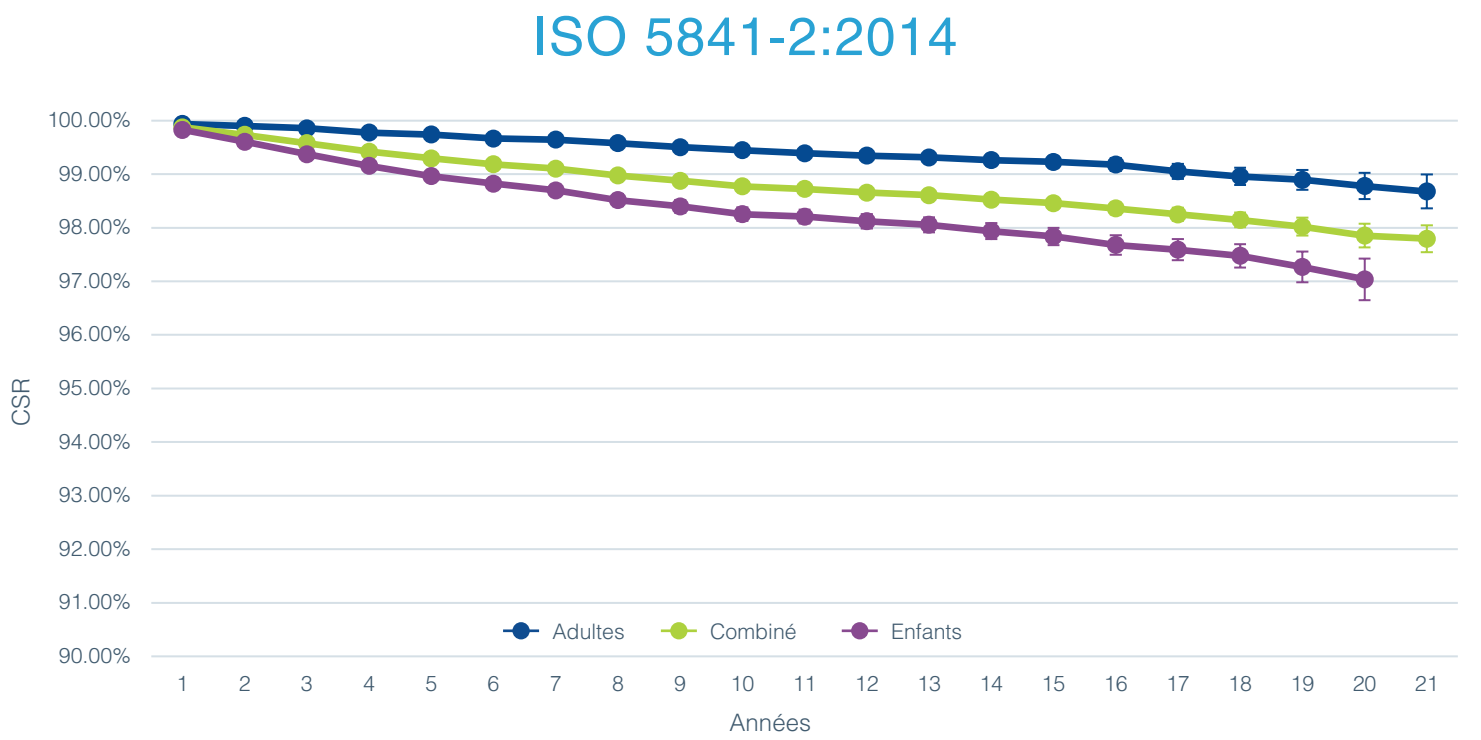


TAUX DE SURVIE CUMULÉ (CSR)											
Nombre d'années	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ADULTES	99.94%	99.90%	99.86%	99.78%	99.74%	99.67%	99.64%	99.58%	99.50%	99.45%	99.39%
COMBINÉ	99.87%	99.73%	99.58%	99.42%	99.30%	99.18%	99.10%	98.98%	98.88%	98.77%	98.72%
ENFANTS	99.83%	99.61%	99.37%	99.15%	98.96%	98.82%	98.70%	98.52%	98.40%	98.25%	98.21%

Nombre d'années	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ADULTES	99.35%	99.31%	99.26%	99.23%	99.18%	99.05%	98.96%	98.89%	98.78%	98.68%
COMBINÉ	98.66%	98.61%	98.52%	98.46%	98.36%	98.25%	98.15%	98.02%	97.85%	97.79%
ENFANTS	98.12%	98.06%	97.94%	97.84%	97.68%	97.59%	97.48%	97.27%	97.04%	N/A*


*La taille de l'échantillon n'est pas suffisante pour établir un rapport.

ANSI/AAMI CI86


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ADULTES

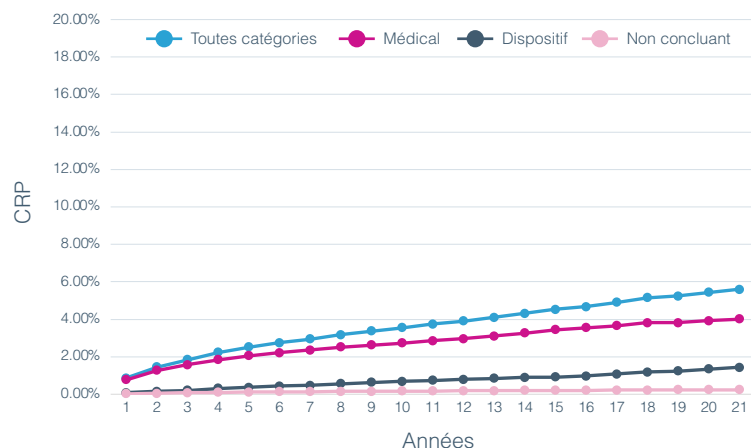


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT POUR TOUTES LES
CATÉGORIES D'ANALYSE ET DE PATIENTS

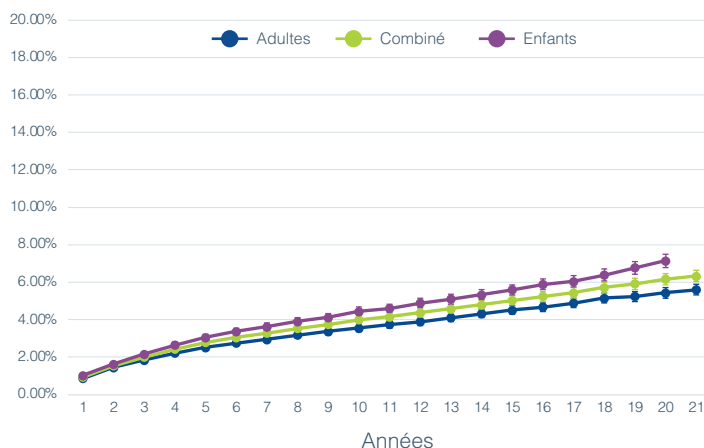

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ENFANTS

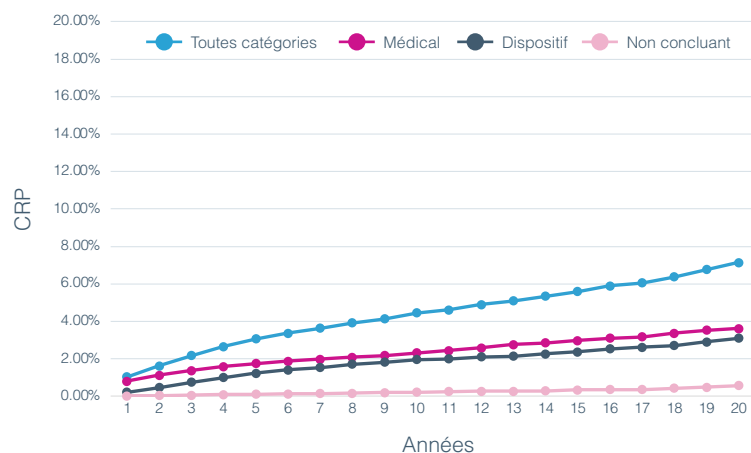

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT CATÉGORIES
POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS

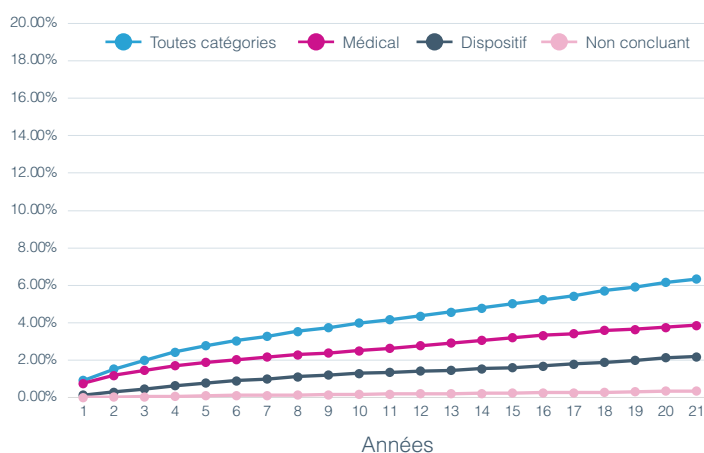

ADULTES ET ENFANTS COMBINÉS

Année	CRP médical	CRP dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total IC supérieur	Total IC inférieur
1	0.78%	0.14%	0.02%	0.94%	1.01%	0.88%
2	1.19%	0.30%	0.04%	1.54%	1.62%	1.45%
3	1.47%	0.47%	0.07%	2.01%	2.10%	1.91%
4	1.71%	0.65%	0.09%	2.44%	2.54%	2.33%
5	1.90%	0.79%	0.11%	2.79%	2.90%	2.67%
6	2.04%	0.91%	0.12%	3.06%	3.18%	2.94%
7	2.17%	1.00%	0.14%	3.28%	3.40%	3.16%
8	2.30%	1.12%	0.15%	3.54%	3.67%	3.42%
9	2.40%	1.21%	0.17%	3.74%	3.87%	3.61%
10	2.53%	1.31%	0.19%	3.99%	4.13%	3.85%
11	2.65%	1.36%	0.20%	4.17%	4.31%	4.02%
12	2.78%	1.43%	0.22%	4.37%	4.52%	4.23%
13	2.93%	1.47%	0.23%	4.58%	4.74%	4.42%
14	3.06%	1.56%	0.24%	4.80%	4.97%	4.64%
15	3.22%	1.62%	0.26%	5.03%	5.21%	4.85%
16	3.33%	1.70%	0.27%	5.24%	5.42%	5.05%
17	3.42%	1.81%	0.28%	5.44%	5.63%	5.24%
18	3.61%	1.90%	0.30%	5.72%	5.95%	5.50%
19	3.66%	2.01%	0.34%	5.91%	6.16%	5.66%
20	3.76%	2.14%	0.37%	6.17%	6.47%	5.86%
21	3.87%	2.20%	0.37%	6.34%	6.70%	5.98%

Toutes les données ne peuvent pas être affichées à côté des graphiques en raison de contraintes d'espace.
Veuillez consulter l'annexe à la fin du rapport pour obtenir l'ensemble complet des données.

HIRES 90K vendor A pre-mod


Nombre d’implants HiRes 90K enregistrés (vendor A pre-mod)

À compter du 1er avril 2025.
Dernière année de distribution : 2005.^a

STANDARD	ADULTES	ENFANTS	COMBINÉ
ISO 5841-2:2014	1451	1098	2549 ^b
ANSI/AAMI CI86	1661 ^c	888	2549

- a. Les dates indiquées correspondent aux principaux marchés couverts par les réglementations de la FDA et du TÜV. Certains implants peuvent être en attente d'autorisation dans certaines autres régions.
- b. Le nombre combiné comprend également tous les utilisateurs enregistrés pour lesquels nous ne disposons pas d'informations sur leur date de naissance.
- c. Le nombre d'adultes comprend également les utilisateurs dont les informations personnelles ne sont pas disponibles ou ne peuvent être obtenues en raison de certaines lois sur la protection de la vie privée en vigueur dans certains pays.

ISO 5841-2:2014

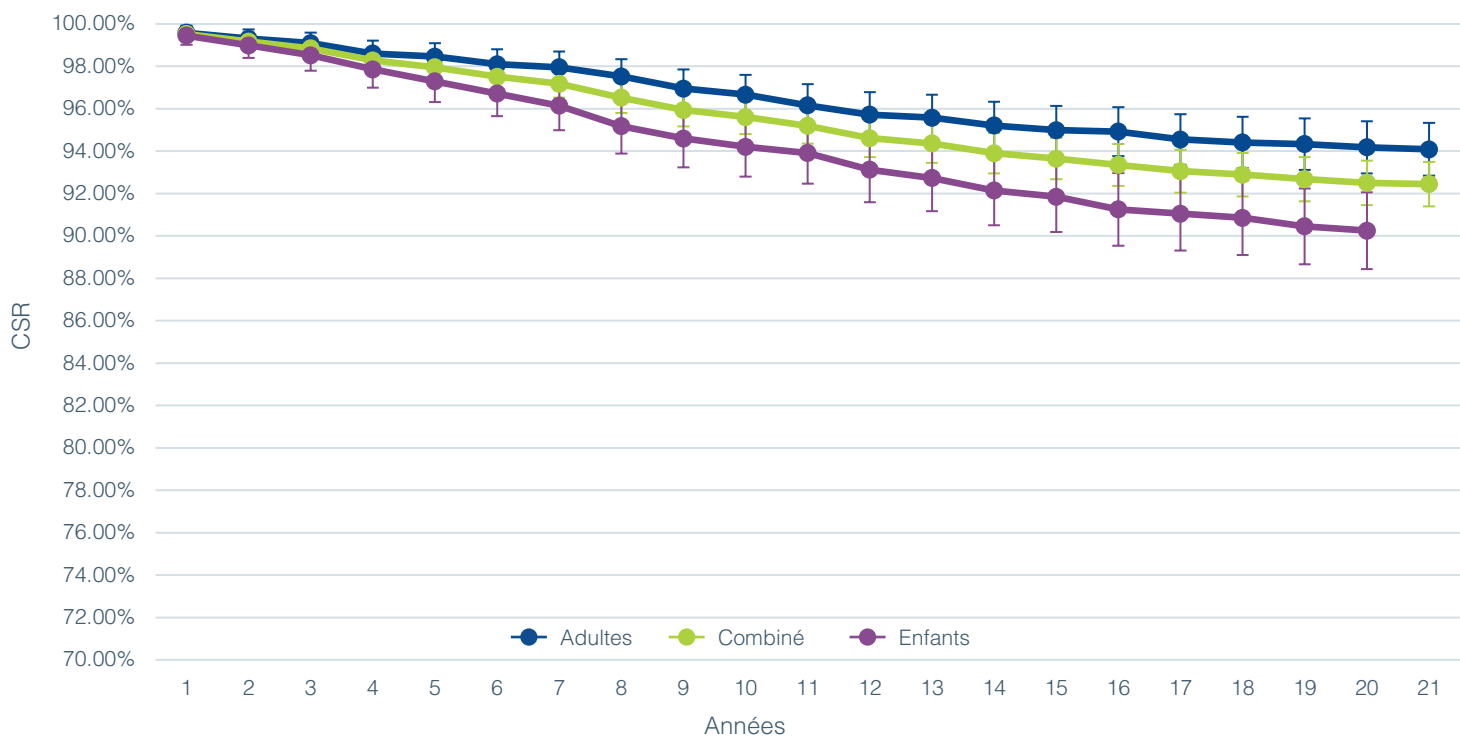


TAUX DE SURVIE CUMULÉ (CSR)

Nombre d'années	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ADULTES	99.59%	99.31%	99.10%	98.60%	98.46%	98.10%	97.96%	97.53%	96.95%	96.66%	96.16%
COMBINÉ	99.53%	99.17%	98.85%	98.28%	97.96%	97.51%	97.18%	96.52%	95.94%	95.61%	95.20%
ENFANTS	99.45%	98.99%	98.52%	97.86%	97.29%	96.72%	96.14%	95.18%	94.60%	94.21%	93.91%
Nombre d'années	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
ADULTES	95.72%	95.58%	95.21%	94.99%	94.92%	94.55%	94.40%	94.33%	94.18%	94.08%	
COMBINÉ	94.61%	94.36%	93.90%	93.65%	93.35%	93.06%	92.89%	92.68%	92.50%	92.44%	
ENFANTS	93.13%	92.73%	92.14%	91.85%	91.25%	91.05%	90.85%	90.45%	90.25%	N/A*	


*La taille de l'échantillon n'est pas suffisante pour établir un rapport.

ANSI/AAMI CI86


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ADULTES

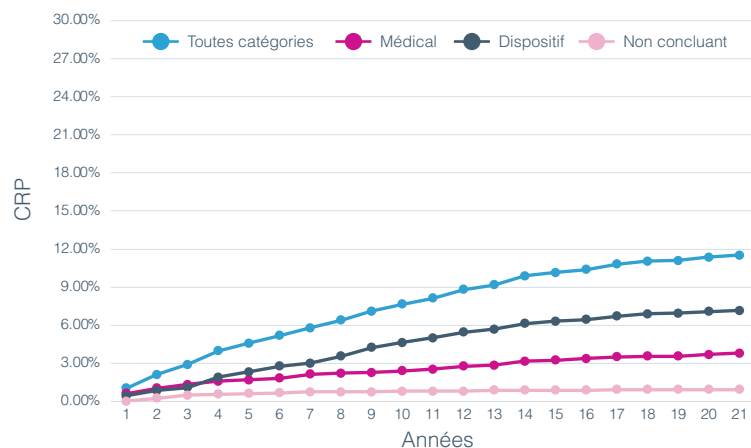


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT POUR TOUTES LES
CATÉGORIES D'ANALYSE ET DE PATIENTS

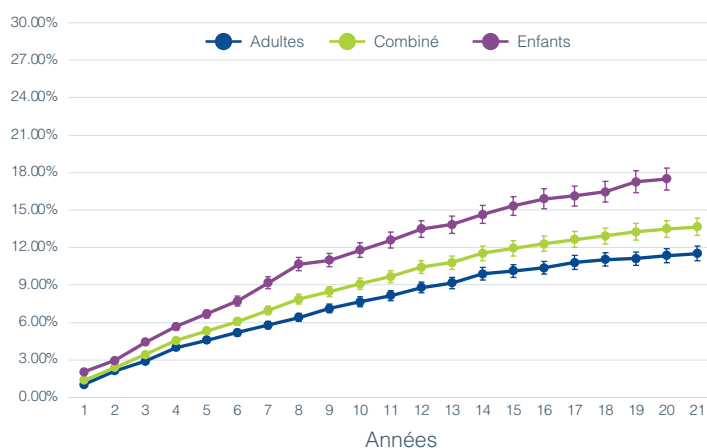

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ENFANTS

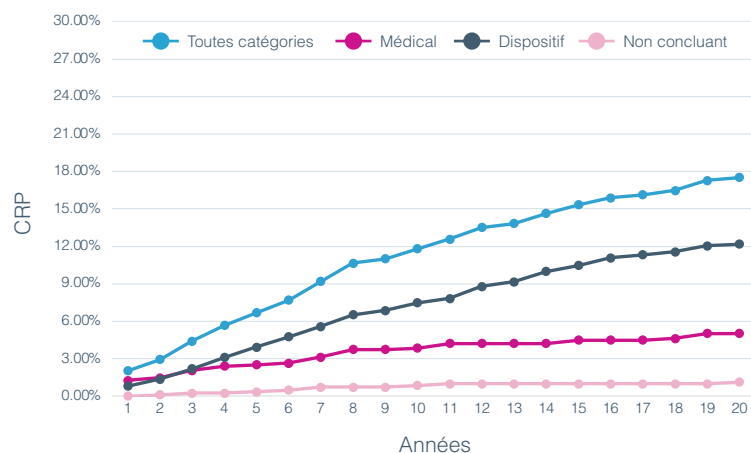

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT CATÉGORIES
POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS

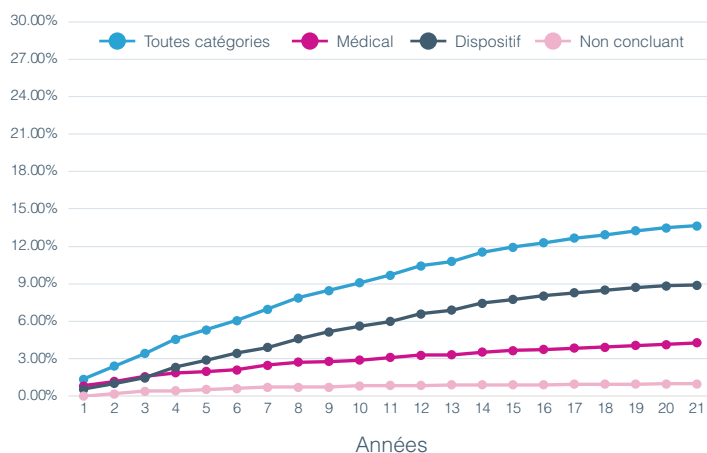

ADULTES ET ENFANTS COMBINÉS

Année	CRP médical	CRP dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total IC supérieur	Total IC inférieur
1	0.83%	0.55%	0.00%	1.37%	1.83%	0.92%
2	1.18%	1.03%	0.20%	2.40%	2.99%	1.80%
3	1.58%	1.47%	0.40%	3.42%	4.13%	2.71%
4	1.87%	2.31%	0.44%	4.56%	5.37%	3.75%
5	1.99%	2.88%	0.52%	5.31%	6.18%	4.44%
6	2.11%	3.45%	0.61%	6.06%	6.98%	5.13%
7	2.48%	3.89%	0.73%	6.96%	7.95%	5.97%
8	2.73%	4.58%	0.73%	7.87%	8.92%	6.82%
9	2.77%	5.16%	0.73%	8.46%	9.54%	7.38%
10	2.90%	5.61%	0.82%	9.09%	10.21%	7.97%
11	3.11%	5.98%	0.86%	9.68%	10.83%	8.53%
12	3.28%	6.59%	0.86%	10.43%	11.62%	9.25%
13	3.32%	6.88%	0.91%	10.79%	12.00%	9.58%
14	3.54%	7.46%	0.91%	11.54%	12.79%	10.30%
15	3.67%	7.75%	0.91%	11.94%	13.20%	10.68%
16	3.75%	8.04%	0.91%	12.29%	13.57%	11.02%
17	3.84%	8.29%	0.95%	12.65%	13.94%	11.36%
18	3.93%	8.50%	0.95%	12.93%	14.23%	11.62%
19	4.06%	8.71%	0.95%	13.25%	14.57%	11.93%
20	4.15%	8.83%	1.00%	13.49%	14.82%	12.16%
21	4.27%	8.89%	1.00%	13.66%	15.00%	12.32%

Toutes les données ne peuvent pas être affichées à côté des graphiques en raison de contraintes d'espace.
Veuillez consulter l'annexe à la fin du rapport pour obtenir l'ensemble complet des données.

HIRES 90K vendor B


Nombre d’implants HiRes 90K enregistrés (vendor B)

À compter du 1er avril 2025.
Dernière année de distribution : sujet à un rappel volontaire en 2006.^a

STANDARD	ADULTES	ENFANTS	COMBINÉ
ISO 5841-2:2014	2214	1849	4063 ^b
ANSI/AAMI C186	2559 ^c	1504	4063

- a. Les dates indiquées correspondent aux principaux marchés couverts par les réglementations de la FDA et du TÜV. Certains implants peuvent être en attente d'autorisation dans certaines autres régions.
- b. Le nombre combiné comprend également tous les utilisateurs enregistrés pour lesquels nous ne disposons pas d'informations sur leur date de naissance.
- c. Le nombre d'adultes comprend également les utilisateurs dont les informations personnelles ne sont pas disponibles ou ne peuvent être obtenues en raison de certaines lois sur la protection de la vie privée en vigueur dans certains pays.

ISO 5841-2:2014

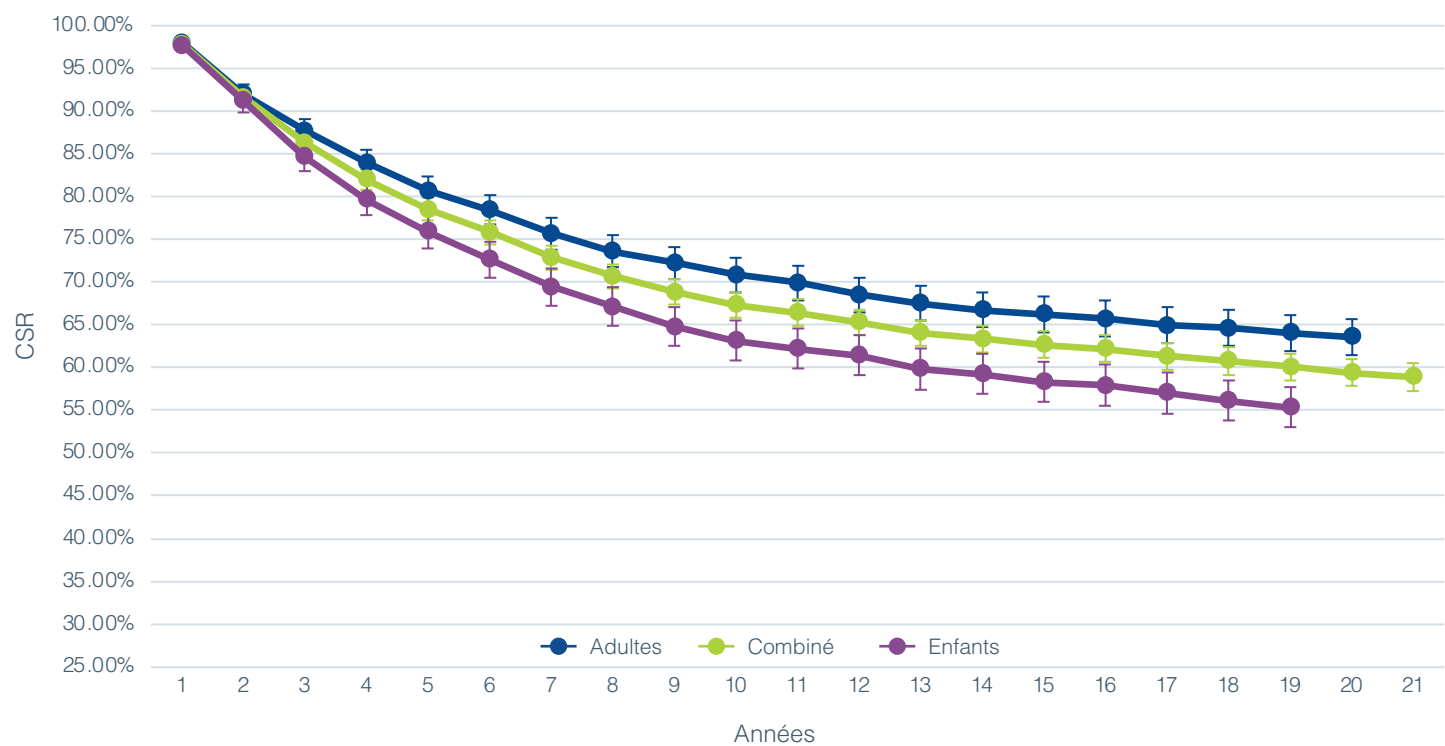

TAUX DE SURVIE CUMULÉ (CSR)


Nombre d'années	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ADULTES	97.90%	91.90%	87.64%	83.88%	80.66%	78.41%	75.64%	73.57%	72.19%	70.81%	69.88%
COMBINÉ	97.79%	91.57%	86.25%	81.94%	78.48%	75.77%	72.83%	70.64%	68.80%	67.32%	66.39%
ENFANTS	97.65%	91.18%	84.59%	79.62%	75.87%	72.61%	69.45%	67.12%	64.73%	63.12%	62.19%

Nombre d'années	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ADULTES	68.49%	67.51%	66.73%	66.21%	65.69%	64.90%	64.59%	64.01%	63.57%	N/A*
COMBINÉ	65.26%	64.01%	63.33%	62.61%	62.16%	61.32%	60.75%	60.08%	59.39%	58.93%
ENFANTS	61.37%	59.80%	59.23%	58.29%	57.90%	57.01%	56.12%	55.35%	N/A*	N/A*


*La taille de l'échantillon n'est pas suffisante pour établir un rapport.

ANSI/AAMI CI86


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ADULTES

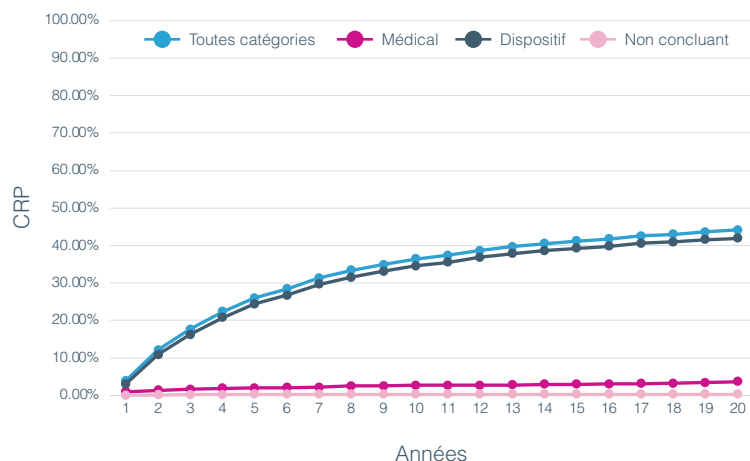


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT POUR TOUTES LES
CATÉGORIES D'ANALYSE ET DE PATIENTS

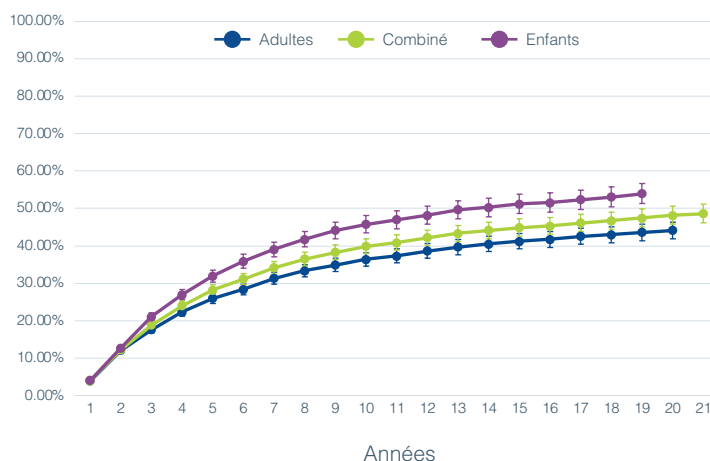

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ENFANTS

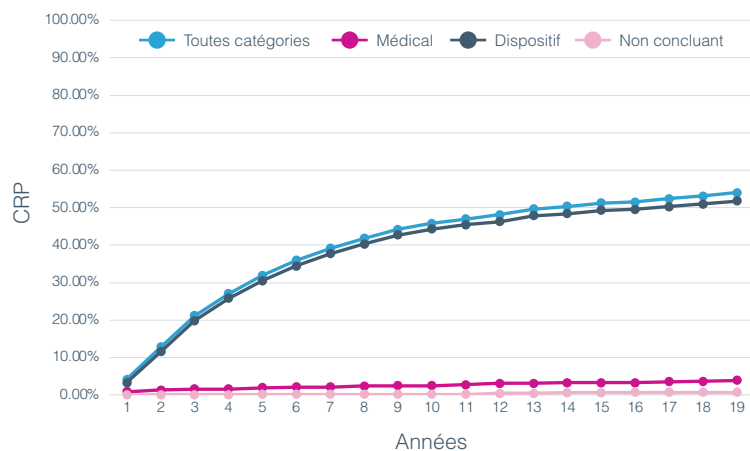

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT CATÉGORIES
POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS

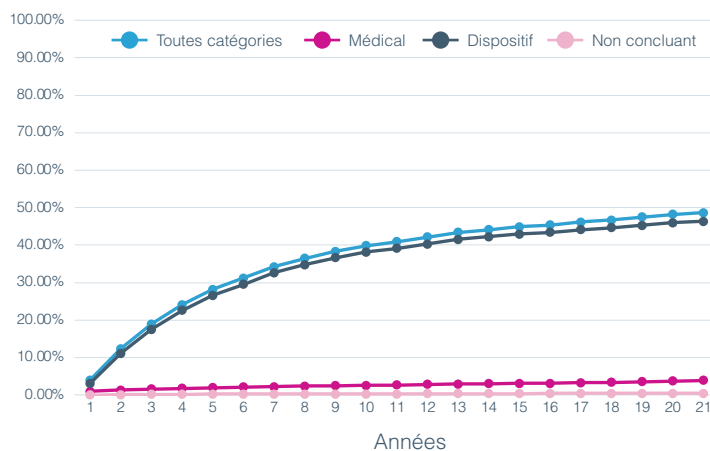

ADULTES ET ENFANTS COMBINÉS

Année	CRP médical	CRP dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total	
					IC supérieur	IC inférieur
1	0.93%	3.12%	0.00%	4.02%	4.62%	3.41%
2	1.33%	11.09%	0.08%	12.34%	13.35%	11.33%
3	1.56%	17.53%	0.14%	18.92%	20.13%	17.72%
4	1.74%	22.61%	0.14%	24.07%	25.38%	22.75%
5	1.94%	26.63%	0.21%	28.20%	29.59%	26.81%
6	2.08%	29.56%	0.21%	31.17%	32.60%	29.74%
7	2.15%	32.62%	0.21%	34.21%	35.68%	32.75%
8	2.42%	34.77%	0.21%	36.48%	37.97%	35.00%
9	2.46%	36.65%	0.21%	38.33%	39.84%	36.83%
10	2.58%	38.17%	0.21%	39.89%	41.40%	38.37%
11	2.66%	39.17%	0.21%	40.91%	42.43%	39.39%
12	2.83%	40.31%	0.29%	42.17%	43.69%	40.64%
13	2.87%	41.53%	0.29%	43.37%	44.90%	41.84%
14	3.00%	42.23%	0.34%	44.15%	45.69%	42.62%
15	3.04%	42.98%	0.34%	44.91%	46.44%	43.37%
16	3.09%	43.40%	0.38%	45.36%	46.90%	43.82%
17	3.22%	44.16%	0.38%	46.17%	47.71%	44.62%
18	3.31%	44.68%	0.38%	46.72%	48.27%	45.18%
19	3.54%	45.32%	0.38%	47.46%	49.00%	45.91%
20	3.74%	45.94%	0.38%	48.17%	49.72%	46.61%
21	3.89%	46.37%	0.38%	48.65%	50.24%	47.06%

Toutes les données ne peuvent pas être affichées à côté des graphiques en raison de contraintes d'espace.
Veuillez consulter l'annexe à la fin du rapport pour obtenir l'ensemble complet des données.

CII BIONIC EAR

L'implant cochléaire CII Bionic Ear est à la base de la technologie avancée que l'on retrouve aujourd'hui dans les implants Advanced Bionics. La plateforme peut encore tirer parti des dernières innovations actuelles. Elle a bénéficié des améliorations techniques apportées aux implants C1.2 précédents.

Nombre d'implants CII enregistrés


À compter du 1er avril 2025.
Dernière année de distribution : 2004.^a

STANDARD	ADULTES	ENFANTS	COMBINÉ
ISO 5841-2:2014	3017	2094	5111 ^b
ANSI/AAMI C186	3393 ^c	1718	5111

- a. Les dates indiquées correspondent aux principaux marchés couverts par les réglementations de la FDA et du TÜV. Certains implants peuvent être en attente d'autorisation dans certaines autres régions.
- b. Le nombre combiné comprend également tous les utilisateurs enregistrés pour lesquels nous ne disposons pas d'informations sur leur date de naissance.
- c. Le nombre d'adultes comprend également les utilisateurs dont les informations personnelles ne sont pas disponibles ou ne peuvent être obtenues en raison de certaines lois sur la protection de la vie privée en vigueur dans certains pays.



ISO 5841-2:2014

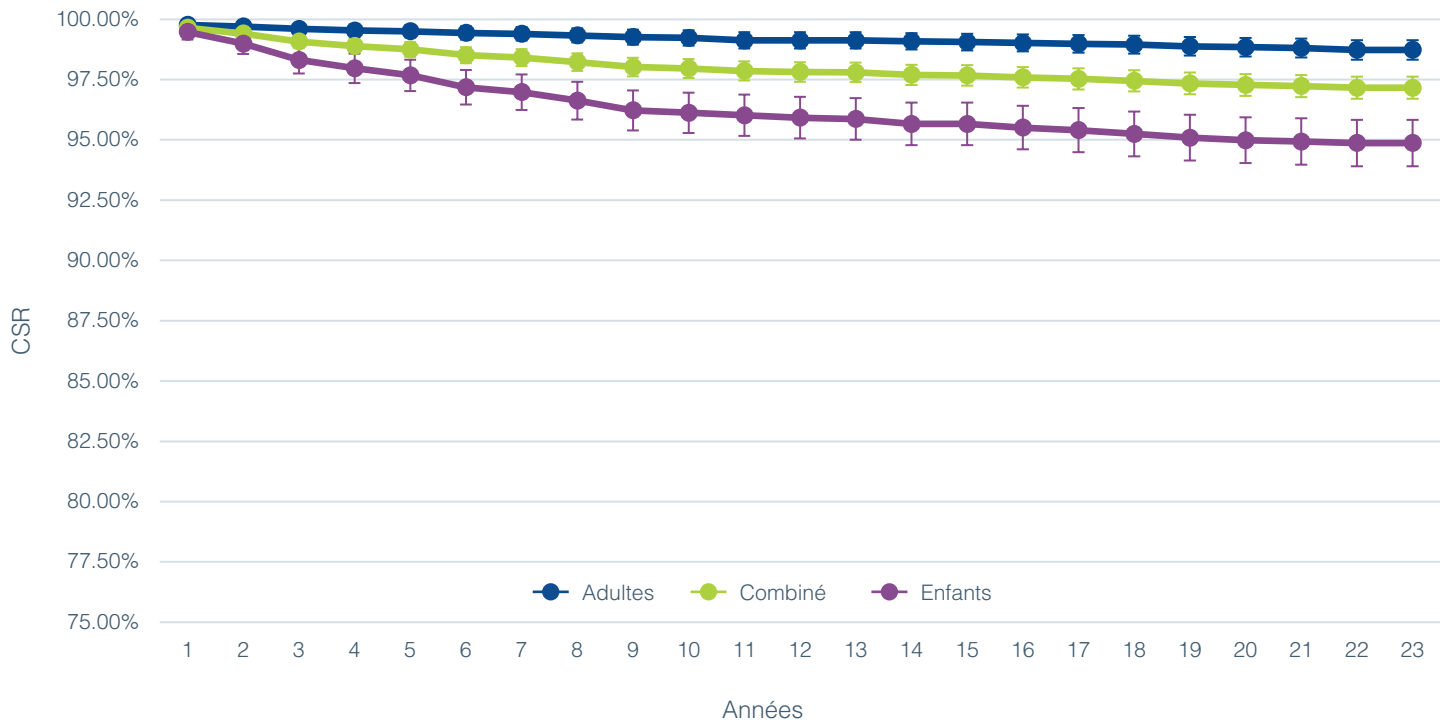


TAUX DE SURVIE CUMULÉ (CSR)

Nombre d'années	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ADULTES	99.77%	99.70%	99.60%	99.53%	99.50%	99.43%	99.40%	99.33%	99.26%	99.22%	99.12%	99.12%
COMBINÉ	99.65%	99.41%	99.07%	98.89%	98.75%	98.51%	98.41%	98.23%	98.02%	97.96%	97.86%	97.82%
ENFANTS	99.47%	98.99%	98.31%	97.97%	97.67%	97.18%	96.98%	96.63%	96.22%	96.12%	96.02%	95.92%


Nombre d'années	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ADULTES	99.12%	99.09%	99.05%	99.02%	98.98%	98.95%	98.88%	98.84%	98.81%	98.73%	98.73%
COMBINÉ	97.80%	97.69%	97.67%	97.59%	97.53%	97.44%	97.34%	97.28%	97.23%	97.16%	97.16%
ENFANTS	95.87%	95.66%	95.66%	95.51%	95.40%	95.25%	95.09%	94.99%	94.93%	94.87%	94.87%

ANSI/AAMI CI86


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ADULTES

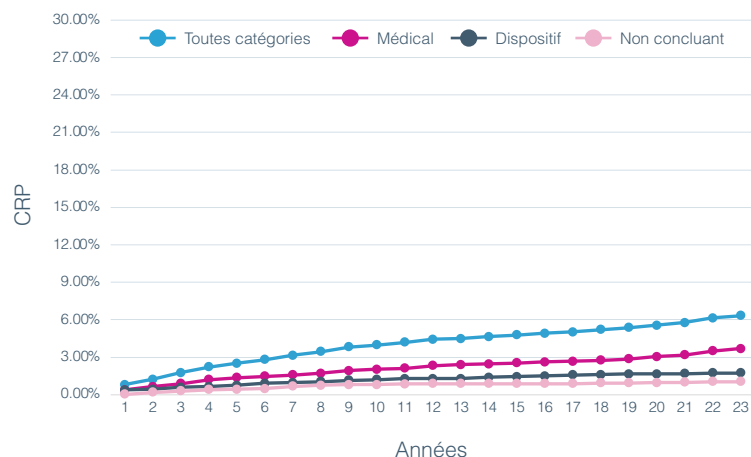


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT POUR TOUTES LES
CATÉGORIES D'ANALYSE ET DE PATIENTS

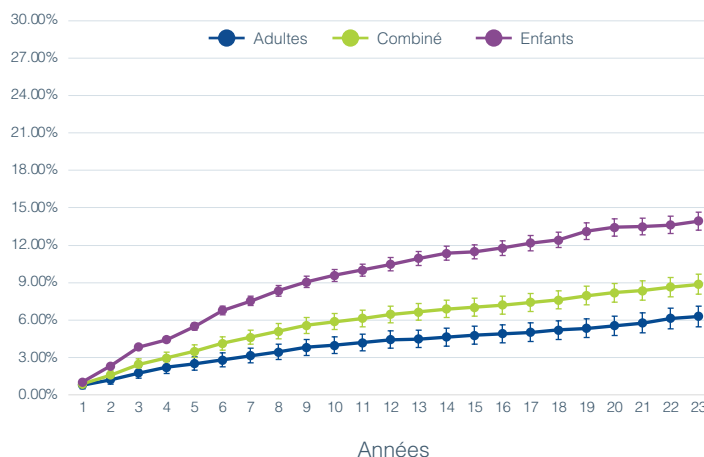

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ENFANTS

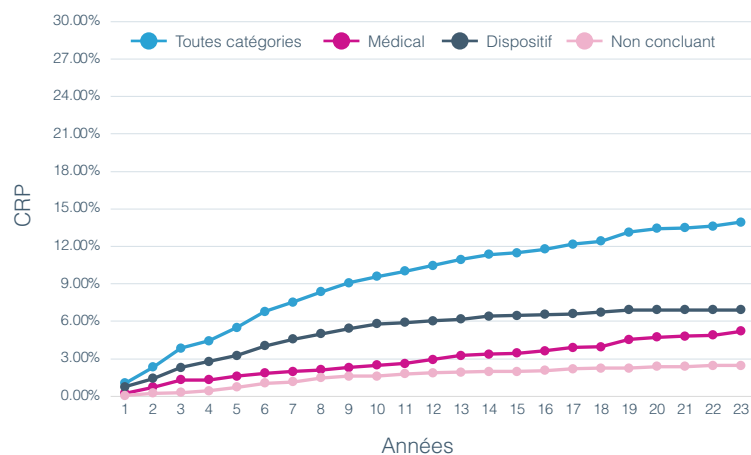

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT CATÉGORIES
POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS

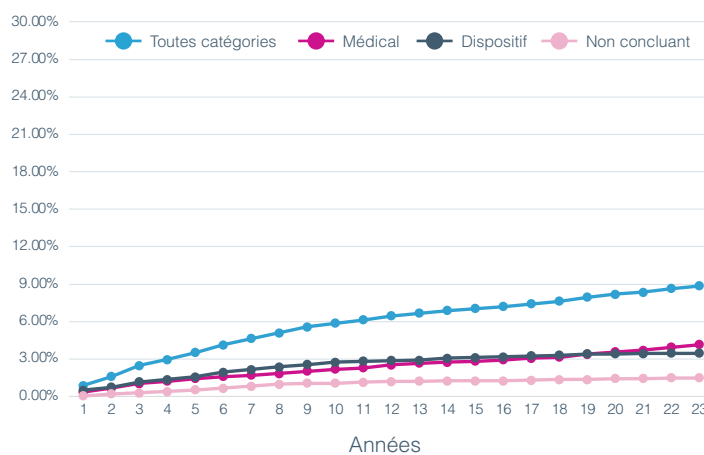

ADULTES ET ENFANTS COMBINÉS

Année	CRP médical	CRP dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total IC supérieur	Total IC inférieur
1	0.33%	0.51%	0.04%	0.88%	1.14%	0.62%
2	0.67%	0.75%	0.20%	1.61%	1.95%	1.26%
3	1.03%	1.16%	0.30%	2.47%	2.89%	2.04%
4	1.23%	1.36%	0.40%	2.96%	3.42%	2.49%
5	1.45%	1.58%	0.52%	3.51%	4.01%	3.00%
6	1.59%	1.94%	0.66%	4.14%	4.68%	3.59%
7	1.71%	2.16%	0.82%	4.63%	5.21%	4.05%
8	1.83%	2.37%	0.99%	5.10%	5.71%	4.50%
9	2.03%	2.57%	1.07%	5.57%	6.20%	4.94%
10	2.18%	2.73%	1.07%	5.87%	6.52%	5.22%
11	2.28%	2.83%	1.15%	6.15%	6.80%	5.49%
12	2.53%	2.88%	1.20%	6.46%	7.14%	5.79%
13	2.67%	2.92%	1.22%	6.66%	7.34%	5.97%
14	2.75%	3.06%	1.24%	6.89%	7.59%	6.20%
15	2.83%	3.12%	1.24%	7.03%	7.73%	6.33%
16	2.94%	3.18%	1.26%	7.21%	7.92%	6.50%
17	3.06%	3.25%	1.30%	7.43%	8.15%	6.71%
18	3.14%	3.31%	1.36%	7.63%	8.35%	6.90%
19	3.39%	3.41%	1.36%	7.96%	8.71%	7.22%
20	3.58%	3.41%	1.43%	8.20%	8.95%	7.45%
21	3.71%	3.43%	1.45%	8.36%	9.12%	7.60%
22	3.94%	3.46%	1.50%	8.65%	9.43%	7.88%
23	4.17%	3.46%	1.50%	8.87%	9.66%	8.08%

Toutes les données ne peuvent pas être affichées à côté des graphiques en raison de contraintes d'espace.
Veuillez consulter l'annexe à la fin du rapport pour obtenir l'ensemble complet des données.

CLARION 1.2

L'implant Clarion 1.2 (C1.2) présente des améliorations sur le plan technique par rapport à son prédécesseur, l'implant C1.0, qui a été le premier à intégrer des sources de courant indépendantes, une technologie qui fait la différence pour les implants Advanced Bionics.




Nombre d'implants C1.2 enregistrés

À compter du 1er avril 2025.
Dernière année de distribution : 2004.^a

STANDARD	ADULTES	ENFANTS	COMBINÉ
ISO 5841-2:2014	4355	4158	8513 ^b
ANSI/AAMI CI86	4989 ^c	3524	8513

- a. Les dates indiquées correspondent aux principaux marchés couverts par les réglementations de la FDA et du TÜV. Certains implants peuvent être en attente d'autorisation dans certaines autres régions.
- b. Le nombre combiné comprend également tous les utilisateurs enregistrés pour lesquels nous ne disposons pas d'informations sur leur date de naissance.
- c. Le nombre d'adultes comprend également les utilisateurs dont les informations personnelles ne sont pas disponibles ou ne peuvent être obtenues en raison de certaines lois sur la protection de la vie privée en vigueur dans certains pays.

ISO 5841-2:2014

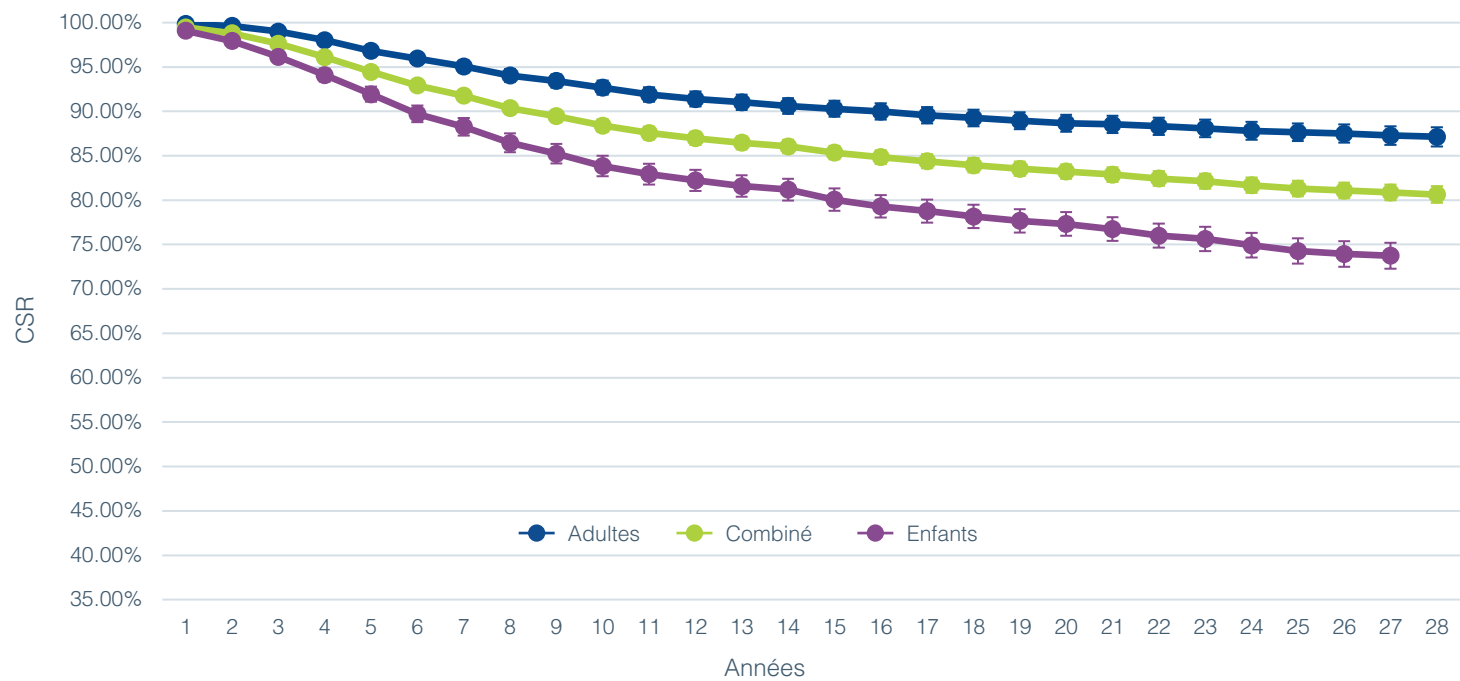

TAUX DE SURVIE CUMULÉ (CSR)


Nombre d'années	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ADULTES	99.84%	99.63%	99.00%	98.02%	96.82%	95.94%	95.06%	94.04%	93.42%	92.67%	91.90%	91.39%	91.02%	90.60%
COMBINÉ	99.47%	98.80%	97.62%	96.11%	94.44%	92.92%	91.76%	90.37%	89.46%	88.40%	87.56%	86.97%	86.47%	86.05%
ENFANTS	99.08%	97.93%	96.15%	94.09%	91.94%	89.71%	88.26%	86.46%	85.23%	83.84%	82.93%	82.24%	81.59%	81.18%

Nombre d'années	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
ADULTES	90.28%	89.99%	89.57%	89.27%	88.94%	88.66%	88.53%	88.33%	88.09%	87.81%	87.65%	87.50%	87.27%	87.13%
COMBINÉ	85.36%	84.85%	84.37%	83.93%	83.53%	83.22%	82.88%	82.43%	82.14%	81.68%	81.30%	81.09%	80.87%	80.63%
ENFANTS	80.05%	79.30%	78.77%	78.17%	77.67%	77.32%	76.74%	76.00%	75.64%	74.92%	74.27%	73.95%	73.75%	N/A*


*La taille de l'échantillon n'est pas suffisante pour établir un rapport.

ANSI/AAMI CI86


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ADULTES

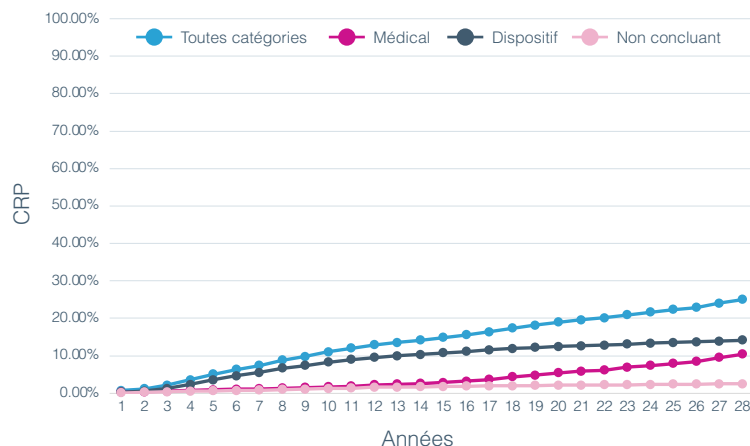


ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT POUR TOUTES LES
CATÉGORIES D'ANALYSE ET DE PATIENTS

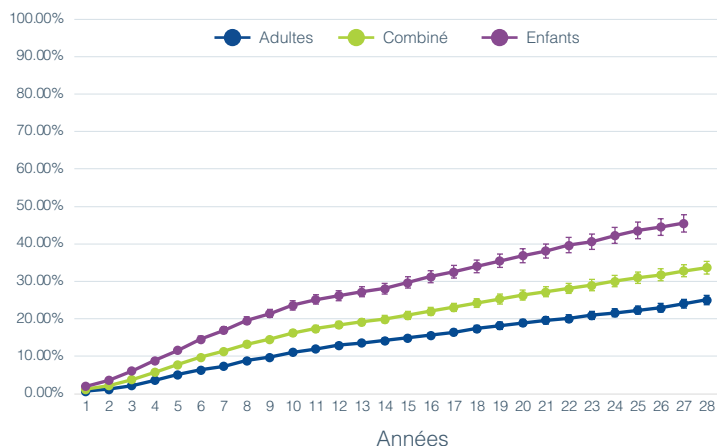

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT
CATÉGORIES POUR LES ENFANTS

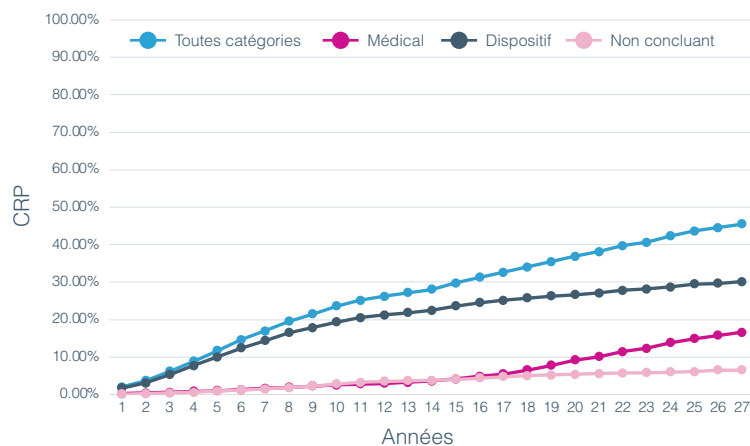

ANALYSE DES TAUX DE RETRAIT CATÉGORIES
POUR LES ADULTES ET LES ENFANTS

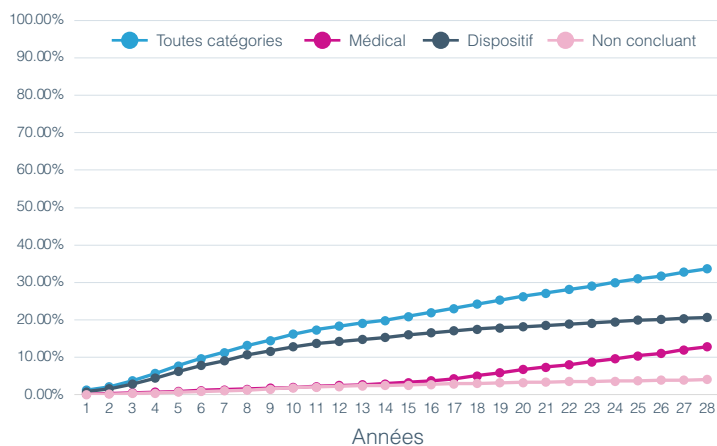

ADULTES ET ENFANTS COMBINÉS

Année	CRP médical	CRP dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total IC supérieur	Total IC inférieur
1	0.26%	0.86%	0.13%	1.25%	1.48%	1.01%
2	0.38%	1.62%	0.23%	2.22%	2.53%	1.90%
3	0.55%	2.91%	0.37%	3.80%	4.21%	3.39%
4	0.79%	4.53%	0.52%	5.77%	6.27%	5.27%
5	0.94%	6.23%	0.76%	7.81%	8.38%	7.24%
6	1.16%	7.84%	0.93%	9.75%	10.38%	9.12%
7	1.34%	9.13%	1.09%	11.32%	12.00%	10.64%
8	1.57%	10.70%	1.30%	13.24%	13.96%	12.52%
9	1.79%	11.66%	1.55%	14.58%	15.33%	13.82%
10	2.03%	12.85%	1.88%	16.23%	17.01%	15.44%
11	2.23%	13.73%	2.08%	17.41%	18.22%	16.60%
12	2.50%	14.31%	2.31%	18.38%	19.21%	17.55%
13	2.72%	14.84%	2.42%	19.16%	20.00%	18.32%
14	2.95%	15.32%	2.52%	19.89%	20.75%	19.04%
15	3.32%	16.03%	2.66%	20.98%	21.85%	20.10%
16	3.82%	16.59%	2.82%	22.04%	22.92%	21.15%
17	4.30%	17.10%	3.02%	23.06%	23.96%	22.16%
18	5.16%	17.56%	3.09%	24.23%	25.15%	23.31%
19	5.90%	17.96%	3.22%	25.28%	26.22%	24.35%
20	6.79%	18.24%	3.33%	26.33%	27.27%	25.38%
21	7.45%	18.52%	3.44%	27.19%	28.15%	26.24%
22	8.08%	18.91%	3.57%	28.13%	29.09%	27.16%
23	8.88%	19.20%	3.59%	29.02%	29.99%	28.04%
24	9.69%	19.57%	3.70%	30.04%	31.03%	29.06%
25	10.42%	19.97%	3.77%	31.01%	32.01%	30.01%
26	11.05%	20.13%	3.93%	31.74%	32.76%	30.72%
27	12.05%	20.43%	3.98%	32.80%	33.88%	31.72%
28	12.82%	20.66%	4.17%	33.72%	34.88%	32.55%

Toutes les données ne peuvent pas être affichées à côté des graphiques en raison de contraintes d'espace.
Veuillez consulter l'annexe à la fin du rapport pour obtenir l'ensemble complet des données.

CLARION 1.0

L'implant Clarion 1.0 (C1.0) a été le premier dispositif d'Advanced Bionics, marquant le début d'une lignée technologique avancée qui se poursuit encore aujourd'hui. Le nombre d'enfants implantés avec le C1.0 étant inférieur au niveau requis pour une analyse statistique, les données sont incluses dans les données combinées.

Nombre d'implants C1.0 enregistrés


À compter du 1er avril 2025.
Dernière année de distribution : 1997.^a

STANDARD	ADULTES	ENFANTS	COMBINÉ
ISO 5841-2:2014	294 ^c	50	344 ^b
ANSI/AAMI C186	—	—	—

- a. Les dates indiquées correspondent aux principaux marchés couverts par les réglementations de la FDA et du TÜV. Certains implants peuvent être en attente d'autorisation dans certaines autres régions.
- b. Le nombre combiné comprend également tous les utilisateurs enregistrés pour lesquels nous ne disposons pas d'informations sur leur date de naissance.
- c. Le nombre d'adultes comprend également les utilisateurs dont les informations personnelles ne sont pas disponibles ou ne peuvent être obtenues en raison de certaines lois sur la protection de la vie privée en vigueur dans certains pays.



ISO 5841-2:2014

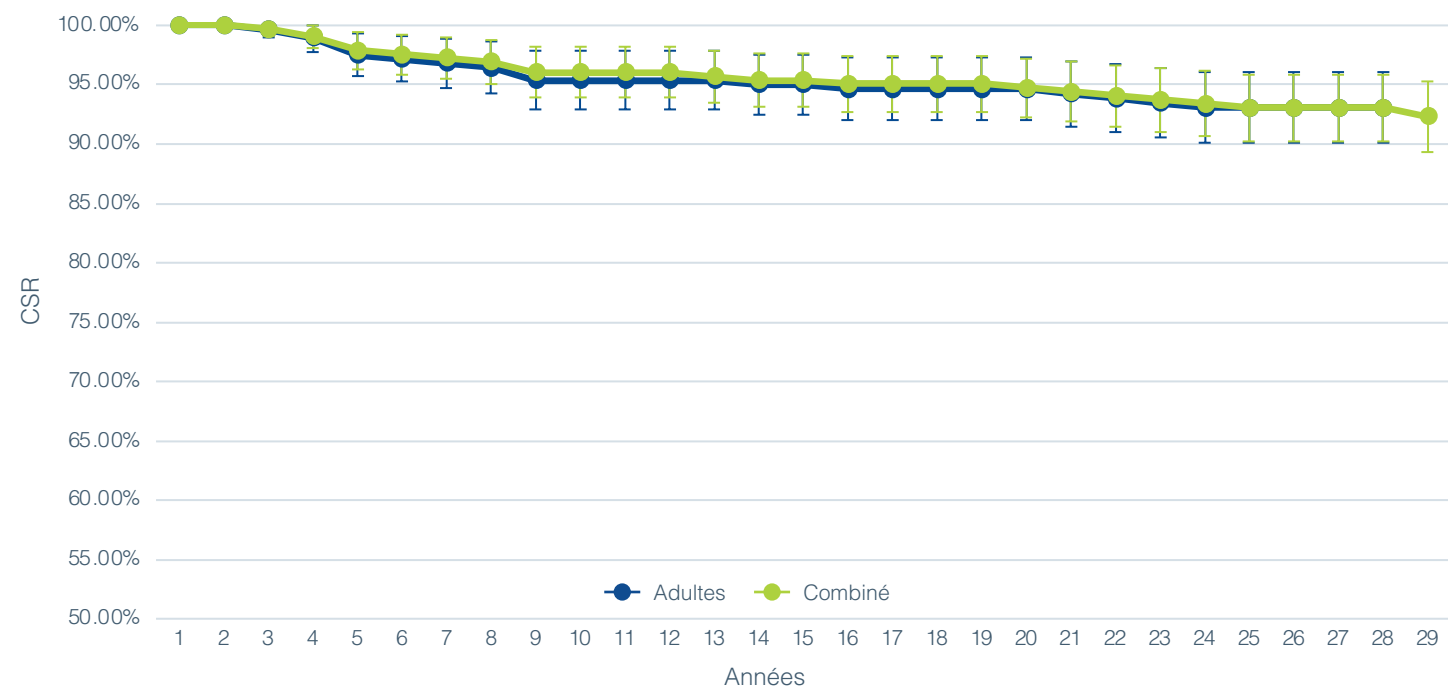

TAUX DE SURVIE CUMULÉ (CSR)

Years in use	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ADULTS	100.00%	100.00%	99.65%	98.94%	97.52%	97.16%	96.81%	96.45%	95.37%	95.37%	95.37%	95.37%	95.37%	95.00%	95.00%
COMBINED	100.00%	100.00%	99.70%	99.09%	97.87%	97.56%	97.25%	96.94%	96.02%	96.02%	96.02%	96.02%	95.70%	95.38%	95.38%

Years in use	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ADULTS	94.63%	94.63%	94.63%	94.63%	94.63%	94.24%	93.86%	93.47%	93.08%	93.08%	93.08%	93.08%	93.08%	N/A
COMBINED	95.05%	95.05%	95.05%	95.05%	94.72%	94.39%	94.06%	93.72%	93.38%	93.04%	93.04%	93.04%	93.04%	92.31%

*La taille de l'échantillon n'est pas suffisante pour établir un rapport.

ANSI/AAMI CI86

La norme ANSI/AAMI CI86 n'exige pas la déclaration des dispositifs datant de plus de 20 ans après la dernière implantation de ce type de dispositif. Veuillez vous reporter aux données ISO pour plus d'informations.

PROCESSEUR DE SON

Pour chaque processeur de son actuellement disponible, il existe une mesure simple de la fiabilité basée sur le taux de retour annuel moyen mondial et des données graphiques conformes à la norme ANSI/AAMI CI86 qui indiquent le taux de défaillance mensuel.


Dans la mesure du possible, ces données mensuelles sont ensuite classées par type de défaillance, si celui-ci est connu, notamment pour des raisons mécaniques, électroniques, liées à l'humidité ou autres. Les processeurs qui répondent à toutes les spécifications sont inclus et classés comme « sans défaut ». Lorsque ces informations sont disponibles, le nombre d'utilisateurs enregistrés est indiqué, classé par catégorie : adultes, enfants et tous âges confondus.



NAÍDA CI MARVEL ET SKY CI MARVEL

Tes processeurs Naída™ CI M pour adultes et Sky CI™ M pour enfants sont les tout derniers produits Advanced Bionics intégrant les dernières avancées de Phonak, la plateforme Marvel. Grâce à leurs solutions de connectivité intégrées et à leur capacité à détecter et à s'adapter automatiquement à chaque situation, les processeurs Naída CI M et Sky CI M sont conçus pour vous offrir la meilleure expérience auditive possible.

FIABILITÉ : 99.52%^a

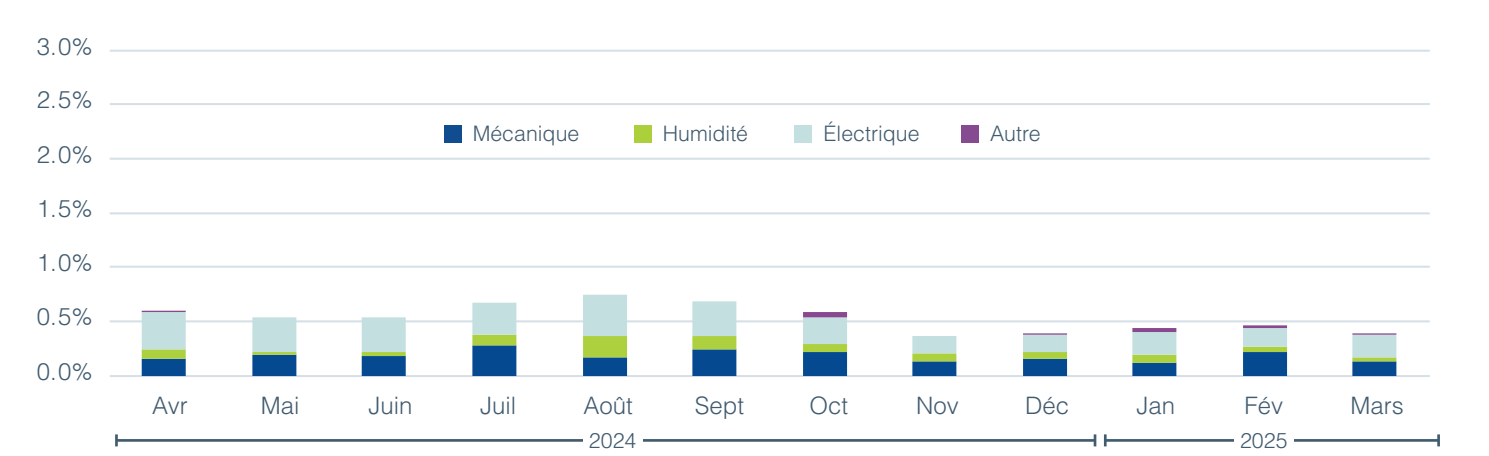

TAUX DE RETOUR DES COMPOSANTS DÉFECTUEUX^b

Cause	Avr 2024	Mai 2024	Juin 2024	Juil 2024	Août 2024	Sept 2024	Oct 2024	Nov 2024	Déc 2024	Janv 2025	Fév 2025	Mars 2025
MÉCANIQUE	0.16%	0.20%	0.18%	0.28%	0.17%	0.24%	0.21%	0.14%	0.16%	0.12%	0.22%	0.13%
HUMIDITÉ	0.08%	0.02%	0.04%	0.09%	0.20%	0.13%	0.08%	0.06%	0.07%	0.08%	0.05%	0.03%
ÉLECTRIQUE	0.34%	0.32%	0.32%	0.30%	0.38%	0.32%	0.25%	0.17%	0.16%	0.21%	0.18%	0.21%
AUTRE	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.01%	0.03%	0.02%	0.01%

a. La fiabilité correspond à 1 moins le taux de retour. Le taux de retour correspond au taux de retour mensuel moyen mondial entre avril 2024 et mars 2025.

b. Le nombre par mois représente l'unité qui a effectué l'analyse des défaillances au cours de ce mois.


MARVEL CI



SÉRIES NAÍDA CI Q

Les processeurs de son Naída™ CI Q sont dotés de technologies de pointe exclusivement disponibles chez Advanced Bionics et Phonak pour offrir la meilleure expérience auditive possible.

FIABILITÉ : 99.97%^a

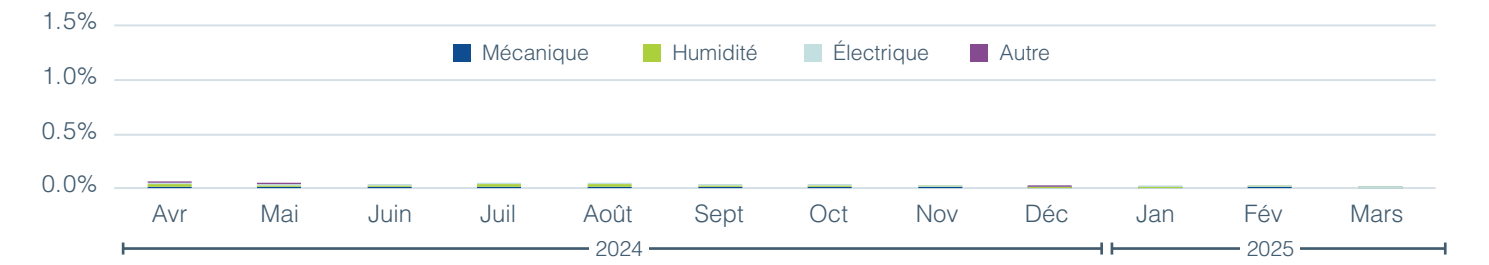

TAUX DE RETOUR DES COMPOSANTS DÉFECTUEUX^b

Cause	Avr 2024	Mai 2024	Juin 2024	Juil 2024	Août 2024	Sept 2024	Oct 2024	Nov 2024	Déc 2024	Janv 2025	Fév 2025	Mars 2025
MÉCANIQUE	0.02%	0.01%	0.02%	0.01%	0.02%	0.01%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
HUMIDITÉ	0.02%	0.01%	0.01%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ÉLECTRIQUE	0.01%	0.01%	0.00%	0.02%	0.01%	0.01%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AUTRE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

CHORUS

Le processeur de son Chorus™ est compatible avec les implants cochléaires C1.0 et C1.2, et bénéficie de la technologie Roger™ intégrée pour une connectivité et des performances optimisées.

FIABILITÉ : 99.82%^a

Le nombre de produits retournés est trop faible pour établir un rapport sur les taux de retour des composants défectueux.




a. La fiabilité correspond à 1 moins le taux de retour. Le taux de retour correspond au taux de retour mensuel moyen mondial entre avril 2024 et mars 2025.
b. Le nombre par mois représente l'unité qui a effectué l'analyse des défaillances au cours de ce mois.

NEPTUNE

Le processeur de son Neptune™ est le premier et le seul processeur de son étanche sans accessoire complémentaire.

FIABILITÉ : 99.99%^a

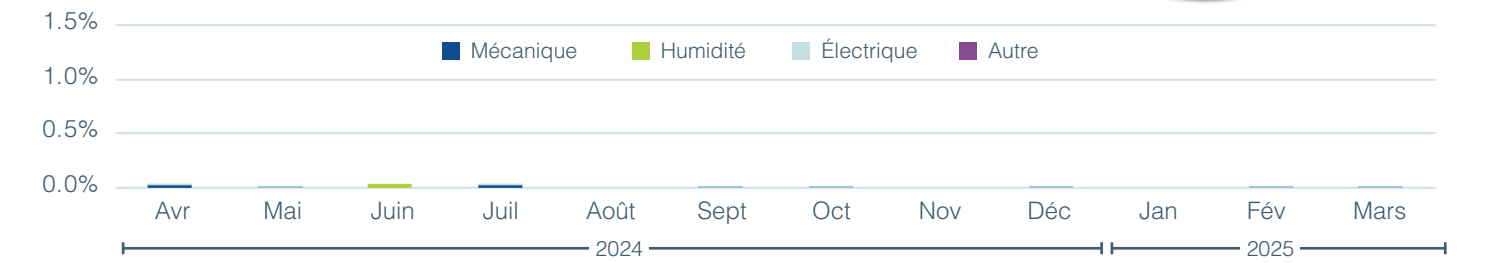

TAUX DE RETOUR DES COMPOSANTS DÉFECTUEUX^b

Cause	Avr 2024	Mai 2024	Juin 2024	Juil 2024	Août 2024	Sept 2024	Oct 2024	Nov 2024	Déc 2024	Janv 2025	Fév 2025	Mars 2025
MÉCANIQUE	0.03%	0.01%	0.00%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
HUMIDITÉ	0.00%	0.00%	0.04%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%
ÉLECTRIQUE	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%
AUTRE	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

a. La fiabilité correspond à 1 moins le taux de retour. Le taux de retour correspond au taux de retour mensuel moyen mondial entre avril 2024 et mars 2025.

b. Le nombre par mois représente l'unité qui a effectué l'analyse des défaillances au cours de ce mois.

HIRES ULTRA 3D V2

	Année	CRP Médical	CRP Dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total	
						IC supérieur	IC inférieur
ADULTES	1	0.45%	0.00%	0.00%	0.46%	0.53%	0.38%
	1.5	0.75%	0.01%	0.00%	0.76%	0.87%	0.66%
	2	0.94%	0.02%	0.01%	0.96%	1.08%	0.84%
	2.5	1.16%	0.03%	0.01%	1.20%	1.34%	1.06%
	3	1.29%	0.03%	0.01%	1.32%	1.48%	1.17%
	3.5	1.38%	0.03%	0.02%	1.42%	1.59%	1.26%
	4	1.48%	0.03%	0.02%	1.53%	1.70%	1.35%
	4.5	1.60%	0.03%	0.02%	1.65%	1.85%	1.45%
	5	1.68%	0.03%	0.02%	1.72%	1.95%	1.49%
ENFANTS	1	0.57%	0.06%	0.00%	0.64%	0.83%	0.45%
	1.5	0.67%	0.12%	0.00%	0.78%	1.00%	0.57%
	2	0.79%	0.14%	0.00%	0.93%	1.18%	0.69%
	2.5	0.92%	0.27%	0.00%	1.19%	1.48%	0.90%
	3	0.92%	0.31%	0.00%	1.23%	1.52%	0.93%
	3.5	1.06%	0.39%	0.05%	1.50%	1.86%	1.13%
	4	1.28%	0.39%	0.05%	1.72%	2.14%	1.29%
	4.5	1.42%	0.49%	0.05%	1.94%	2.47%	1.41%
	5 ^a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

HIRES ULTRA V2

	Année	CRP Médical	CRP Dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total	
						IC supérieur	IC inférieur
ADULTES	1	0.36%	0.00%	0.00%	0.36%	0.52%	0.21%
	1.5	0.43%	0.00%	0.00%	0.43%	0.61%	0.26%
	2	0.46%	0.00%	0.00%	0.46%	0.64%	0.28%
	2.5	0.49%	0.00%	0.00%	0.49%	0.69%	0.30%
	3	0.58%	0.00%	0.00%	0.58%	0.81%	0.35%
	3.5	0.64%	0.00%	0.07%	0.71%	1.00%	0.42%
	4	0.64%	0.00%	0.07%	0.71%	1.00%	0.42%
	4.5 ^a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	5	0.30%	0.06%	0.00%	0.36%	0.50%	0.22%
ENFANTS	1.5	0.32%	0.08%	0.00%	0.40%	0.55%	0.25%
	2	0.34%	0.10%	0.00%	0.44%	0.60%	0.28%
	2.5	0.34%	0.10%	0.00%	0.44%	0.60%	0.28%
	3	0.41%	0.14%	0.00%	0.55%	0.75%	0.35%
	3.5	0.41%	0.14%	0.00%	0.55%	0.75%	0.35%
	4	0.41%	0.14%	0.00%	0.55%	0.75%	0.35%
	4.5 ^a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	5	0.30%	0.06%	0.00%	0.36%	0.50%	0.22%
	6	0.30%	0.06%	0.00%	0.36%	0.50%	0.22%

HIRES ULTRA 3D V1

	Année	CRP Médical	CRP Dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total	
						IC supérieur	IC inférieur
ADULTES	1	0.93%	0.15%	0.02%	1.11%	1.39%	0.82%
	1.5	1.39%	0.75%	0.10%	2.23%	2.63%	1.83%
	2	1.74%	2.48%	0.18%	4.35%	4.90%	3.80%
	2.5	2.12%	5.22%	0.22%	7.43%	8.14%	6.72%
	3	2.43%	8.49%	0.24%	10.93%	11.78%	10.08%
	3.5	2.69%	12.69%	0.30%	15.30%	16.28%	14.32%
	4	2.90%	16.36%	0.35%	19.07%	20.14%	18.00%
	4.5	3.06%	19.81%	0.38%	22.56%	23.70%	21.42%
	5	3.29%	22.58%	0.40%	25.42%	26.61%	24.23%
	5.5	3.38%	25.04%	0.40%	27.86%	29.09%	26.63%
ENFANTS	6	3.60%	26.67%	0.40%	29.60%	30.90%	28.29%
	1	1.11%	0.49%	0.00%	1.59%	2.23%	0.94%
	1.5	1.60%	2.17%	0.00%	3.73%	4.71%	2.75%
	2	2.04%	7.68%	0.15%	9.69%	11.22%	8.17%
	2.5	2.75%	13.27%	0.15%	15.78%	17.67%	13.90%
	3	3.93%	19.77%	0.15%	23.04%	25.22%	20.86%
	3.5	4.12%	25.53%	0.25%	28.78%	31.13%	26.43%
	4	4.62%	32.09%	0.25%	35.39%	37.88%	30.18%
	4.5	5.83%	37.68%	0.25%	41.45%	44.02%	32.90%
	5	6.07%	41.74%	0.25%	45.41%	48.01%	42.81%
	5.5	6.46%	44.50%	0.25%	48.22%	50.84%	45.59%
	6 ^a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

HIRES ULTRA V1

	Année	CRP Médical	CRP Dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total IC supérieur	IC inférieur
ADULTES	1	0.78%	0.02%	0.02%	0.83%	1.02%	0.64%
	1.5	1.04%	0.09%	0.02%	1.16%	1.38%	0.93%
	2	1.31%	0.44%	0.05%	1.79%	2.07%	1.51%
	2.5	1.59%	1.41%	0.08%	3.06%	3.43%	2.70%
	3	1.76%	3.27%	0.11%	5.07%	5.54%	4.61%
	3.5	1.91%	6.05%	0.15%	7.97%	8.55%	7.40%
	4	2.00%	9.25%	0.16%	11.20%	11.87%	10.53%
	4.5	2.08%	12.57%	0.19%	14.54%	15.29%	13.79%
	5	2.19%	16.12%	0.20%	18.12%	18.94%	17.30%
	5.5	2.29%	19.48%	0.23%	21.51%	22.39%	20.63%
	6	2.43%	21.97%	0.25%	24.06%	24.98%	23.14%
	6.5	2.55%	24.45%	0.25%	26.56%	27.53%	25.59%
	7	2.72%	25.98%	0.27%	28.19%	29.19%	27.18%
	7.5	2.80%	27.48%	0.27%	29.71%	30.78%	28.63%
	8	2.80%	28.24%	0.27%	30.44%	30.78%	28.63%
ENFANTS	1	0.55%	0.13%	0.00%	0.68%	0.93%	0.42%
	1.5	0.70%	0.48%	0.02%	1.21%	1.55%	0.87%
	2	0.81%	1.29%	0.05%	2.14%	2.59%	1.69%
	2.5	0.96%	3.05%	0.08%	4.05%	4.67%	3.44%
	3	1.07%	6.44%	0.10%	7.54%	8.36%	6.72%
	3.5	1.24%	10.97%	0.13%	12.19%	13.21%	11.17%
	4	1.62%	16.56%	0.13%	18.01%	19.21%	16.82%
	4.5	1.77%	21.53%	0.20%	23.07%	24.38%	21.76%
	5	1.94%	25.59%	0.23%	27.21%	28.60%	25.82%
	5.5	2.17%	30.03%	0.23%	31.70%	33.17%	30.23%
	6	2.26%	32.91%	0.28%	34.62%	36.15%	33.08%
	6.5	2.41%	35.22%	0.28%	36.96%	38.57%	35.35%
	7	2.41%	38.10%	0.28%	39.76%	41.50%	38.01%
	7.5	2.41%	39.77%	0.28%	41.39%	43.27%	39.51%
	8 ^a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

HIRES 90K ADVANTAGE

	Année	CRP Médical	CRP Dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total IC supérieur	IC inférieur
ADULTES	1	0.64%	0.06%	0.01%	0.72%	0.83%	0.60%
	2	1.09%	0.08%	0.02%	1.19%	1.34%	1.05%
	3	1.35%	0.13%	0.03%	1.51%	1.68%	1.35%
	4	1.62%	0.17%	0.03%	1.82%	2.01%	1.64%
	5	1.85%	0.19%	0.04%	2.07%	2.27%	1.88%
	6	1.98%	0.23%	0.04%	2.25%	2.45%	2.05%
	7	2.12%	0.23%	0.06%	2.40%	2.61%	2.19%
	8	2.27%	0.27%	0.06%	2.59%	2.82%	2.37%
	9	2.39%	0.33%	0.07%	2.78%	3.01%	2.54%
	10	2.50%	0.33%	0.09%	2.90%	3.15%	2.66%
	11	2.71%	0.36%	0.09%	3.15%	3.42%	2.87%
	12	2.75%	0.36%	0.09%	3.19%	3.48%	2.90%
ENFANTS	1	0.73%	0.19%	0.02%	0.93%	1.06%	0.81%
	2	1.04%	0.35%	0.04%	1.43%	1.58%	1.27%
	3	1.27%	0.54%	0.04%	1.85%	2.03%	1.67%
	4	1.49%	0.70%	0.07%	2.25%	2.44%	2.05%
	5	1.61%	0.83%	0.11%	2.54%	2.75%	2.33%
	6	1.75%	0.95%	0.11%	2.79%	3.01%	2.57%
	7	1.84%	1.05%	0.12%	2.99%	3.23%	2.76%
	8	1.97%	1.17%	0.13%	3.24%	3.49%	2.99%
	9	2.03%	1.26%	0.17%	3.42%	3.68%	3.15%
	10	2.14%	1.35%	0.17%	3.62%	3.91%	3.34%
	11	2.22%	1.35%	0.19%	3.73%	4.04%	3.43%
	12 ^a	2.52%	1.35%	0.19%	4.02%	4.44%	3.61%

HIRES 90K vendor A post-mod

	Année	CRP Médical	CRP Dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total	
						IC supérieur	IC inférieur
ADULTES	1	0.77%	0.07%	0.01%	0.85%	0.94%	0.76%
	2	1.27%	0.11%	0.04%	1.42%	1.54%	1.31%
	3	1.58%	0.16%	0.06%	1.80%	1.93%	1.67%
	4	1.85%	0.24%	0.08%	2.15%	2.30%	2.01%
	5	2.07%	0.27%	0.09%	2.43%	2.58%	2.28%
	6	2.23%	0.33%	0.10%	2.65%	2.81%	2.50%
	7	2.37%	0.35%	0.11%	2.82%	2.98%	2.66%
	8	2.52%	0.42%	0.12%	3.04%	3.21%	2.87%
	9	2.63%	0.47%	0.12%	3.21%	3.38%	3.03%
	10	2.74%	0.51%	0.14%	3.37%	3.55%	3.19%
	11	2.87%	0.54%	0.14%	3.54%	3.72%	3.35%
	12	2.97%	0.55%	0.15%	3.65%	3.84%	3.46%
	13	3.12%	0.58%	0.16%	3.84%	4.04%	3.63%
	14	3.25%	0.60%	0.17%	3.99%	4.20%	3.78%
	15	3.44%	0.61%	0.17%	4.19%	4.42%	3.97%
	16	3.54%	0.65%	0.17%	4.33%	4.57%	4.10%
	17	3.64%	0.72%	0.17%	4.51%	4.76%	4.26%
	18	3.85%	0.79%	0.17%	4.77%	5.06%	4.48%
	19	3.85%	0.84%	0.22%	4.87%	5.18%	4.55%
ENFANTS	1	0.79%	0.19%	0.03%	1.01%	1.10%	0.91%
	2	1.11%	0.45%	0.04%	1.60%	1.72%	1.47%
	3	1.36%	0.72%	0.06%	2.12%	2.26%	1.98%
	4	1.56%	0.96%	0.08%	2.59%	2.74%	2.43%
	5	1.73%	1.17%	0.11%	2.98%	3.15%	2.82%
	6	1.85%	1.33%	0.12%	3.27%	3.44%	3.10%
	7	1.96%	1.45%	0.13%	3.51%	3.69%	3.33%
	8	2.04%	1.60%	0.16%	3.76%	3.95%	3.57%
	9	2.13%	1.69%	0.18%	3.96%	4.15%	3.77%
	10	2.29%	1.83%	0.21%	4.27%	4.48%	4.07%
	11	2.39%	1.84%	0.22%	4.41%	4.62%	4.19%
	12	2.55%	1.90%	0.25%	4.65%	4.87%	4.42%
	13	2.73%	1.93%	0.25%	4.85%	5.08%	4.61%
	14	2.84%	1.99%	0.27%	5.03%	5.28%	4.78%
	15	2.95%	2.05%	0.32%	5.25%	5.52%	4.98%
	16	3.08%	2.15%	0.36%	5.50%	5.79%	5.21%
	17	3.17%	2.21%	0.36%	5.65%	5.96%	5.33%
	18	3.38%	2.25%	0.43%	5.96%	6.33%	5.59%
	19	3.38%	2.25%	0.51%	6.04%	6.45%	5.64%

HIRES 90K vendor A all

	Année	CRP Médical	CRP Dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total	
						IC supérieur	IC inférieur
ADULTES	1	0.76%	0.08%	0.01%	0.86%	0.95%	0.77%
	2	1.26%	0.14%	0.05%	1.45%	1.56%	1.33%
	3	1.57%	0.20%	0.08%	1.84%	1.97%	1.71%
	4	1.84%	0.30%	0.09%	2.23%	2.37%	2.08%
	5	2.06%	0.36%	0.11%	2.51%	2.66%	2.36%
	6	2.21%	0.43%	0.12%	2.75%	2.91%	2.60%
	7	2.36%	0.46%	0.14%	2.94%	3.10%	2.78%
	8	2.51%	0.55%	0.14%	3.18%	3.35%	3.01%
	9	2.62%	0.63%	0.15%	3.37%	3.55%	3.20%
	10	2.72%	0.68%	0.17%	3.55%	3.73%	3.37%
	11	2.86%	0.74%	0.17%	3.74%	3.93%	3.55%
	12	2.97%	0.78%	0.17%	3.89%	4.09%	3.70%
	13	3.11%	0.83%	0.19%	4.10%	4.30%	3.89%
	14	3.26%	0.89%	0.20%	4.31%	4.53%	4.10%
	15	3.43%	0.92%	0.20%	4.52%	4.75%	4.29%
	16	3.54%	0.97%	0.20%	4.67%	4.91%	4.43%
	17	3.65%	1.08%	0.22%	4.89%	5.15%	4.64%
	18	3.82%	1.18%	0.22%	5.16%	5.44%	4.87%
	19	3.82%	1.23%	0.24%	5.24%	5.53%	4.94%
	20	3.92%	1.33%	0.24%	5.43%	5.78%	5.08%
	21	4.00%	1.42%	0.24%	5.60%	6.02%	5.18%
ENFANTS	1	0.80%	0.21%	0.03%	1.03%	1.12%	0.93%
	2	1.12%	0.47%	0.04%	1.62%	1.74%	1.50%
	3	1.37%	0.75%	0.06%	2.17%	2.31%	2.03%
	4	1.58%	1.01%	0.08%	2.65%	2.80%	2.50%
	5	1.74%	1.23%	0.12%	3.06%	3.23%	2.90%
	6	1.87%	1.40%	0.13%	3.37%	3.54%	3.19%
	7	1.98%	1.54%	0.14%	3.63%	3.81%	3.45%
	8	2.08%	1.71%	0.17%	3.92%	4.11%	3.73%
	9	2.17%	1.81%	0.19%	4.12%	4.32%	3.93%
	10	2.32%	1.96%	0.22%	4.45%	4.66%	4.24%
	11	2.44%	1.99%	0.24%	4.61%	4.83%	4.40%
	12	2.59%	2.10%	0.27%	4.89%	5.11%	4.66%
	13	2.76%	2.14%	0.27%	5.10%	5.34%	4.86%
	14	2.85%	2.27%	0.29%	5.33%	5.59%	5.08%
	15	2.98%	2.37%	0.34%	5.60%	5.87%	5.32%
	16	3.10%	2.52%	0.36%	5.89%	6.19%	5.59%
	17	3.17%	2.61%	0.36%	6.05%	6.37%	5.73%
	18	3.37%	2.70%	0.42%	6.38%	6.74%	6.01%
	19	3.53%	2.90%	0.48%	6.77%	7.23%	6.32%
	20	3.62%	3.10%	0.57%	7.14%	7.72%	6.56%
	21 ^a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

a. La taille de l'échantillon n'est pas suffisante pour établir un rapport.

HIRES 90K vendor A pre-mod

	Année	CRP Médical	CRP Dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total	
						IC supérieur	IC inférieur
ADULTES	1	0.60%	0.42%	0.00%	1.02%	1.51%	0.54%
	2	1.03%	0.85%	0.24%	2.11%	2.80%	1.42%
	3	1.33%	1.09%	0.49%	2.89%	3.70%	2.09%
	4	1.58%	1.89%	0.55%	3.98%	4.92%	3.04%
	5	1.70%	2.32%	0.62%	4.58%	5.59%	3.57%
	6	1.83%	2.76%	0.68%	5.18%	6.25%	4.12%
	7	2.14%	3.00%	0.74%	5.79%	6.91%	4.66%
	8	2.20%	3.56%	0.74%	6.39%	7.57%	5.21%
	9	2.27%	4.25%	0.74%	7.11%	8.35%	5.88%
	10	2.39%	4.62%	0.81%	7.66%	8.94%	6.38%
	11	2.52%	5.00%	0.81%	8.14%	9.46%	6.82%
	12	2.78%	5.44%	0.81%	8.81%	10.17%	7.44%
	13	2.84%	5.69%	0.87%	9.17%	10.56%	7.78%
	14	3.17%	6.13%	0.87%	9.90%	11.33%	8.46%
	15	3.23%	6.32%	0.87%	10.14%	11.59%	8.68%
	16	3.36%	6.44%	0.87%	10.38%	11.85%	8.91%
	17	3.50%	6.70%	0.94%	10.80%	12.30%	9.31%
	18	3.56%	6.89%	0.94%	11.05%	12.56%	9.54%
	19	3.56%	6.95%	0.94%	11.11%	12.62%	9.59%
	20	3.70%	7.08%	0.94%	11.35%	12.88%	9.83%
	21	3.79%	7.17%	0.94%	11.52%	13.07%	9.98%
ENFANTS	1	1.25%	0.79%	0.00%	2.03%	2.96%	1.10%
	2	1.47%	1.37%	0.12%	2.94%	4.05%	1.82%
	3	2.05%	2.18%	0.23%	4.41%	5.76%	3.06%
	4	2.40%	3.11%	0.23%	5.66%	7.18%	4.14%
	5	2.52%	3.93%	0.35%	6.68%	8.33%	5.03%
	6	2.64%	4.75%	0.48%	7.70%	9.46%	5.94%
	7	3.12%	5.57%	0.72%	9.18%	11.08%	7.27%
	8	3.73%	6.52%	0.72%	10.65%	12.69%	8.62%
	9	3.73%	6.87%	0.72%	10.99%	13.06%	8.93%
	10	3.85%	7.47%	0.85%	11.79%	13.92%	9.66%
	11	4.23%	7.83%	0.98%	12.59%	14.78%	10.40%
	12	4.23%	8.79%	0.98%	13.50%	15.75%	11.24%
	13	4.23%	9.15%	0.98%	13.84%	16.12%	11.56%
	14	4.23%	9.99%	0.98%	14.64%	16.97%	12.31%
	15	4.48%	10.47%	0.98%	15.32%	17.70%	12.95%
	16	4.48%	11.08%	0.98%	15.89%	18.31%	13.48%
	17	4.48%	11.32%	0.98%	16.12%	18.55%	13.69%
	18	4.61%	11.56%	0.98%	16.47%	18.92%	14.02%
	19	5.01%	12.05%	0.98%	17.27%	19.77%	14.77%
	20	5.01%	12.17%	1.12%	17.50%	20.02%	14.99%
	21 ^a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

HIRES 90K vendor B

	Année	CRP Médical	CRP Dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total	
						IC supérieur	IC inférieur
ADULTES	1	0.95%	3.03%	0.00%	3.95%	4.71%	3.20%
	2	1.33%	10.84%	0.09%	12.10%	13.37%	10.84%
	3	1.56%	16.19%	0.18%	17.64%	19.12%	16.16%
	4	1.85%	20.72%	0.18%	22.33%	23.95%	20.71%
	5	1.95%	24.35%	0.23%	26.00%	27.71%	24.30%
	6	2.06%	26.70%	0.23%	28.38%	30.13%	26.62%
	7	2.17%	29.66%	0.23%	31.35%	33.15%	29.54%
	8	2.46%	31.53%	0.23%	33.37%	35.20%	31.53%
	9	2.46%	33.12%	0.23%	34.91%	36.77%	33.06%
	10	2.64%	34.55%	0.23%	36.42%	38.30%	34.55%
	11	2.64%	35.49%	0.23%	37.34%	39.22%	35.46%
	12	2.70%	36.81%	0.23%	38.65%	40.55%	36.76%
	13	2.76%	37.83%	0.23%	39.69%	41.60%	37.79%
	14	2.89%	38.62%	0.23%	40.53%	42.44%	38.62%
	15	2.96%	39.28%	0.23%	41.21%	43.13%	39.29%
	16	3.02%	39.77%	0.23%	41.73%	43.65%	39.81%
	17	3.09%	40.56%	0.23%	42.53%	44.46%	40.60%
	18	3.16%	40.98%	0.23%	42.97%	44.90%	41.04%
	19	3.37%	41.52%	0.23%	43.62%	45.55%	41.68%
	20	3.65%	41.93%	0.23%	44.18%	46.12%	42.23%
	21 ^a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ENFANTS	1	0.88%	3.28%	0.00%	4.13%	5.14%	3.12%
	2	1.31%	11.52%	0.07%	12.75%	14.43%	11.06%
	3	1.55%	19.81%	0.07%	21.11%	23.18%	19.05%
	4	1.55%	25.82%	0.07%	27.03%	29.28%	24.78%
	5	1.93%	30.49%	0.17%	31.95%	34.31%	29.58%
	6	2.13%	34.42%	0.17%	35.92%	38.36%	33.49%
	7	2.13%	37.66%	0.17%	39.09%	41.57%	36.62%
	8	2.35%	40.29%	0.17%	41.80%	44.30%	39.29%
	9	2.46%	42.65%	0.17%	44.16%	46.69%	41.64%
	10	2.46%	44.32%	0.17%	45.79%	48.32%	43.25%
	11	2.71%	45.43%	0.17%	47.00%	49.54%	44.47%
	12	3.09%	46.27%	0.43%	48.15%	50.69%	45.61%
	13	3.09%	47.82%	0.43%	49.64%	52.19%	47.10%
	14	3.22%	48.38%	0.56%	50.32%	52.86%	47.78%
	15	3.22%	49.30%	0.56%	51.20%	53.75%	48.66%
	16	3.22%	49.58%	0.70%	51.54%	54.09%	49.00%
	17	3.49%	50.29%	0.70%	52.36%	54.90%	49.82%
	18	3.63%	51.00%	0.70%	53.11%	55.65%	50.57%
	19	3.91%	51.79%	0.70%	54.00%	56.53%	51.46%
	20 ^a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	21 ^a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CII BIONIC EAR

	Année	CRP Médical	CRP Dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total	
						IC supérieur	IC inférieur
ADULTES	1	0.38%	0.38%	0.03%	0.80%	1.10%	0.50%
	2	0.65%	0.41%	0.18%	1.24%	1.61%	0.87%
	3	0.89%	0.59%	0.30%	1.77%	2.21%	1.33%
	4	1.19%	0.65%	0.39%	2.21%	2.71%	1.72%
	5	1.37%	0.74%	0.42%	2.51%	3.03%	1.98%
	6	1.46%	0.89%	0.48%	2.80%	3.36%	2.25%
	7	1.58%	0.95%	0.66%	3.16%	3.75%	2.57%
	8	1.70%	1.04%	0.75%	3.46%	4.07%	2.84%
	9	1.91%	1.14%	0.81%	3.81%	4.46%	3.17%
	10	2.03%	1.20%	0.81%	3.99%	4.65%	3.33%
	11	2.12%	1.29%	0.84%	4.20%	4.87%	3.52%
	12	2.33%	1.29%	0.87%	4.43%	5.13%	3.74%
	13	2.39%	1.29%	0.87%	4.49%	5.19%	3.79%
	14	2.45%	1.38%	0.87%	4.64%	5.35%	3.93%
	15	2.54%	1.44%	0.87%	4.79%	5.51%	4.07%
	16	2.61%	1.50%	0.87%	4.91%	5.64%	4.18%
	17	2.67%	1.57%	0.87%	5.03%	5.76%	4.29%
	18	2.76%	1.60%	0.94%	5.21%	5.95%	4.46%
	19	2.85%	1.66%	0.94%	5.35%	6.11%	4.60%
	20	3.03%	1.66%	0.97%	5.56%	6.34%	4.79%
	21	3.19%	1.69%	1.00%	5.77%	6.56%	4.99%
	22	3.49%	1.72%	1.03%	6.14%	6.95%	5.32%
	23	3.68%	1.72%	1.03%	6.31%	7.14%	5.49%
ENFANTS	1	0.23%	0.76%	0.06%	1.05%	1.53%	0.57%
	2	0.71%	1.40%	0.24%	2.33%	3.05%	1.62%
	3	1.30%	2.29%	0.30%	3.85%	4.76%	2.94%
	4	1.30%	2.77%	0.42%	4.44%	5.41%	3.46%
	5	1.61%	3.25%	0.72%	5.49%	6.57%	4.41%
	6	1.85%	4.03%	1.03%	6.78%	7.97%	5.59%
	7	1.98%	4.57%	1.16%	7.54%	8.79%	6.29%
	8	2.10%	5.00%	1.47%	8.36%	9.67%	7.05%
	9	2.29%	5.42%	1.60%	9.07%	10.43%	7.70%
	10	2.48%	5.79%	1.60%	9.59%	10.99%	8.20%
	11	2.61%	5.91%	1.79%	10.00%	11.43%	8.58%
	12	2.92%	6.03%	1.86%	10.47%	11.93%	9.02%
	13	3.24%	6.16%	1.92%	10.94%	12.43%	9.46%
	14	3.37%	6.41%	1.99%	11.36%	12.86%	9.85%
	15	3.44%	6.47%	1.99%	11.47%	12.99%	9.96%
	16	3.63%	6.53%	2.05%	11.77%	13.30%	10.24%
	17	3.89%	6.59%	2.18%	12.18%	13.73%	10.63%
	18	3.95%	6.72%	2.25%	12.42%	13.98%	10.85%
	19	4.53%	6.91%	2.25%	13.12%	14.73%	11.52%
	20	4.73%	6.91%	2.38%	13.42%	15.04%	11.80%
	21	4.80%	6.91%	2.38%	13.48%	15.10%	11.86%
	22	4.87%	6.91%	2.46%	13.62%	15.25%	11.99%
	23	5.21%	6.91%	2.46%	13.93%	15.59%	12.27%

CLARION 1.2

	Année	CRP Médical	CRP Dispositif	CRP non concluant	Total toutes catégories	Total IC supérieur	IC inférieur
ADULTES	1	0.28%	0.28%	0.14%	0.70%	0.93%	0.47%
	2	0.38%	0.58%	0.24%	1.21%	1.51%	0.90%
	3	0.57%	1.25%	0.34%	2.15%	2.56%	1.75%
	4	0.77%	2.34%	0.51%	3.58%	4.10%	3.07%
	5	0.92%	3.61%	0.66%	5.12%	5.73%	4.51%
	6	1.09%	4.61%	0.74%	6.35%	7.03%	5.67%
	7	1.15%	5.50%	0.83%	7.36%	8.09%	6.64%
	8	1.35%	6.68%	0.96%	8.82%	9.61%	8.03%
	9	1.50%	7.38%	1.09%	9.77%	10.60%	8.94%
	10	1.75%	8.30%	1.29%	11.07%	11.94%	10.20%
	11	1.91%	9.04%	1.38%	12.00%	12.91%	11.10%
	12	2.20%	9.52%	1.59%	12.92%	13.85%	11.98%
	13	2.38%	9.96%	1.64%	13.55%	14.50%	12.59%
	14	2.57%	10.35%	1.73%	14.16%	15.13%	13.19%
	15	2.85%	10.77%	1.80%	14.87%	15.86%	13.88%
	16	3.20%	11.14%	1.87%	15.59%	16.60%	14.57%
	17	3.62%	11.57%	1.94%	16.42%	17.46%	15.39%
	18	4.35%	11.91%	1.94%	17.38%	18.44%	16.33%
	19	4.83%	12.24%	2.04%	18.18%	19.26%	17.10%
	20	5.42%	12.46%	2.11%	18.96%	20.05%	17.86%
	21	5.93%	12.64%	2.16%	19.60%	20.70%	18.49%
	22	6.19%	12.84%	2.26%	20.09%	21.21%	18.97%
	23	6.92%	13.10%	2.26%	20.94%	22.08%	19.80%
	24	7.36%	13.34%	2.35%	21.60%	22.75%	20.45%
	25	7.97%	13.54%	2.38%	22.33%	23.50%	21.16%
	26	8.46%	13.71%	2.43%	22.93%	24.13%	21.73%
	27	9.53%	13.91%	2.50%	24.07%	25.36%	22.78%
	28	10.43%	14.16%	2.50%	25.04%	26.46%	23.62%
ENFANTS	1	0.23%	1.68%	0.11%	2.02%	2.49%	1.56%
	2	0.38%	3.09%	0.20%	3.65%	4.27%	3.03%
	3	0.53%	5.26%	0.41%	6.14%	6.94%	5.35%
	4	0.80%	7.64%	0.54%	8.88%	9.82%	7.93%
	5	0.96%	9.96%	0.92%	11.64%	12.71%	10.58%
	6	1.26%	12.44%	1.22%	14.59%	15.76%	13.42%
	7	1.63%	14.31%	1.49%	16.97%	18.21%	15.72%
	8	1.91%	16.45%	1.84%	19.55%	20.87%	18.23%
	9	2.23%	17.78%	2.27%	21.44%	22.81%	20.07%
	10	2.49%	19.37%	2.82%	23.59%	25.01%	22.18%
	11	2.75%	20.48%	3.19%	25.14%	26.58%	23.69%
	12	2.98%	21.20%	3.46%	26.19%	27.66%	24.73%
	13	3.25%	21.86%	3.69%	27.19%	28.67%	25.70%
	14	3.57%	22.49%	3.80%	28.09%	29.59%	26.59%
	15	4.08%	23.63%	4.04%	29.71%	31.23%	28.18%
	16	4.85%	24.47%	4.37%	31.27%	32.81%	29.72%
	17	5.43%	25.12%	4.78%	32.56%	34.13%	31.00%
	18	6.51%	25.75%	4.99%	34.04%	35.63%	32.46%
	19	7.74%	26.25%	5.16%	35.47%	37.07%	33.87%
	20	9.15%	26.63%	5.34%	36.90%	38.52%	35.29%
	21	10.10%	27.08%	5.57%	38.10%	39.73%	36.47%
	22	11.39%	27.77%	5.75%	39.68%	41.32%	38.04%
	23	12.33%	28.12%	5.80%	40.64%	42.29%	38.99%
	24	13.86%	28.70%	5.97%	42.25%	43.92%	40.58%
	25	14.84%	29.47%	6.11%	43.61%	45.30%	41.92%
	26	15.74%	29.62%	6.50%	44.55%	46.28%	42.83%
	27	16.60%	30.10%	6.50%	45.50%	47.29%	43.70%
	28 ^a	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

NOUS CONTACTER

Ce rapport a pour objectif de fournir aux professionnels et à nos utilisateurs d'implants cochléaires des informations pertinentes sur la fiabilité de nos produits. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse hear@AdvancedBionics.com ou consulter le site AdvancedBionics.com pour obtenir des informations plus générales.



ADVANCED
BIONICS

POWERFUL CONNECTIONS



ADVANCED BIONICS LLC

28515 Westinghouse Place
Valencia, CA 91355, United States
T: +1.877.829.0026
T: +1.661.362.1400
F: +1.661.362.1500
info.us@advancedbionics.com

ADVANCED BIONICS AG

Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa, Switzerland
T: +41.58.928.78.00
F: +41.58.928.78.90
info.switzerland@advancedbionics.com

Pour plus d'informations sur les autres sites AB, rendez-vous sur *advancedbionics.com/contact*

Advanced Bionics – Une marque Sonova

Veuillez contacter votre représentant AB local pour connaître les autorisations réglementaires et la disponibilité dans votre région.